


**Полость рта –
забота моя**



**Ирригатор
для полости
рта КТ-2912**

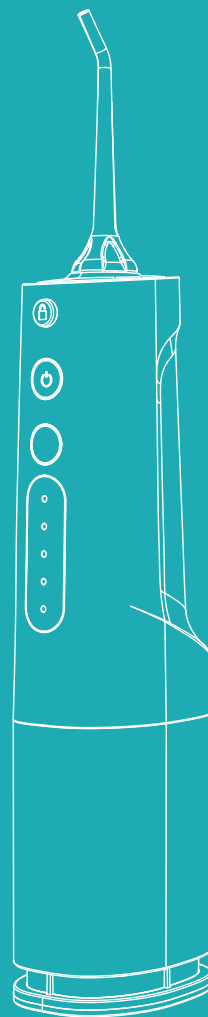

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание


| | |
|--|----|
| Общие сведения | 4 |
| Комплектация | 5 |
| Устройство ирригатора | 6 |
| Подготовка к работе и использование | 8 |
| Чистка, обслуживание, уход и хранение ирригатора | 12 |
| Устранение неполадок | 12 |
| Технические характеристики | 14 |
| Меры предосторожности | 15 |

Общие сведения

Ирригатор — это прибор для ухода за полостью рта. Он очень прост в использовании: налейте воду (или специальный раствор для полоскания зубов) в резервуар, выберите подходящий вам режим и начинайте очистку.

После еды остатки пищи застревают между зубами, забиваются в карманы десен. В таких случаях на помощь может прийти зубная нить или флоссер. Но для чистки зубов нитью необходимо обеспечить чистоту рук, а возможность помыть их имеется далеко не всегда. В противном случае повышается вероятность попадания в полость рта болезнетворных бактерий и вирусов. Также зубной нитью можно механически повредить десны.

Ирригатор может частично заменить зубную нить или флоссер. Тонкая и сильная струя воды вымывает остатки еды и налет из межзубного пространства и десневых карманов. Струя воды не только очищает труднодоступные места, но и тщательно массирует десны, что является хорошей профилактикой заболевания десен. Ирригатор считается самым гигиеничным вариантом ухода за полостью рта. Особенно он будет полезен для тех людей, которые носят брекететы, и людям с протезами или коронками.

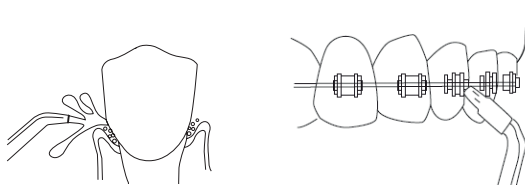

Модель Kitfort KT-2912 является портативным ирригатором, его можно брать с собой в путешествия или на работу — он с легкостью поместится в небольшой сумке.

У ирригатора 4 режима работы — «Normal» (нормальный), «Soft» (мягкий), «Pulse» (импульсный режим) и «DIY» (ручной). Если вы до этого не пользовались ирригатором, начните с режима «Soft», т.к. неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и тонкого потока воды. Когда десны привыкнут и окрепнут, вы можете переходить на режим «Normal», а затем на режимы «Pulse» и «DIY».

Ирригатор можно использовать, когда резервуар находится в сложенном состоянии, тогда его емкость составляет 150 мл. Но также его можно вытянуть вверх, тогда емкость резервуара увеличится и составит 360 мл.

Данная модель ирригатора имеет защиту от случайного включения. Кнопку включения надо нажать и удерживать несколько секунд, тогда прибор включится. При работе у ирригатора светится подсветка уровня заряда батареи. По цветам подсветки можно определять уровень заряда.

Прибор автоматически отключается после 2 минут использования.

В комплекте к ирригатору идут 4 классические струйные насадки. На насадках есть специальные цветные уплотнительные кольца, чтобы насадки нельзя было перепутать.



Заряжать прибор с помощью USB-шнура можно от компьютера или через сетевой адаптер, который наверняка окажется у вас дома.



С профилактическими целями ирригатор нужен каждому взрослому человеку. Ирригатор не заменяет собой зубную щетку, он является частью комплексного ухода за полостью рта. Комплексный уход для вас должен подобрать ваш лечащий врач-стоматолог, обычно уход включает в себя: ирригацию, чистку зубов зубной щеткой и ершиками, полоскание рта ополаскивателем и использование зубной нити, если это необходимо. Этот прибор рекомендуют стоматологи во всем мире.

Комплектация

1. Ирригатор:
 - Струйная насадка — 4 шт.
 - Резервуар для воды — 1 шт.
 - USB-шнур с нестандартным разъемом — 1 шт.
 2. Чехол — 1 шт.
 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
- *опционально

Устройство ирригатора

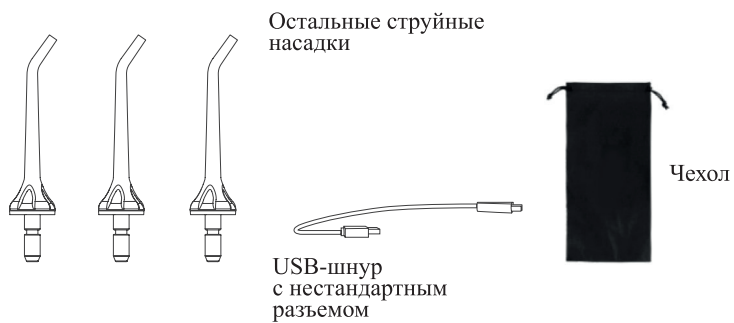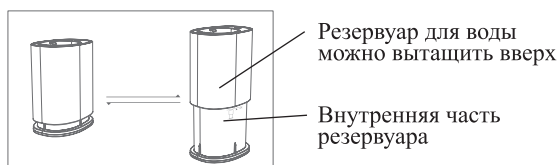

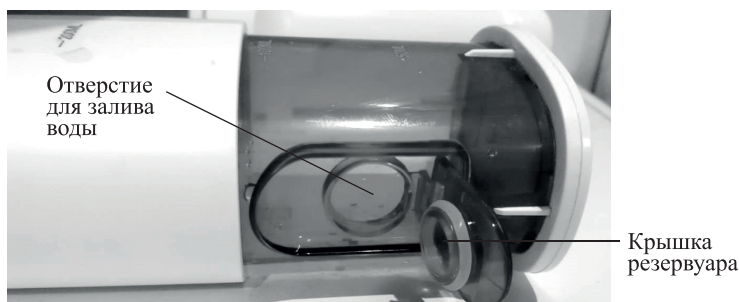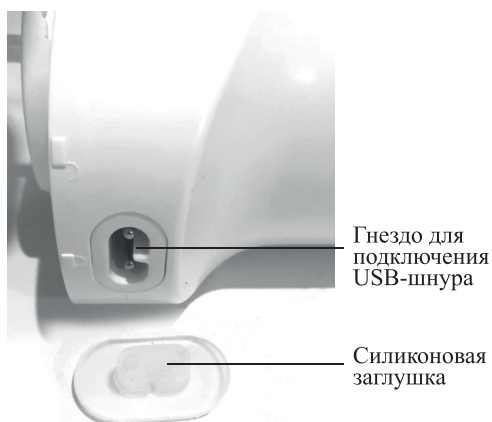

Режимы работы

В режиме «**Normal**» (**нормальный**) точно направленная струя воды очищает межзубное пространство и другие труднодоступные места во рту.

В режиме «**Soft**» (**мягкий**) струя не такая острая как в режиме «**Norma**». Если вы до этого не пользовались ирригатором, рекомендуется начинать им пользоваться, установив этот режим, т.к. неподготовленные и чувствительные десны могут начать кровоточить из-за сильного и резкого потока воды.

Режим «**Pulse**» (**импульсный**) предназначен для массажа десен и общей чистки полости рта пульсирующей струей воды. Массаж десен усиливает микроциркуляцию крови, что является хорошей профилактикой пародонтита и пародонтоза.

В режиме «**DIY**» (**ручной**) силу струи выбирает пользователь. Для настройки силы струи нужно выбрать этот режим, а затем нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл». Сила струи будет увеличиваться от самой слабой до самой сильной. Как только сила струи устроит пользователя необходимо отпустить кнопку «Вкл/Выкл». Ирригатор запомнит выбранный уровень струи, и в следующий раз при выборе этого режима будет выставлена та сила струи, которую вы выбрали в прошлый раз. Чтобы сбросить установленный уровень струи надо снова нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл», тогда струя сбросится до самой слабой.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием налейте воду в резервуар в отверстие для заливки воды, закройте отверстие крышкой, потрясите. После этого переверните ирригатор, откройте крышку отверстия и слейте оставшуюся воду. Насадки помойте водой с мылом.

Зарядка ирригатора

- 1) Вытащите силиконовую заглушку из корпуса ирригатора. Будьте осторожны и не потеряйте ее.
- 2) Вставьте в гнездо на корпусе разъем USB-шнура, другой конец шнура подключите в USB-разъем включенного электронного устройства, например, компьютера. Если у вас есть в наличии сетевой адаптер, то другой конец шнура вставьте в сетевой адаптер, а сам адаптер подключите в сеть.

Во время зарядки индикатор батареи мигает красным цветом. Когда устройство полностью зарядится, мигание прекратится, индикатор зарядки начнет гореть зеленым цветом непрерывно.

Внимание! Во время зарядки пользоваться ирригатором нельзя.


Перед первым использованием заряжайте устройство в течение 8 часов.


Если ирригатором не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте ирригатор разряженным на длительное время. Если вы оставите ирригатор разряженным, то батарея из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога, и электрическая схема заблокирует батарею.

Как налить воду


Используйте кипяченую воду или специальный раствор для полоскания рта. Температура воды или раствора должна быть не выше 50 °С.

Ирригатор можно использовать, когда резервуар находится в сложенном состоянии, тогда его емкость составляет 150 мл. Но также его можно вытянуть вверх, тогда емкость резервуара увеличится и составит 360 мл.

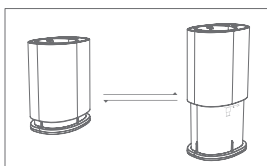

- Вы можете залить воду в резервуар двумя способами:
- 1) Снимите резервуар с корпуса, повернув резервуар в сторону открытого замка .



Налейте воду в резервуар через отверстие в резервуаре. Емкость резервуара в сложенном состоянии составляет 150 мл, емкость резервуара в вытянутом состоянии составляет 360 мл. Вставьте резервуар в корпус, чтобы метка на резервуаре совпала с закрытым замком  на корпусе.


2) Если резервуар установлен в корпус, оттяните его вниз до стрелочки на корпусе.

Примечание. Если внутреннюю часть резервуара вытянуть не до конца, то вода может начать сочиться из верхней части резервуара. Пожалуйста, вытаскивайте резервуар вниз до стрелочки и до символа ОК.

Откройте отверстие для залива воды и налейте в него воду. Вы можете переносить ирригатор с водой в резервуаре.


Как открыть крышку резервуара

Открывайте крышку резервуара аккуратно, строго вверх. Не раскачивайте ее из стороны в сторону, иначе крепления крышки могут сломаться.

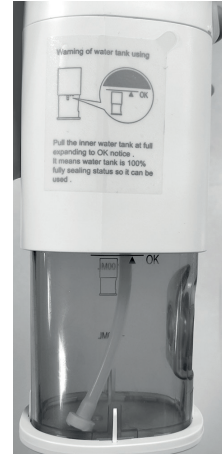

Установка насадки

Насадка является индивидуальным аксессуаром для каждого члена семьи. На насадках есть специальные цветные уплотнительные кольца. Это кольцо является прокладкой между насадкой и корпусом. Если вы помыли уплотнительное кольцо, не забудьте надеть его на струйную насадку.

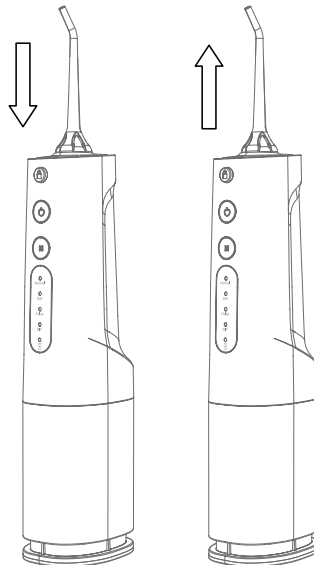


Вставьте насадку в отверстие до щелчка. Отверстие расположено в верхней части корпуса.

Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх.


Использование

- 1) Поверните наконечник струйной насадки, чтобы отрегулировать направление потока воды. Установленная насадка крутится на 360°.
- 2) Перед тем как включить ирригатор, наклоните его под углом 45° и направьте струйный наконечник себе в рот. Установите необходимый вам режим работы кнопкой «Режим».

Примечание. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Soft», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмированы резким и сильным потоком воды.

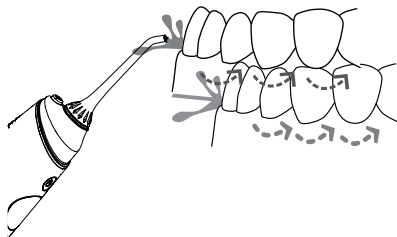

- 3) Наклонитесь над раковиной, а рот слегка приоткройте, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» и удерживайте ее несколько секунд. Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке, а именно двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте прибор только при нахождении насадки во рту.

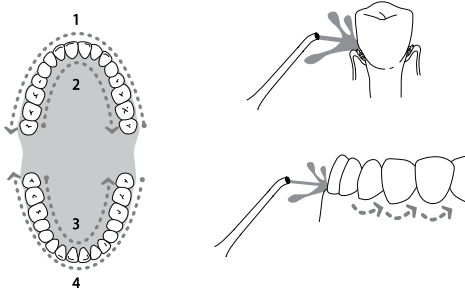

- 4) Когда вода закончится, выключите ирригатор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Аккуратно откройте крышку резервуара. Переверните ирригатор и слейте оставшуюся воду. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для полоскания, обязательно промойте ирригатор после него. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя сам прибор и насадку вниз в раковину.

Примечание. Если ирригатор не выключить, то через 2 минуты прибор отключится автоматически.

- 5) Отсоедините резервуар, если вы планируете долго не использовать прибор. Для этого одной рукой держите корпус ирригатора, а другой рукой поверните резервуар по часовой стрелке в сторону открытого замка. Снимите резервуар, откройте крышку, вытащите насадку, нажав на кнопку снятия насадки, просушите все части прибора и уберите их на хранение.

Примечание. Крышку отверстия для залива воды лучше открывать после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарялись. Либо снимайте полностью резервуар, повернув его в сторону открытого замка. Если крышку не открывать и резервуар не снимать с корпуса, ирригатором при это не пользоваться несколько дней, внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды.

Советы по использованию

Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Soft», иначе чувствительные десны могут быть травмированы резким потоком воды. Со временем десны привыкнут к новым ощущениям, и можно будет попробовать установить другие режимы.

Ирригатор можно также использовать и детям, предварительно проконсультировавшись у стоматолога. Начинать пользоваться ирригатором надо так же, установив режим «Soft», и постепенно переходить на более сильные режимы.

У ирригатора есть функция памяти. После нажатия на кнопку «Вкл/Выкл» будет включен тот режим, который вы установили при предыдущем включении.

Вы можете переключать режимы независимо от того работает ирригатор или выключен.

В первое время использования возможна небольшая кровоточивость десен. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.

Крышку отверстия для залива воды лучше открывать после каждого использования для того, чтобы остатки воды испарялись. Либо снимайте полностью резервуар, повернув его в сторону открытого замка. Если крышку не открывать и резервуар не снимать с корпуса, ирригатором при это не пользоваться несколько дней, внутренние части могут «задохнуться» и при последующем использовании давать неприятный запах застоявшейся воды.

Рекомендуемая температура воды или раствора должна быть не выше 50 °С, ориентируйтесь на свои ощущения, со временем вы поймете воду какой температуры использовать комфортнее всего.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать промывайте устройство сразу же после использования таких растворов.

Открывайте крышку резервуара аккуратно, строго вверх. Не раскачивайте ее из стороны в сторону, иначе крепления крышки могут сломаться.

Чистка, обслуживание, уход и хранение ирригатора

Протирайте корпус прибора сухой, а затем влажной тканью.

Периодически промывайте насадки водой с мылом. Меняйте насадки по мере износа.

Если прибор не использовался в течение долгого времени, промойте его. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя сам прибор и насадку вниз в раковину.

Если вместо кипяченой воды использовать специальные жидкости для полоскания рта, то с течением времени это может привести к образованию осадка в резервуаре и на внутренних поверхностях. Чтобы этого избежать промывайте устройство сразу же после использования таких растворов.

Как избавиться от известкового налета

Внутри ирригатора по истечении некоторого времени начинают скапливаться известковый налет и прочие отложения. Это зависит от жесткости воды. Налет накапливается как в резервуаре для воды, так и на внутренних поверхностях. Это затрудняет работу мотора и снижает срок службы прибора. Известковый налет также является благотворной средой для размножения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Средство для чистки ирригатора поможет удалить налет со всех поверхностей и скрытых элементов устройства. Действуйте согласно инструкции на таком средстве.

Также вы можете воспользоваться лимонной кислотой из расчета 3 г на 100 мл воды. Залейте 150 мл воды с растворенной в ней лимонной кислотой в резервуар ирригатора. Включите ненадолго ирригатор, после это оставьте на 15–20 минут. Затем включите ирригатор и прогоните с чистой водой несколько раз.

Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Вода вытекает из места соединения насадки с корпусом

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Уплотнительное кольцо струйной насадки повредилось или потерялось, и между насадкой и корпусом образовался зазор | Обратитесь к производителю за новым уплотнительным кольцом, установите его согласно инструкции |

Из резервуара льется вода

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Вы вытянули резервуар вверх, но не до стрелочки | Если внутреннюю часть резервуара вытаскивать не до конца, то вода может начать сочиться из верхней части резервуара. Пожалуйста, вытаскивайте резервуар вниз до стрелочки. |
| Уплотнительное кольцо патрубка износилось | Обратитесь к производителю за новым уплотнительным кольцом, установите его согласно инструкции |
| Крышка отверстия для залива воды пропускает воду | Обратитесь к производителю за новым уплотнительным кольцом, установите его согласно инструкции |

Низкое давление или ирригатор не включается

| Возможная причина | Решение |
|----------------------|--|
| Ирригатор разрядился | Произведите зарядку согласно инструкции так, как написано в главе «Зарядка ирригатора» |

Вода не поступает

| Возможная причина | Решение |
|--|--|
| Налет накопился на резервуаре или на внутренних поверхностях прибора | Произведите очистку ирригатора так, как описано в разделе «Чистка, обслуживание, уход и хранение ирригатора» |

Не снимается насадка

| Возможная причина | Решение |
|---------------------------------------|---|
| Вы не нажали на кнопку снятия насадки | Нажмите на кнопку снятия насадки и потяните насадку вверх |

Состояния подсветки уровня заряда батареи в верхней части корпуса:

- в рабочем режиме подсветка горит голубым;
- если аккумулятор разряжен на 70% подсветка будет мигать розовым;
- если аккумулятор разряжен полностью, индикатор будет мигать красным.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.



Технические характеристики

1. Батарея: Li-ion 3,7 В, 2000 мА*ч (7,4 Вт*ч)
2. Мощность: 5 Вт
3. Питание: ~5 В, 1 А
4. Частота пульсации струи: 1400–1800 имп/мин
5. Давление воды: от 2 до 8 бар (в зависимости от выбранного режима)
6. Емкость резервуара: 360 мл
7. Уровень шума: ≤ 72 дБ
8. Время зарядки: 4 часа
9. Режимов работы: 4
10. Автоотключение: через 2 минуты
11. Время работы ирригатора: 65 минут
12. Класс защиты от поражения электрическим током: III
13. Размер устройства: 68 × 55 × 365 мм
14. Размер упаковки: 83 × 68 × 245 мм
15. Вес нетто: 0,3 кг
16. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Юйсиньюань Электрик Текнолэджи Ко., Лтд. 301, №2, Хуаланцзя Индастриэл Парк, №28 Тунфуоу Индастриэл Эриа, Кукэн Кэмпьюнити, Гуаньянь Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать кипяченую воду или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Людям, которые недавно перенесли периодонтальную или стоматологическую хирургическую операцию, а также тем, кто проходит курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, перед применением ирригатора необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Если у вас наблюдается сильная кровоточивость десен после двух недель использования ирригатора, обратитесь к врачу и проконсультируйтесь с ним по этому поводу.
3. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
4. Используйте ирригатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором, ирригатор не игрушка.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования.
11. Температура воды или раствора должна быть не выше 45 °С.
12. Не допускайте падения ирригатора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Ирригатор — это не игрушка.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87