

Xiaomi Mi Electric Toothbrush
T700
электрлі тіс щеткасы
Пайдаланушы нұсқаулығы



Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулық

Тіс щеткасын алғаш қолданған кезде қышу немесе аздап қан кету пайда болуы мүмкін. Егер қызыл иек электрлік тіс щеткасымен қарқынды тазартуға дағдыланбаған болса, бұл қалыпты жағдай. Сіздің қызыл иегіңіз оған үйреніп алғанша, реттелетін режимді пайдалану ұсынылады. Әдетте қызыл иектің қан кетуі бір-екі апта ішінде өтеді. Егер ол кетпесе, тіс щеткасын қолдануды тоқтатып, тіс дәрігерімен кеңесіңіз.

ЕСКЕРТУ

- Ортодонтпен емделген, тісті қалпына келтіру бойынша стоматологиялық көмек алатын немесе тіс имплантаты орнатылған пайдаланушылар стоматологтардың ұсыныстарын ескере отырып, бұйымды пайдалануы тиіс.
- Бұл тіс щеткасы электромагниттік құрылғылар үшін қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Құрылғыны кардиостимуляторлармен немесе басқа имплантацияланған құрылғылармен бірге қолдануға қатысты кез-келген мәселе бойынша қолданар алдында дәрігермен немесе имплантацияланған құрылғыны өндірушімен кеңесіңіз.
- Бұл тіс щеткасы тек тістерді, тістерді және тілді тазартуға арналған. Өнімді қатаң түрде мақсатына сай пайдаланыңыз. Егер ауырсыну немесе ыңғайсыздық пайда болса, тіс щеткасын дереу тоқтатыңыз және тіс дәрігерімен кеңесіңіз.
- Зарядтау құрылғысын суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа салмаңыз.
- Штепсельде сұйықтық болған кезде зарядтау станциясын розеткаға салмаңыз.
- Бұл тіс щеткасының ішінде орнатылған батарея бар және оны ешқандай жағдайда отқа, зарядтауға, пайдалануға немесе жоғары температура жағдайында сақтауға болмайды.
- Тіс щеткасының денесіне және құлауына жол бермеңіз. Соққы немесе құлау салдарынан зақымдалған жағдайда оны қолдануды тоқтатыңыз.
- Тіс щеткасын өзіңіз өзгертуге, бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз.
- Бұл құралды физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар (ересектер немесе балалар) және тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында немесе бақылауында болмаса, пайдаланбауы керек.

- Балалар құрылғымен ойнауға тиіс емес. Балаларға құрылғыны тазартуға және ересектердің қарауынсыз басқа да күтім шараларын орындауға рұқсат бермеңіз.
- Тіс щеткасы кіріктірілген батареямен жабдықталған, оны алып тастауға немесе ауыстыруға болмайды. Батареяны шашпаңыз немесе модификацияламаңыз.
- Еуропада толық радиацияға қойылатын талаптарды сақтау үшін пайдаланушы денесі мен құрылғы арасында кемінде 0 см қашықтық болуы тиіс.
- Құрылғыны және батареяны оттан алыс ұстаңыз және оларды күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз. Құрылғыны немесе батареяны шамадан тыс температураға ұшыратпаңыз.
- Батареяның қызып кетуіне немесе улы немесе қауіпті заттардың шығуына жол бермеу үшін өнімді немесе батареяны ашпаңыз, өзгертпеңіз, теспеңіз, зақымдамаңыз немесе бөлшектемеңіз. Батареяны қысқа тұйықталуға, қайта зарядтауға немесе кері зарядтауға жол бермеңіз.
- Егер батарея зақымдалған немесе ағып кетсе, теріге немесе көзге тигізбеңіз. Егер бұл орын алса, дереу сумен жақсылап шайыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.
- Өнімді және оның аккумуляторын микротолқынды пештерге немесе индукциялық пештерге салмаңыз.
- Бұл құрылғыда батарея бар, оны ауыстыруға болмайды. Кезде аккумулятордың жұмыс мерзімі аяқталып, құрылғы болуы тиіс тиісті түрде пайдаға асырылған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Тіс щеткасын қолданар алдында оның зақымдалмағанын тексеріңіз. Ауыр жарақат алған жағдайда тіс щеткасын пайдаланбаңыз.
- Қосудың алдында бұйымның тамаққа көз, розетканың кернеуі өнімнің номиналды кернеуіне сәйкес келеді.
- Тікелей күн сәулесінде сыртқы зарядтау станциясын пайдаланбаңыз.
- Ванна мен душта шомылу кезінде тіс щеткасын пайдаланбаңыз.


- Тіс щеткасының басын басқа адамдармен бірге қолдануға жол бермеңіз.
- Қуат сымын розеткаға қосылған кезде зарядтау станциясының айналасына орамаңыз.
- Розеткаға қосылған кезде зарядтау станциясына металл заттарды қоймаңыз.

Ескертпе: бұйымның, жиынтықтауыштардың және пайдаланушы интерфейсінің иллюстрациялары пайдаланушы нұсқаулығында тек қана таныстыру мақсатында ұсынылған. Құрылғының нақты сипаттамалары және оның функциялары өнімнің жақсаруына байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Өнімде келесі таңбалар көрсетіледі:



Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.


- ☞  Қуат көзінің алынбалы бөлігі: 5 В=1 А шығысы бар қуат адаптерін қолданыңыз, ол тиісті жергілікті стандарттарға, стандарттарға және сертификаттауға сәйкес келеді.

Толық электрондық нұсқаулықты мына жерден қараңыз www.mi.com/global/service/userguide

Өнімнің сипаттамасы

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Оны сақтаңыз – сізге болашақта қажет болуы мүмкін.

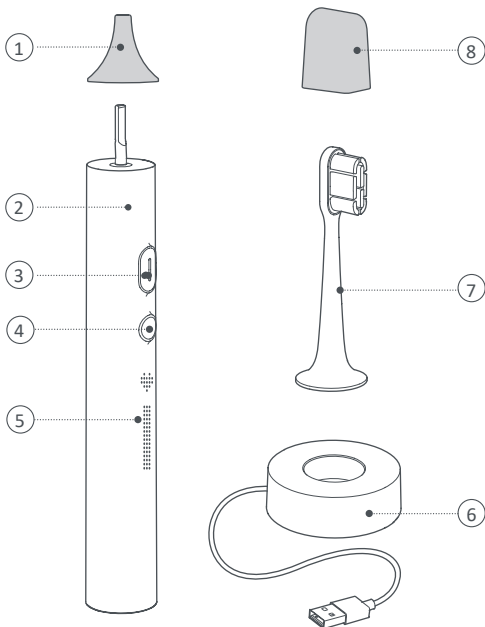

① Корпустың қорғаныс жабыны

② Тіс щеткасының тұтқасы

③ Қосу/Өшіру батырмасы

④ Режим/Қуат батырмасы

⑤ Ақылды жарықдиодты
дисплей


⑥ Зарядтау док-станциясы

⑦ Тіс щеткасының басы

⑧ Тіс щеткасының басын қорғау
қақпағы

Тіс щеткасының басын орнату

Тіс щеткасының басы тіс щеткасының тұтқасының алдыңғы жағына орнатылғанына көз жеткізіңіз, сонымен қатар тіс щеткасының басы мен тұтқаның арасында кішкене алшақтық бар екеніне көз жеткізіңіз. (Тіс щеткасының басын жоғары жиілікті тербелістер кезінде тұтқамен соқтығыспау үшін тазарту қажет.)

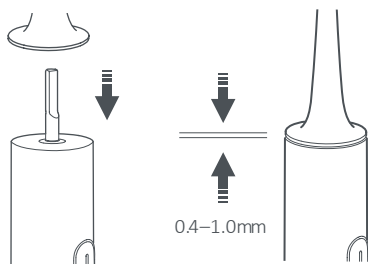

Нұсқаулық



Қосу / өшіру

«Қосу/Өшіру» батырмасы

Қосу: тіс щеткасын қосу үшін батырмасын басыңыз. Алғаш рет қосылған кезде тіс щеткасы стандартты режимде қосылады.

Өшіру: тіс щеткасын өшіру үшін батырмасын басыңыз.

Режимді/қуатты өзгерту

Режим/қуат батырмасы

Режимді өзгерту: тіс щеткасы қосылған кезде режимдерді ауыстыру үшін батырманы басыңыз.

Қуатты біркелкі реттеу: тіс щеткасын қосқан кезде, қуатты біркелкі реттеу үшін батырманы басып тұрыңыз.

Ескертулер: қуат өзгерген сайын тазалау таймері қайта іске қосылады. Қуатты реттеу тек ағымдағы режим үшін жүзеге асырылады. Басқа режимдердегі қуат өзгермейді.

Тазалау режимдерінің сипаттамасы

- Стандартты режим: күнделікті ауыз гигиенасы үшін қолайлы
- Жұмсақ режимі: сезімтал тіс үшін жарамды
- Теңшелетін режим: қосымша әдепкі параметрлердің екі минуттық режимі. Қосымша функциялар мен режимдерді Mi Home/Xiaomi

Home қосымшасында конфигурациялауға болады, оның ішінде тазалау ұзақтығы, он секунд ішінде шашырауға қарсы қорғаныс, бастаушы пайдаланушы режимі, сезімтал тіс режимі, қосымша параметрлер режимі, қосымша функциялар және т.б. Бұл параметрлер теңшелетін режимде қол жетімді.



Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Қосу/өшіру және режим/қуат батырмасын бір уақытта 5 сек бойы басып және ұстап тұрыңыз; ақылды жарықдиодты дисплей батырмаларды босатқанша ақ түспен жарқырайды. Осылайша, өнімнің зауыттық параметрлері қалпына келтіріледі.

Ескерту: тіс щеткасына арналған қосымшаның барлық мүмкіндіктерімен танысу үшін зауыттық параметрлерді қалпына келтіргеннен кейін біраз уақыттан кейін Mi Home/Xiaomi Home қосымшасына кіріңіз.

Дұрыс тазалау

- Тіс щеткасының басын қызыл иек сызығына 45° бұрышта ұстап, оны тістер мен қызыл иек бойымен баяу жылжытыңыз.
- Тазалау кезінде әр 30 секунд сайын тіс щеткасы біраз уақытқа дірілдеуді тоқтатады, бұл пайдаланушыға щетканың орнын өзгерту керектігін еске салады.
- Егер пайдалану кезінде белсенді үзілістер болмаса, тазалау режимі аяқталғаннан кейін тіс щеткасы автоматты түрде өшеді. Тазалау ұзақтығын Mi Home/Xiaomi Home қосымшасында орнатуға болады.

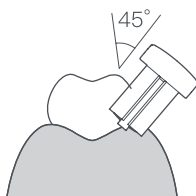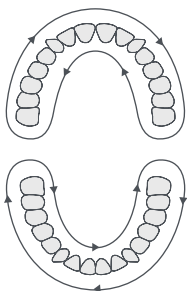

Дисплейдегі белгілер



Стандартты режим



Жұмсақ режим



Меншікті режим



Қуат индикаторы



Bluetooth-ға қосылу дайындық (индикаторлар жәй жанады)



Bluetooth арқылы байланыс (индикаторлар бірінен соң бірі қосып, өшеді)



Bluetooth-ға сәтті қосылды




Тазалықты бағалау



Тазалықты 95-тен жоғары бағалау



Тазалық бір минуттан аз созылды

- **Қуат индикаторы:** қуат неғұрлым жоғары болса, индикатор соғұрлым жарқын болады.
- **Тазалау бағасы:** әр тазалаудың соңында дисплей тазалау бағасын көрсетеді. Егер тазалау бағасы 95-тен асса, көрсетіледі «». Егер тазалау бір минуттан аз уақытқа созылса, көрінеді «...».

MiHome/Xiaomi Home қосымшасы, егер ол бір минуттан аз уақытқа созылса, тазалау деректерін сақтамайды. Әр уақытта тістеріңізді кем дегенде бір минут щеткамен тазалау ұсынылады.

Дисплейдегі хабарландырулар

- Тіс щеткасын бірінші рет қосқан кезде дисплейдегі хабарландыру функциясы автоматты түрде іске қосылады. Содан кейін, сіз тіс щеткасын алған кезде, дисплей автоматты түрде жанады және қазіргі тазалау режимін көрсетеді.
- Егер Mi Home/Xiaomi Home қосымшасында пайдаланушының лақап аты немесе туған күні көрсетілсе, онда дисплейде бұл бүркеншік ат немесе туған күн туралы хабарлама тіс щеткасын алған кезде пайда болады.


Ескертпелер:

- Егер дисплейде бүркеншік ат немесе туған күн туралы хабарлама болса, тазалау режимі көрсетілмейді.
- Егер сіз тіс щеткасын сапарға шығарып салсаңыз және тасымалдау кезінде бұйымды шайқау және соғу орын алса, дисплейдегі хабарландыру функциясы уақытша автоматты түрде өшеді. Ол тіс щеткасын қосқан кезде немесе 30 минут ішінде қозғалыс болмаған кезде қайтадан қосылады.

Тіс щеткасының басын тазарту

- Тістеріңізді щеткадан кейін тіс щеткасының басын ағынды сумен шайыңыз.
- Тіс щеткасының басын сызып, тазалық пен гигиенаны сақтау үшін оған қорғаныс қақпағын салыңыз.

Ескерту: тіс щеткасының басын әр үш ай сайын өзгерту ұсынылады.

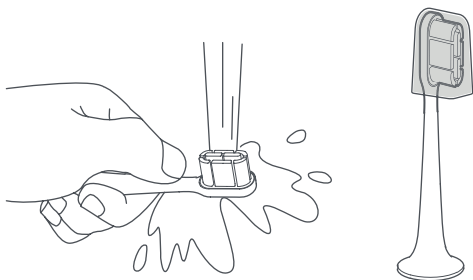

Ақылды функциялар

Артық қысым туралы хабарлама

Тіс щеткасы нақты уақыт режимінде қысымды анықтайтын артық қысымды қорғау жүйесімен жабдықталған. Егер тістеріңізді щеткалау кезінде тым көп қысым жасалса, артық қысым туралы ескерту индикаторы қызыл түспен тез жыпылықтайды және пайдаланушыға хабарлау үшін тіс щеткасы әртүрлі амплитудамен дірілдейді.



Тіс щеткасы тұтқасының артқы жағындағы артық қысым туралы ескерту индикаторы қызыл түспен тез жыпылықтайды.

Mi Home/Xiaomi Home қосымшасына қосылу










- Өнім Mi One/Xiaomi Home* - мен жұмыс істейді. Осы қолданбада құрылғыны басқарыңыз.
- Қосымшаны жүктеу және орнату үшін QR кодын сканерлеңіз. Егер бағдарлама орнатылған болса, сіз қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Немесе бағдарламаны жүктеу және орнату үшін App Store дүкенінен «Mi Home/Xiaomi Home» іздеңіз.
- Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақтағы «+» батырмасын басып, құрылғыны қосу нұсқауларын орындаңыз.




BF149176

Ескерту: қосымшаның нұсқасы жаңартылуы мүмкін. Бағдарламаның ағымдағы нұсқасы үшін нұсқауларды орындаңыз.

Тұрақты зарядтау

Тіс щеткасының күйі	Аккумулятор зарядының деңгейінің индикатор күйі	Заряд деңгейі
Пайдалану	 Тез жыпылықтау	<25%
	 Тез жыпылықтау (мүмкін емес)	Батарея таусылған
Зарядтау	 Толығымен жанып тұр (зарядтау аяқталды)	100%
	 5-шы сызық жәй жыпылықтайды	100%-80%
	 4-шы сызық жәй жыпылықтайды	80%-60%
	 3-шы сызық жәй жыпылықтайды	60%-40%
	 2-шы сызық жәй жыпылықтайды	40%-20%
	 1-шы сызық жәй жыпылықтайды	<20%
	 Жәй жыпылықтайды	0%

- Тіс щеткасын зарядтау станциясы T700 тіс щеткасына арналған және басқа өнімдермен үйлесімді емес.
 - Егер батарея толығымен таусылғаннан кейін тіс щеткасы қосылмаса, толық зарядтау үшін шамамен алты сағат кетеді. Толық зарядтауға кететін уақыт зарядтаудың басындағы батарея деңгейіне байланысты.
- * Егер тіс щеткасының батареясы толығымен таусылып, ұзақ уақыт зарядталмаса, зарядтау белгішесі келесі жолы тіс щеткасы зарядталған кезде баяу жыпылықтауы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

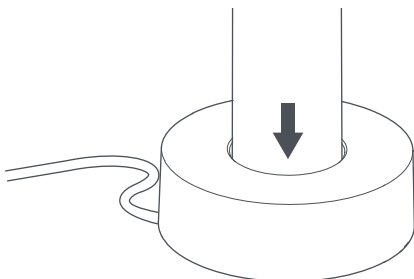

Техникалық сипаттамалары

Атауы: Xiaomi Electric Toothbrush T700 электрлі тіс щеткасы	
Үлгісі: MES604	Номиналды кернеуі: 3,7 В \equiv
ТМ: Xiaomi	Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
Таратқыш қуаты: ≤ 4 дБм.	Жиілік жұмыс диапазоны: 2402 МГц-2480МГц.
Номиналды қуат: 4,2 Вт	Номиналды енгізу: 5 В \equiv 1 А
Зарядтау уақыты: 6 сағ.	Қорғау класы: IPX7

Мақсаты – электрлік тіс щеткасы тістерді тазартуға арналған.

Өнімді пайдалану және сақтау шарттары

Сақтау температурасы: 20 ± 15 °C:

Салыстырмалы ылғалдылығы: $65 \pm 20\%$ rh

Бұйымның жұмыс температурасы – 5 °C-ден 35 °C,
сақтау температурасы – 20 °C-ден 45 °C.

Өнімді экстремалды температураға немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыратпаңыз. Жұмыс температурасы немесе сақтау температурасы жұмыс ауқымынан асып кетсе, өнім істен шығуы мүмкін және батареяның қызмет ету мерзімі қысқарады. Егер өнім машинада қалса немесе ұзақ уақыт күн сәулесінің тікелей әсеріне ұшыраса, температура жұмыс температурасынан асып кетеді. Бұл жағдайда өнімді күн сәулесінен алыс салқын, жақсы желдетілетін жерге жылжытыңыз, содан кейін оны қайтадан іске қосып көріңіз.

Электротехникалық бұйымдар мен буып-түю материалдарын кәдеге жарату және қайта өңдеу бойынша өз еліңіздің заңнамасының талаптарын сақтаңыз. Жарамсыз болып қалған электр аспаптары мен электр құрылғыларын, батарейкалар/аккумуляторларды (бар болса) бөлек жинау және буып-түю материалдарын қайта пайдалануды және/немесе оларды қайта өңдеуді көтермелеу, сондай-ақ теріс әсерлердің алдын алу болып табылады.

Ақаулықтарды жою


Мәселелер	Мүмкін себептері	Шешімдері
Қосылмайды	Заряд	Тіс щеткасын зарядтау станциясынан алыңыз
	Аккумулятордың заряды тым төмен деңгейі	Зарядтау үшін тіс щеткасын зарядтау станциясына салыңыз
Тіс щеткасының басын өзекке орнату мүмкін емес	Тіс щеткасының басына бір нәрсе жабысып қалды	Тіс щеткасының басынан кептелген объекті алу үшін қандай да бір құрылғыны пайдаланыңыз.
	Өзекке бір нәрсе жабысып қалды	Өзекшені тазалаңыз
	Түпнұсқа емес тіс щеткасының басы қолданылады	Оны тіс щеткасының бастапқы басымен ауыстырыңыз
Шамадан тыс қуат тұтыну және жиі зарядтау қажеттілігі	Bluetooth арқылы телефонмен ұзақ байланыс	Тіс щеткасы қолданылмаған кезде Bluetooth функциясын өшіріңіз.
	Тым жиі пайдалану	Зарядтау үшін тіс щеткасын зарядтау станциясына салыңыз
Тіс щеткасының басының әлсіз дірілі	Тіс щеткасының басы дұрыс орнатылмаған	Тіс щеткасының басын қайта орнатыңыз
	Тіс щеткасының басы мен тұтқаның арасына бір нәрсе жабысып қалды	Тіс щеткасының басын шешіп және кептелген объекті алып тастаңыз.
Mi Home/ Xiaomi Home қолданбасына қосылу мүмкін емес	Телефонда Bluetooth қосылмаған	Телефондағы Bluetooth функциясын қосыңыз және Mi Home/ Xiaomi Home қосымшасы арқылы тексеріңіз
	Тіс щеткасы телефоннан тым алыс	Тіс щеткасын телефонға жақын қойыңыз
	Тіс щеткасы қазірдің өзінде қосылған	Тіс щеткасын өшіріп, қайта қосылуға тырысыңыз
	Батарея деңгейі тым төмен	Зарядталғаннан кейін қайта қосылуға тырысыңыз

Қоршаған ортаны қорғау

Тіс щеткасының қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, жергілікті заңнамаға және ол қолданылатын елдің немесе аймақтың ережелеріне сәйкес кіріктірілген батареяны шығарып алыңыз, қайта өңдеңіз немесе қайта өңдеңіз. Егер батареяны алып тастау мүмкін болмаса, тіс щеткасын ресми мамандандырылған өңдеу орталығына тапсырыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Батареяны шығарар алдында тіс щеткасын өшіру керек. Батареяны шығарар алдында оның толық зарядталғанына көз жеткізіңіз. Сіз тіс щеткасын жұмыс істемей тұрғанша қалдыра аласыз және батарея заряды біткенше осы процедураны қайталай аласыз.

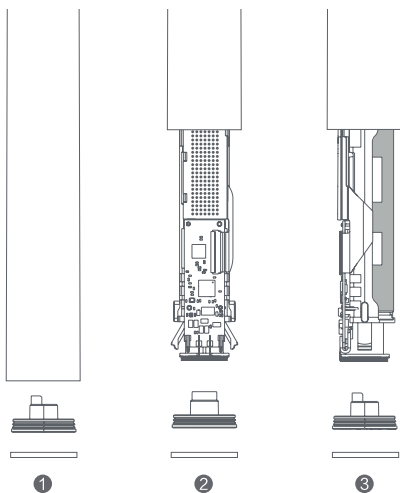

Батареяны қалай шығаруға болады

- ① Тіс щеткасының тұтқасының төменгі жағындағы сәндік элемент пен қақпақты алыңыз.
- ② Ішкі ұстағышты алыңыз.
- ③ Батареяға қосылған сымды кесіп, батареяны алыңыз.

Ескерту: батареяны өзіңіз ауыстырмаңыз. Батареяны күшпен шығару тіс щеткасының жұмысына зиян тигізуі мүмкін; абай болыңыз.

Талаптарға сәйкестігі туралы ақпарат

Электр және электрондық жабдықтардың қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеу туралы ақпарат

Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды бөлек жинау символымен белгіленген барлық бұйымдарды (WEEE, 2012/19/EU директивасы) сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жарату керек. Денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау мақсатында мұндай жабдықты үкімет немесе жергілікті билік органдары айқындаған электр және электрондық жабдықтарды қабылдайтын арнайы пункттерге қайта өңдеуге тапсыру қажет. Дұрыс қайта өңдеу және қайта өңдеу қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Мұндай жинау пункттері қайда және олар қалай жұмыс істейтінін білу үшін жабдықты орнатумен айналысатын компанияға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.



Шығарылған күні: қаптаманы қараңыз
Импорттаушы туралы ақпарат және сатудан кейінгі қызмет көрсету бөлімінің ақпараты қаптамада көрсетілген.

Қытайда жасалған.

Қызмет мерзімі

Өндіруші белгілеген өнімнің қызмет ету мерзімі өнім осы пайдалану нұсқаулығына және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда өндірілген күннен бастап 5 жылға тең.

Қосымша ақпарат алу үшін сайтқа кіріңіз www.mi.com

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдаланушы нұсқаулығының «Тіс щеткасының басын орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қаптамада ауа температурасы 5 °С-ден 35 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 85 %- дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: УСи ЦинХэ СяоБэй Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 1106, 11-ші қабат, 530-ғимарат № 2, Биньху ауданы, Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: «ДИХАУС» ЖШС.
105066, Ресей, Мәскеу қаласы, Доброслободская көшесі, 5 үй, 1 ғимарат, 10 бөлме.

Тауар Кеден одағының КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Дайындау күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

