



Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Массажер для тела электрический
Денеге арналған электр массажер

GL4942

EAC

ОГЛАВЛЕНИЕ / KІРІСПЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕННЫХ МАССАЖНЫХ НАСАДОК	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	7
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ	11
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	12
БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА	13
ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ	14
АУЫСТЫРМАЛЫ МАССАЖДЫҚ САПТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ	14
ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ	15
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	15
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	15
КЕПІЛДІК ШАРТТАР	15
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	18

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



Рис. 1

Элементы электроприбора (рис. 1):

1. Корпус
2. Включение/выключение электроприбора и ИК прогрева
3. Регулятор скорости вращения массажной головки
4. Вращающаяся массажная головка прибора
5. Инфракрасный прогрев
6. Защитная сетчатая насадка
7. Пальчиковая массажная насадка
8. Валиковая массажная насадка
9. Шариковая массажная насадка
10. Волнистая массажная насадка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.
2. При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
3. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
4. Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
5. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, при смене насадок, чистке и после окончания работы.
6. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
7. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
8. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ».
9. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
10. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
12. Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
13. Всегда ставьте электроприбор на ровную поверхность.
14. Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
15. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +15 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 65%.



ВНИМАНИЕ! Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости! Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на электроприбор могут попасть брызги каких-либо жидкостей! Настоятельно не рекомендуется использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды! Не трогайте работающий прибор мокрыми руками!

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВАЖНО! Перед применением электроприбора рекомендуется проконсультироваться с врачом:

- беременным женщинам;
- в случае заболеваний сердца;
- больным с заболеваниями мышц, суставов и вен;
- а также в случае любых других проблем со здоровьем.

ВНИМАНИЕ!

- пользуйтесь прибором не менее, чем через час после приема пищи;
- не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут;
- не используйте прибор для массажа головы;
- не используйте массажер непосредственно перед сном;
- не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37°C;
- если во время использования прибора вы испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для массажа тела.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности, вызываемой случайным возвратом термовыключателя в исходное положение, прибор не должен питаться через внешнее устройство, такое как таймер, или не должен быть соединен с цепью, в которой происходит регулярное включение и выключение питания.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).
2. Протрите корпус и насадки электроприбора влажной тканью.
3. Снимите с электроприбора защитную сетчатую насадку, повернув большое кольцо против часовой стрелки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1. Наденьте необходимую массажную насадку на головку электроприбора до щелчка.

ВНИМАНИЕ! Нельзя устанавливать насадки (7-10) поверх сетчатой насадки (6).

2. Проверив соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убедившись, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ», подключите штекер шнура питания к сети.

3. Включите электроприбор, установив переключатель режимов в положение «ВКЛ»

4. Для включения инфракрасного прогрева, установите переключатель режимов в положение «ИК».

5. Поворачивайте регулятор скорости вращения по или против часовой стрелки, чтобы установить комфортную для Вас скорость.

6. После использования, поверните регулятор против часовой стрелки до минимума, отключите прибор, установив переключатель режимов в положение «ВЫКЛ», затем выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! Для получения оптимальных результатов рекомендуется использовать электроприбор ежедневно по 10-15 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕННЫХ МАССАЖНЫХ НАСАДОК

Пальчиковая насадка — дает эффект, сходный с глубоким ручным массажем (Шиаци), интенсивным воздействием пальцами профессионального массажиста, также подходит для массажа ног.

Валиковая насадка — применение этой насадки дает немедленный результат, уменьшает целлюлит, повышает упругость кожи и мышц, тонизирует и расслабляет мышцы, улучшает лимфодренаж, уменьшает лишний объем и делает мышцы более рельефными.

Шариковая насадка — отлично подходит для деликатных участков тела: лица, шеи, груди. Тонизирует мышцы, улучшает упругость кожи.

Волнистая насадка — насадка для разминающего массажа, выполняемого ладонями рук, тонизирует и улучшает циркуляцию крови.

Защитная сетчатая насадка — используется в местах, где в движущиеся части массажера могут попасть волосы. Применяется без использования кремов и других насадок кроме волнистой.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для домашнего использования.

Чистка прибора

Пластиковую поверхность прибора следует протирать мягкой влажной тканью. При сильном загрязнении допускается добавление в воду небольшого количества нейтрального моющего средства.

Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса изделия.

Все сменные насадки следует промывать в теплой воде после каждого использования до полного очищения от остатков косметических средств. При необходимости можно добавить в воду немного мыла или нейтрального моющего средства.

Тщательно просушите все насадки перед хранением или повторным использованием.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +10 до +30 °C и относительной влажности не более 65%.

- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Во избежание повреждений перевозите прибор только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения прибора при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ



Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами.

Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2. Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

3. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.

4. Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).

5. Изделия без читаемого серийного номера.

6. Комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД

Адрес: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - номер заказа /месяц год изготовления / порядковый номер изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240 В ~ 50 Гц
Мощность	50 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током	II 

Данный прибор соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Товар сертифицирован.



ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ



1 сур.

Электр құралының элементтері (1 сур.):

1. Корпус
2. Электр құралын және инфрақызылдық қызуды іске қосу/ажырату
3. Массаждық бастектің айналу жылдамдығын реттегіш
4. Құралдың массаждық айналғыш бастиегі
5. Инфрақызылдық қызу
6. Қорғаушы торлы саптама
7. Шынашақтық массаждық саптама
8. Білікшелік массаждық саптама
9. Шарлы массаждық саптама
10. Толқынды массаждық саптама

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

1. Құралды қуат беру көзіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-240 В ~ 50 Гц мәндеріне сәйкес келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.
2. Құралды желіден ажырату кезінде сымнан емес, істікшеден ұстау керек болады.
3. Балаларға құралға тіпті ол егер сөндірілген және желіден ажыратылған болса да жанасуға болмайды. Балалардың құралмен ойнауларына жол бермеу үшін бақылауда болулары керек.
4. Құралды егер ол қолданылмаса әрдайым желіден ажыратып отыру керек.
5. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
6. Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды күту аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
7. Сым мен құралдың бүтіндігін қадағалау керек. Құралды бүлінулер бар болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.
8. Электр құралын желіге қосудың алдында ажыратқыштың «АЖЫР» күйінде тұрғандығына көз жеткізіп алыңыз.
9. Жұмыс істеп тұрған электр құралының жанында балалар мен жануарлардың болуларын болдырмаңыз.
10. Электр құралын егер жану немесе жарылу қаупі бар болған жағдайда қолданбаңыз, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдың жанында.
11. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны өндіруші немесе оның агенті, немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылуы керек.
12. Іске қосулы құралды қараусыз қалдырмаңыз.
13. Электр құралын әрдайым тегіс бетке қойыңыз.
14. Жиынтықта кіретін саптамаларды ғана қолданыңыз.
15. Аталған үлгі +15-тан +30°C-қа дейінгі жұмыс температураларының ауқымындағы қоңыржай климат шарттарында және ауаның 65%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жұмыс істеуге арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды! Электр құралын оған қандай да болмасын сұйықтықтардың шашырандылары тиіп кетуі мүмкін жерлерде немесе ылғалды ортада қолданбаңыз! Электр құралын ванна бөлмесінде, бассейндердің және басқа да су көздерінің жанында қолданбаңыз! Жұмыс істеп тұрған құралды дымқыл қолдармен ұстамаңыз!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

HAZAP AУDAPЫҢЫЗ! Құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қасиеттері төмендеген немесе егер олар қарауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлға арқылы құралды қолдану жөнінде нұсқау берілмеген жағдайларда тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған.

HAZAP AУDAPЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

MAҢЫЗДЫ! Электр құралын қолданудың алдында дәрігерден кеңес алу ұсынылады:

- жүкті әйелдерге;
- жүрек аурулары кезінде;
- бұлшықеттері, буындары және көктамырлары ауыратын науқастарға;
- сонымен қатар денсаулыққа байланысты басқа да кез келген жағдайда.

HAZAP AУDAPЫҢЫЗ!

- құралды тағам қабылдағаннан кейін кем дегенде бір сағаттан соң қолданыңыз;
- құралды бір орында 15 минуттан көп қолданбаңыз,
- құралды басқа массаж жасау үшін қолданбаңыз;
- массажерді тура ұйықтар алдында қолданбаңыз,
- егер қоршаған ортаның температурасы 37°C-тан жоғары болса құралды қолданбаңыз;
- егер пайдалану кезінде сіздің жүрегіңіз айныса, басыңыз айналса, кездеде ауыруды сезінсеңіз немесе басқа да жағымсыз белгілер кезінде қолдануды тоқтатыңыз және дәрігерге көрініңіз.

HAZAP AУDAPЫҢЫЗ! Құрал тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.

HAZAP AУDAPЫҢЫЗ! Құрал тек денеге массаж жасауға ғана арналған.

HAZAP AУDAPЫҢЫЗ! Термоажыратқыштың бастапқы қалыпқа кездейсоқ қайтуымен шақырылатын қауіптерге жол бермеу үшін, құралға таймер секілді сыртқы құрылғы арқылы қуат берілмеуі керек немесе қуат беруді тұрақты іске қосу және сөндіру орын алушы тізбекпен қосылмаған болуы керек.

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

1. Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз.
2. Құралдың корпусын дымқыл матамен сүртіңіз.
3. Электр құралынан үлкен сақинаны сағат тіліне қарсы бұрай отырып қорғаушы торлы саптаманы шешіңіз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

1. Қажетті массаждық саптаманы электр құралының бастиегіне шыртылға дейін кигізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Саптамаларды (7-10) торлы саптаманың (6) үстіне орна туға болмайды.

2. Қуат беру желісі параметрлерінің құралда көрсетілген деректерге сәйкестіктерін тексере отырып, және ажыратқыштың «АЖЫР» күйінде тұрғандығына көз жеткізіп алып қуат беру баусымының істікшесін желіге қосыңыз.

3. Режимдерді ауыстырғышты «ҚОСУ» күйіне орната отырып электр құралын іске қосыңыз.

4. Инфрақызылдық қызуды іске қосу үшін режимдерді ауыстырғышты «ИҚ» күйіне орнатыңыз.

5. Сізге қолайлы жылдамдықты орнату үшін айналу жылдамдығын реттегішті сағат тілі бойынша немесе сағат тіліне қарсы бұраңыз.

6. Қолданғаннан кейін реттегішті сағат тіліне қарсы минимумға дейін бұраңыз, құралды режимдерді ауыстырғышты «АЖЫР» күйіне орната отырып сөндіріңіз, содан кейін ашаны резеткіден шығарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Оң нәтижелерді алу үшін электр құралын күн сайын 10-15 минуттай қолдану ұсынылады.

АУЫСТЫРМАЛЫ МАССАЖДЫҚ САПТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Шынашақтық саптама - кәсіпқой массаж жасаушының саусақтарымен қарқынды әсер етуімен терең қол массажға (Шиаци) ұқсас әсер береді, сонымен қатар аяқтарды уқалауға да жарамды болады.

Білікшелік саптама - бұл саптаманы қолдану жылдам нәтиже береді, целлюлитті арттырады, тері мен бұлшықеттердің серпімділігін арттырады, бұлшықеттерді әлдендіреді және босаңсытады, лимфодренажды жақсартады, артық көлемді кемітеді және бұлшықеттерді бедерлірек қылады.

Шарлы саптама - дененің нәзік учаскелеріне қолдануға керемет жарамды: бетке, мойынға, кеудеге. Бұлшықеттерді әлсіретеді, терінің серпімділігін жақсартады.

Толқынды саптама - қолдардың алақандарымен орындалатын уқалаушы массажға арналған саптама, қан айналуын әлсіретеді және жақсартады.

Қорғаушы торлы саптама - массажердің қозғалғыш бөліктеріне шаштардың түсуі мүмкін болатын орындарда қолданылады. Кремдерді және толқындыдан басқа саптамаларды қолданусыз пайдаланылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрал тек үйде қолдануға ғана арналған.

ҚҰРАЛДЫ ТАЗАЛАУ

Құралдың пластик бетін жұмсақ дымқыл матамен сүрту керек. Қатты ластанған жағдайда суға бейтарап жуғыш құралдың аздаған мөлшерін қосуға рұқсат етіледі.

Бұйымның корпусына ылғалдың келіп түсуін болдырмаңыз.

Барлық ауыстырмалы саптамаларды әрбір қолданғаннан кейін косметикалық құралдардың қалдықтарынан толық тазаланғанша дейін жылу сумен жуу керек. Қажет болған жағдайда суға аздаған сабын немесе бейтарап жуғыш құралды қосуға болады. Барлық саптамаларды сақтау немесе қайтадан қолданудың алдында мұқият құрғатып алыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Құралды құрғақ, салқын, балаларға және жануарларға қолжетімді емес жерлерде, +10-нан +30 °C-қа дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығында сақтау ұсынылады.

- Құралды тазалау үшін құралдың бетін бүлдіруі мүмкін тазартқыш құралды қолданбаңыз.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз. Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік

талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз. Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы- кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінулер;
- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлдандырылған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.

2) Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

3) Желілік кабельдің үзілуі мен тілінуі, сызаттар, корпустың күшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.

5) Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

6) Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін толымдаушылар мен керек-жарақтар.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- бұйымның пластмассалық бөліктері мен тораптарының деформациялануы

немесе балқуы;

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күйі.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **www.galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аударамыз.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: «Вэньчжоу Жуфенг Трейд Ко., ЛТД»

Мекен-жай: А-1801 Жинхе Билдинг, Стэйшн роад, Вэньчжоу, Қытай
ҚХР жасалған

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыс нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның топтамдағы реттік нөмірі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат беру кернеуі	220-240 В ~ 50 Гц
Қуаттылық	50 Вт
Электр тоғымен зақымдалудан қорғаныс сыныбы	II 

Аталған бұйым келесі талаптарға сәйкес болады: Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағының Техникалық регламенті «Электрлік және радиоэлектрондық өнімдердегі қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» КО ТР 037/2016. Тауар сертификатталған.

EAC

С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ ПОКУПАЮТ:



GL4617

ПЛОЙКА

- Мощность 60 Вт
- Максимальная температура 220 °C
- Керамическое покрытие рабочих поверхностей
- Нагревательный элемент с защитой от перегрева
- Нагревательный элемент диаметром 25 мм
- Регулятор температуры (100 °C - 220 °C)
- Цифровой дисплей с индикацией температурных режимов
- Автоотключение через 1 час непрерывной работы
- Подвесная петля
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL4324

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС


- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная сетка
- Насадка-концентратор
- Подвесная петля
- Длина сетевого провода 1,7 м
- Питание 220-240 В ~ 50 Гц



GL4910

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

- 30 минут непрерывной работы
- 2 скорости
- 10 насадок:
 - войлочный диск
 - диск для полировки
 - большой диск с крупной насечкой
 - малый диск с крупной насечкой
 - малый диск с мелкой насечкой
 - большая конусообразная насадка
 - малая конусообразная насадка
 - малая цилиндрическая насадка
 - круглая щетка
 - насадка-лопатка для обработки кутикулы
- Лопатка для кутикулы
- Индикатор зарядки
- Работа от аккумулятора

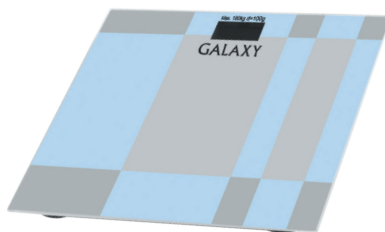

GL4801

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Платформа из высокопрочного стекла
- Жидкокристаллический дисплей
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Автоматическое отключение
- Индикатор перегрузки
- Индикация низкого заряда элемента питания
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Прорезиненные ножки