


DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Массаждық жастық DEXP MP-40

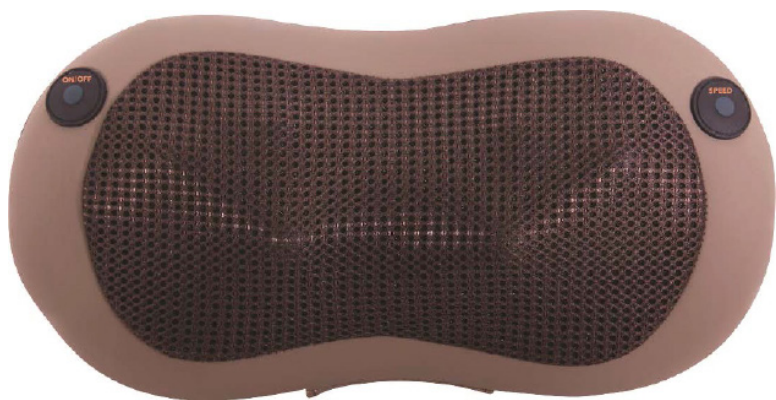

Мазмұны

Құрылғының қолданылу мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Негізгі функциялары.....	5
Құрылғыны пайдалану.....	6
Техникалық сипаттамалар.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	8
Қосымша ақпарат.....	9

Құрметті сатып алушы

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақтығы жайында қамқорлық етіңіз және өнімді одан әрі пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Массаждық жастық – бұл дененің әртүрлі бөлігіне массаж жасауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және тазаламас бұрын, қысқа тұйықталудың алдын алу үшін ашаны розеткадан суырып алу ұсынылады.
- Құрылғыға су кіріп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Массаждық жастықты ылғалдан қорғалған, қараңғы, құрғақ, тікелей күн сәулесі түспейтін жерде сақтау ұсынылады. Құрылғыны дымқыл бөлмелерде, сондай-ақ тікелей су көздерінің маңында қолданбаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаған жөн.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Массаждық жастық желіге қосылған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы пайдаланылмаған кезде оны желіден ажыратқан жөн.
- Массаждық жастықты тек осы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз.
- Осы нұсқаулықта сипатталмаған қосымша құралдарды пайдаланбаңыз.
- Массаждық жастықты розеткасы немесе өзі зақымдалған кезде, жұмысында ақаулықтар болғанда, сондай-ақ құрылғыға су кірген кезде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларына жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғыны ұйықтап жатқанда пайдаланбаңыз.
- Бөлмеде жақында күйдіргіш аэрозольдер шашыратылған болса, массаждық жастықты пайдаланбаңыз.
- Инфрақызылдық жылыту салдарынан болатын өрт қаупіне жол бермеу үшін құрылғының астына жастықтар мен басқа материалдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін барлық функцияларды сөндіріп, штепсельді розеткадан шығарыңыз.

- Құрылғыны қан айналымы нашар және терісі сезімтал адамдарға қолдануға ұсынылмайды.
- Құралды жарақаттанған, қалыптан тыс пигментті немесе сезбейтін теріге қолданбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

Негізгі функциялары

- Инфрақызылдық жылыту функциясы бар 8 массаж бастары шаршауды басып, демалуға көмектеседі.
- Массаж бастарының екі бағыттағы қозғалысы: сағат тілі бағытымен және сағат тілі бағытына қарсы.
- Массаждық жастықтың пішіні дененің әртүрлі бөліктеріне: мойынға, арқаға, белге және т. б. массаж жасауға мүмкіндік береді.
- Массаждық жастық бұлшықеттердегі шаршауды, қозуды және ауырсынуды басады, қан ағысы мен жасуша метаболизмін жақсартады.
- Автокөлік адаптері сізге жастықшаны үйде немесе кеңседе ғана емес, жолда да қолдануға мүмкіндік береді.

Құрылғыны пайдалану



Құрылғыны ИҚ жылыту функциясымен массаж режимінде қосу үшін қуат түймесін басыңыз. Массаж бастары сағат тілі бағытымен қозғалады.



Құрылғыны ИҚ жылыту функциясымен массаж режимінде сағат тілі бағытына қарсы қозғалуы үшін қуат түймесін қайта басыңыз.



Қуат түймесін үшінші рет басып, ИҚ жылыту функциясын өшіріңіз.



Қуат түймесін төртінші рет басып, құрылғыны өшіріңіз.



Массаждық бастардың айналу жылдамдығы мен әсер ету күшін реттеу үшін жылдамдық түймесін басыңыз.



Массаж бағыты минут сайын өзгереді.

МАҢЫЗДЫ:

- Массаж сессиясының ұсынылатын ұзақтығы – 15 минут.
- Бір бұлшықет топтарына қатарынан бірнеше сеанс массаж жасамаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: МР-40.
- Қуат адаптерінің параметрлері:
 - АС: 220-240 В, 50 Гц.
 - DC: 12 В = 2.5 А.
- Қуаты: 24 Вт.
- Жылыту және механикалық массаж.
- 2 режим.
- Инфрақызылдық жылыту
- Автоматты өшірілуі 15 минут өткенде.
- 8 массаждық роликтер.
- Екі бағытқа да айналу.
- Желіден және тұтатқыштан қуат алады.
- Жиынтықтама: массаждық жастық, желі адаптері, тұтатқышқа арналған ағытпа, пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында, өндіруші қаптамасында, 5°С...40°С температура аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Жайларда коррозия тудыратын қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Жуйань Юньли Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
А-3-3, Цзэншань өнеркәсіптік аймағы, Таошань, Жуйань, Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С,
Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр-магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамаларын жетілдіру үшін алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және ол тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілді қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club