


**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# Массажная подушка DEXP MP-40

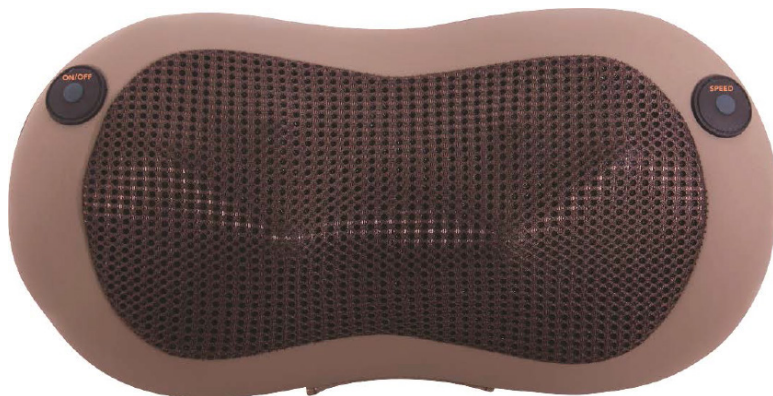

## Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Меры предосторожности

- После использования и перед чисткой устройства рекомендуется вытаскивать вилку из розетки во избежание короткого замыкания.
- При попадании воды на устройство немедленно отключите его от сети.
- Рекомендуется хранить массажер в сухом помещении, защищенном от попадания влаги. Не используйте устройство во влажных помещениях, а также в непосредственной близости источников воды.
- Не оставляйте устройство без присмотра, если массажер подключен к сети. Если устройство не используется, рекомендуется отсоединить его от сети.
- Рекомендуется хранить массажер в месте, недоступном для детей.
- Используйте массажную подушку только в соответствии с данным Руководством.
- Не используйте приспособления, описания которых нет в данном Руководстве.
- Не используйте массажер при повреждении розетки или самого устройства, при наличии сбоев в работе, а также при попадании воды на устройство.
- Хранить массажную подушку рекомендуется в темном сухом месте, вне досягаемости прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство вблизи отопительных устройств.
- Не используйте устройство во время сна.
- Не используйте массажер, если в помещении недавно были распылены едкие аэрозоли.
- Не подкладывайте под устройство подушки и другие материалы во избежание риска возгорания вследствие инфракрасного прогрева.
- Для того чтобы отсоединить устройство, отключите все функции и извлеките вилку из сети.
- Не рекомендуется использовать устройство людям со слабой циркуляцией крови и чувствительной кожей.
- Не используйте устройство на травмированной, аномально пигментированной или нечувствительной коже.

## Основные функции

- 8 массажных головок с инфракрасным прогревом снимают усталость и помогают расслабиться.
- Два направления движения массажных головок: по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Форма массажной подушки позволяет производить массаж различных областей тела: шеи, спины, поясницы и т. д.
- Массажная подушка позволяет снять усталость, напряжение и боль в мышцах, улучшить кровоток и клеточный обмен.
- Автомобильный адаптер позволит Вам пользоваться подушкой не только дома или в офисе, но и в пути.

## Эксплуатация устройства



Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство в режиме массажа с ИК-подогревом. Массажные головки будут двигаться по часовой стрелке.



Нажмите кнопку питания второй раз, чтобы включить устройство в режиме массажа с ИК-подогревом против часовой стрелки.



Нажмите кнопку питания в третий раз, чтобы выключить ИК-подогрев.



Нажмите кнопку питания в четвёртый раз, чтобы выключить устройство.



Нажимайте кнопку скорости, чтобы настроить скорость вращения и силу воздействия массажных головок.



Направление массажа меняется каждую минуту.

### **ВАЖНО:**

- Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут.
- Не массируйте одни и те же группы мышц несколько сеансов подряд.

## **Технические характеристики**

- Параметры адаптера питания:
  - Вход: 220-240 В, 50/60 Гц.
  - Выход: 12 В = 2.5 А.
- Мощность: 24 Вт.
- Тепловой и механический массажи.
- 2 режима.
- Инфракрасный подогрев.
- Автоматическое отключение через 15 минут.
- 8 массажных роликов.
- Вращение в обоих направлениях.
- Электропитание от сети и от прикуривателя.
- Комплектация: массажная подушка, сетевой адаптер, разъем для прикуривателя, руководство пользователя, гарантийный талон.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Жуйань Юньли Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Южное шоссе Бишань 8, Бишань, г. Жуйань, пров. Чжэцзян, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

V.3

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)