

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# **Массажный воротник DEXP MP-50**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


## Меры предосторожности

- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности или запыленности, поскольку это может привести к его повреждению.
- Не используйте устройство в помещениях с температурой выше 40 °С.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Имеются противопоказания, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не беритесь за прибор мокрыми руками.
- Не роняйте прибор и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не используйте устройство во время сна.
- Не используйте устройство в состоянии алкогольного опьянения.
- Не используйте устройство для массажа на локтях, коленях и груди.
- Не массируйте одни и те же группы мышц дольше 30 минут.
- Немедленно выключите устройство и отключите его от сети:
  - при попадании воды на устройство;
  - при возникновении дыма, запаха;
  - при возникновении болей;
  - во время грозы.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора, немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не оставляйте устройство без присмотра, если оно подключено к сети.

## Основные функции


- 8 массажных головок с функцией инфракрасного подогрева снимают усталость и помогают расслабиться.
- Два направления движения массажных головок: по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Форма массажного воротника позволяет производить массаж различных областей тела: шеи, спины, поясницы и других. Ручки помогают удобно расположить устройство и удерживать его в необходимом положении.
- Автомобильный адаптер позволит Вам пользоваться устройством не только дома или в офисе, но и в пути.

## Внешний вид устройства

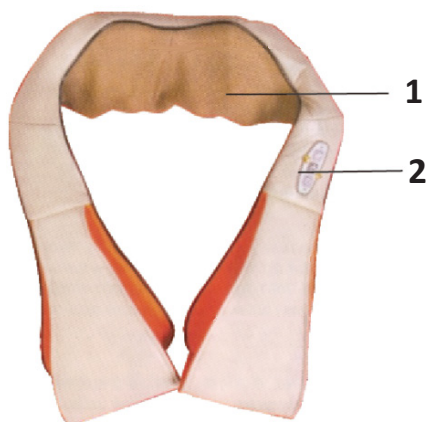

1. Массажные головки.
2. Панель управления.

## Панель управления

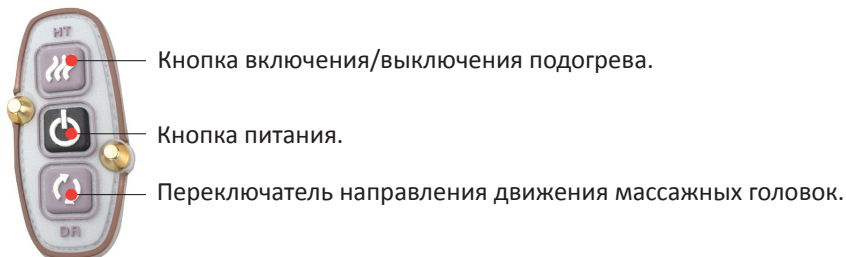

# Инструкция по эксплуатации

1. Подключите адаптер питания к розетке и к устройству.
2. Нажмите кнопку питания на панели управления.
3. С помощью переключателя направления движения на панели управления смените направление вращения массажных головок.
4. Нажмите на кнопку включения подогрева на панели управления, чтобы включить функцию прогрева инфракрасными лучами.
5. После использования нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство, а затем отсоедините адаптер питания от сети.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** направление вращения массажных головок меняется автоматически каждую минуту.

## Технические характеристики

- Параметры питания:
  - AC: 220-240 В, 50/60 Гц.
  - DC: 12 В, 2 А.
- Мощность: 25 Вт.
- Тепловой и механический массаж.
- 2 режима работы.
- Инфракрасный подогрев.
- Автоматическое отключение через 15 минут.
- 8 массажных роликов.
- Вращение в обоих направлениях.
- Электропитание от сети, от прикуривателя.
- Комплектация: сетевой адаптер, автомобильный адаптер.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Вэньчжоу Прайтэк Индастриал Ко., Лтд.  
Шоссе ДунГан 106, Вэньчжоу, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,  
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.АЖ26.В.04872.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

Срок действия: с 01.11.2018 по 31.10.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.rrrr): \_\_\_\_\_

V.1



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)