


DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажная подушка DEXP MP-10

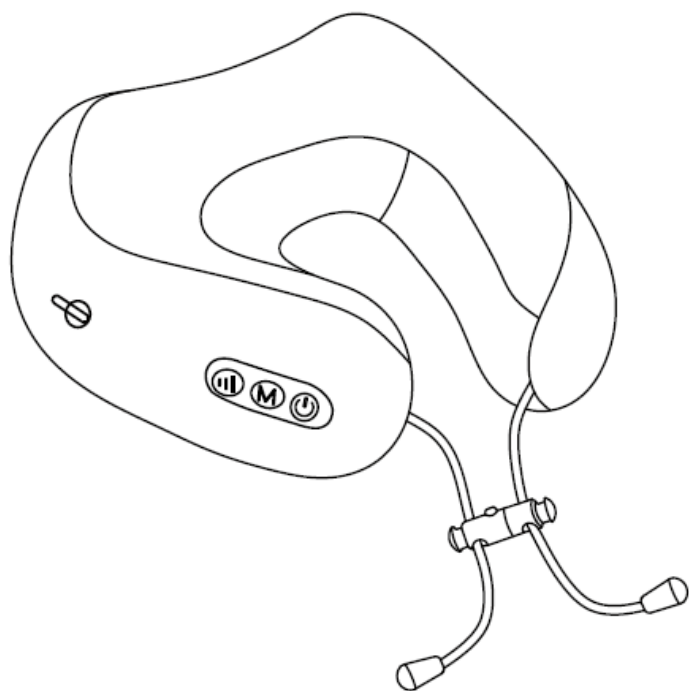

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Данное устройство помогает снять усталость и расслабить мышцы шеи. Устройство предназначено только для личного использования, не допускается использование в коммерческих целях. Несоблюдение мер предосторожности и ненадлежащая эксплуатация исключают возможность гарантийного ремонта.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Дети могут использовать устройство только под присмотром взрослых.
- Не храните устройство рядом с острыми предметами в целях избежания его повреждения.
- Рекомендуется хранить массажер в сухом помещении, защищенном от попадания влаги. Не используйте устройство во влажных помещениях, а также в непосредственной близости источников воды.
- Рекомендуется хранить массажер в месте, недоступном для детей.
- Не используйте массажер при повреждении самого устройства, при наличии сбоев в работе, а также при попадании воды на устройство.
- Хранить массажный воротник рекомендуется в темном сухом месте, вне досягаемости прямых солнечных лучей.
- Не размещайте массажер вблизи отопительных устройств.

Внешний вид устройства

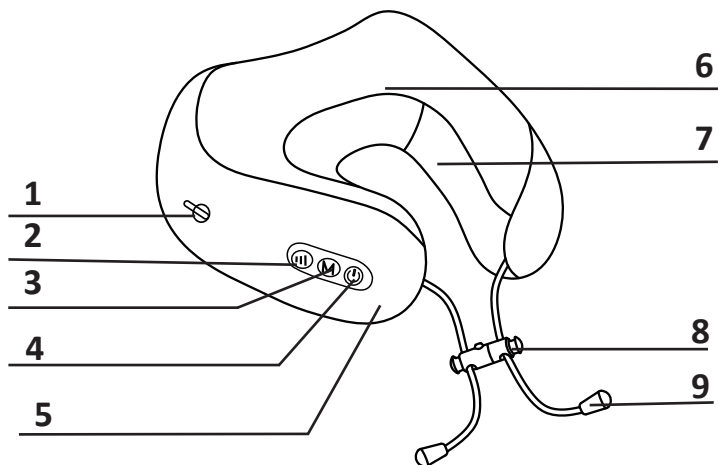

1. Шнур питания.
2. Кнопка настройки скорости (быстро/медленно).
3. Кнопка управления режимами.
4. Кнопка питания.
5. Встроенный аккумулятор.
6. Массажная головка и мотор.
7. Молния.
8. Застежка-ограничитель.
9. Шнур.

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Световой индикатор загорится синим цветом.

Кнопка управления режимами: единственная кнопка управления скоростью массажа предназначена для управления режимами массажа и вибрации.

- однократное нажатие: массаж+вибрация;
- двукратное нажатие: только массаж;
- трехкратное нажатие: только вибрация.

Кнопка настройки скорости: медленный и быстрый режимы массажа.

При зарядке устройства световой индикатор загорится красным светом, а при полном уровне заряда - зелёным.

Примечание:


Извлекать батареи может только специалист.

Содержите чехол подушки в чистоте.

Очистка и хранение

- Если необходимо - снимите чехол с подушки для последующей стирки (только ручная стирка, не допускается машинная стирка).
- Храните устройство в соответствующей упаковке в сухом, защищенном от солнечных лучей и недоступном для детей и животных месте.
- Не допускайте использование устройства вблизи отопительных приборов, открытого огня, прямых солнечных лучей. Не храните устройство в условиях экстремальных температур, влажности, не подвергайте ударам.
- Хранение должно производиться в сухом помещении при температуре от 0 °С до 40 °С.
- Перед надеванием и использованием чехол необходимо полностью просушить.

Как снимать чехол с подушки для очистки

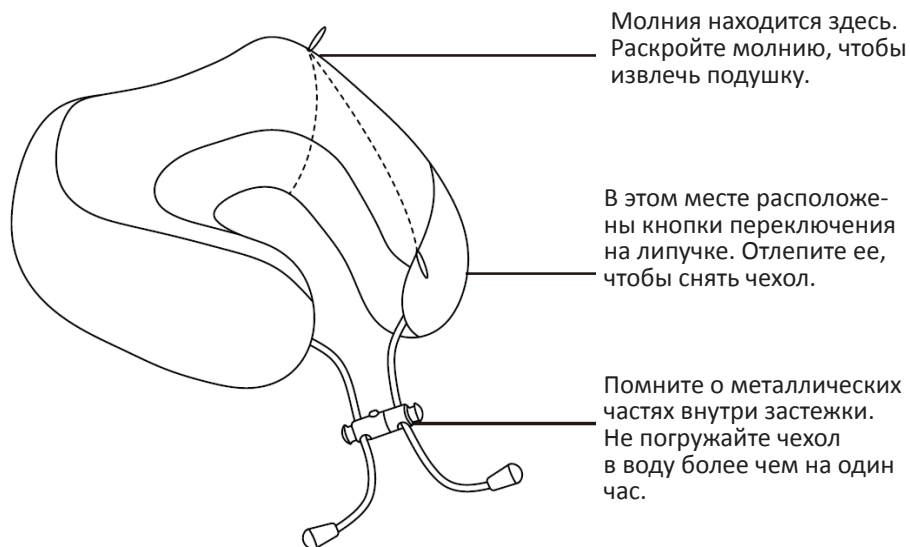

Возможные неисправности и способы их устранения

Проблема	Причина
Устройство не включается.	Зарядите батарею
Устройство автоматически выключается после 10 минут работы	Нажмите на клавишу ON/OFF повторно

При возникновении неисправностей, отсутствующих в таблице выше или при их неустранении немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

- Мощность: 4 Вт.
- Параметры питания: DC 5 В, 1 А.
- Ёмкость батареи: 2000 мА·ч.
- 4 массажных головки.
- Класс защиты: III.
- Встроенный таймер выключения (10 минут).
- Время работы при максимальном уровне заряда аккумулятора: около 100 минут.
- Время полной зарядки аккумулятора: около 5 часов.
- Автоматическая смена направления вращения массажных головок.
- 3 режима массажа: массаж, вибрация, массаж+вибрация.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Жуйань Юньли Электроник Текнолоджи Ко., Лтд.
А-3-3, промзона Цзэншань, Таошань, г. Жуйань, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар прошел обязательное подтверждение соответствия техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Адрес в интернете: www.dexn.club



Товар изготовлен (мм.гггг.)_____

V.1

www.dexp.club