



СиЭс МЕДИКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-9630-F, CS-9630-N

Благодарим Вас за приобретение
зубной щетки CS Medica CS-9630



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

Данная зубная щетка предназначена для гигиены полости рта.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Предупреждение:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.

- Рекомендованный возраст для пользования данной зубной щеткой – от 18 лет.
- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная стоматологическая хирургическая операция;
 - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.
- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.
- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного использования. Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед тем, как начать использование зубных паст с повышенным содержанием абразивных веществ.
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
- Храните щетку в недоступном для детей месте. Зубная щетка содержит мелкие детали, которые могут быть проглочены детьми.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.




Внимание:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.
- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.
- Не используйте элементы питания, не указанные для данного устройства. Вставляйте элемент питания, соблюдая полярность.
- Извлеките элемент питания из зубной щетки, если Вы не собираетесь пользоваться ею в течение длительного времени (от трех и более месяцев).
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность кнопки.

2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

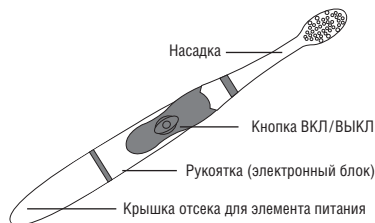


Дополнительно можно приобрести: Насадки CS Medica SP-630 для электрической звуковой зубной щетки CS-9630 (В комплекте 2 насадки).

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Звуковая частота для эффективной чистки (20 000 вибраций в минуту)
- Прорезиненная нескользящая рукоятка
- Защита корпуса от воды IPX7
- 2 насадки в комплекте
- Около 120 дней работы от одного элемента питания

4. УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Снимите крышку отсека для элемента питания, руководствуясь схемой ниже.

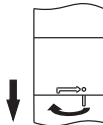

2. Установите алкалиновую (щелочную) батарею типа AAA таким образом, чтобы положительный (+) и отрицательный (-) контакты совпали с полярностью, указанной в отсеке для элемента питания.

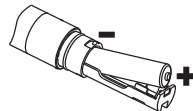

Примечание:

Перед тем как вставлять батарею, насухо вытрите руки и корпус зубной щетки.

3. Закройте крышку отсека для элемента питания, руководствуясь схемой ниже.



Примечание:

Если отсек для элемента питания закрыт неплотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.

- Срок службы элемента питания зависит от его модели, времени использования, силы, прилагаемой во время чистки, и иных факторов. Замените батарею, когда движения щетки станут более слабыми.
- Время работы от одной алкалиновой (щелочной) батареи составляет около 120 дней при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты. Так как прилагаемая батарея рассчитана для демонстрационных целей, она может проработать менее 120 дней.
- Рекомендуем использовать алкалиновые (щелочные) элементы питания типа AAA.


5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

Установите насадку на рукоятку, совместив направляющие на насадке и рукоятке, и поверните ее по часовой стрелке до упора, как показано на рисунке ниже.

Для того чтобы снять насадку, необходимо проделать те же действия в обратном порядке.

Примечание:

Не прилагайте излишних усилий при установке насадки.

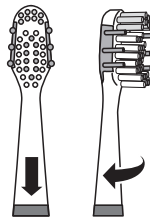

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смойте щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого введите щетку в ротовую полость.

Примечание:

Чтобы предотвратить разрывывание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.


2. Чтобы включить питание, нажмите на кнопку ВКЛ / ВЫКЛ.



Для того чтобы включить, нажмите один раз.
Нажмите еще раз, чтобы выключить.

Головка щетки начинает вибрировать. Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.

Правильная чистка зубов:

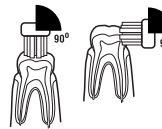

Поверхность зуба и окклюзионная поверхность:
Во время чистки держите щетину под углом 90° к поверхности зуба.



Граница между зубами и десной:
Во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.

Задняя сторона резцов или область неровно расположенных зубов:
Вертикально прижимайте головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.

3. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, нажмите на кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы выключить зубную щетку.
4. Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.

7. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Содержите зубную щетку в чистоте.
- Удаляйте загрязнения с корпуса щетки мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющем средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью.
- Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой, не погружайте ее в воду на длительное время.
- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства.
- После каждого использования промывайте щетину водой.
- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Храните щетку в недоступном для детей месте.
- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica CS-9630-F, CS-9630-N
Модель	CS-9630-F, CS-9630-N
Потребляемая мощность	0,3 Вт
Источник питания	1 алкалиновый (щелочной) элемент питания типа AAA
Время работы от одного элемента питания	Около 120 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты)
Частота колебаний в минуту	20 000
Условия эксплуатации:	температура относительная влажность От 5 до 40 °C От 0 до 90%
Условия хранения и транспортирования:	Температура относительная влажность атмосферное давление От -10 до 50 °C От 10 до 50% От 70 до 106 кПа
Масса	29 г
Габаритные размеры	216,5 x 19,8 x 19,8 мм
Срок службы	Рукоятка (электронный блок) – 2 года, Насадка – 3 месяца, Элементы питания – устанавливаются производителем злив элементов.
Комплект поставки	Рукоятка (электронный блок) с насадкой, дополнительная насадка, алкалиновый элемент питания типа AAA, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном



Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза



Обратитесь к руководству по эксплуатации

IPXX

Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения твердых предметов и воды



Температурный диапазон / Диапазон влажности / Ограничение атмосферного давления



Знак соответствия Директиве EC

Возможности утилизации использованной упаковки. XX – цифровое обозначение материала упаковки. YYY – буквенное обозначение материала упаковки

- 3 Поливинилхлорид
- 22 Бумага
- PAP Бумага
- PVC Поливинилхлорид

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на упаковке прибора и имеет структуру YUMNNNNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNNN – порядковый номер изделия, а также в LOT номере, который расположен в отсеке для элементов питания и имеет структуру YUMNNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNN – номер партии.

10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зубная щетка перестала работать, возможно, батарейка разрядилась. В случае если даже после замены батарейки зубная щетка не работает, не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. Обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания (адреса центров технического обслуживания указаны в конце данного руководства).

Проблема	Возможная причина	Способ решения
Зубная щетка не включается.	Элемент питания исчерпал свой ресурс.	Установите новый элемент питания (см. п. 4).
Колебания щетины отсутствуют, слишком медленные и слабые.	Вы слишком сильно прижимаете щетину к поверхности зубов.	Во время чистки щетка касается легкой поверхности зубов.



Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть прибор для экологически безопасной переработки.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

11. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Декларация о соответствии EACN R RU Д.СН.РА01.В.08799/21 от 16.07.2021. Срок действия до 15.07.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сроки гарантии:
Рюкзак (электронный блок) – 2 года
Насадка – 3 месяца

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи «_____» _____ г.
Подпись продавца _____
Штамп магазина _____
С условиями гарантийного обслуживания озна- комлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.
Подпись покупателя _____
Дата обращения «_____» _____ г.
Заключение мастера, выполненные работы _____ _____ _____
Дата выдачи (возврата) прибора потребителю «_____» _____ г.
Подпись или штамп мастера _____
Работу принял _____ (подпись клиента)



Произведено по заказу и под контролем
ООО «СиЭс Медика», импортера
и уполномоченного представителя
производителя, официального представ-
ителя торговой марки CS Medica на
территории Российской Федерации, а
также Евразийского экономического
союза

127006, Москва, Воронцовский пер., д. 7, стр. 3, комната 9
Часы работы:
пн–пт: с 9:30 до 18:00 (без перерыва на обед),
сб, вс и праздничные дни – выходной
Тел: (495) 363-16-52
E-mail: csinfo@csmedica.ru
www.csmedica.ru, сизсмедика.рф

Центр технического обслуживания в Москве:
ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»

127006, Москва, Воронцовский пер., д. 7, стр. 3,
комната 14 (м. «Маяковская»)
Часы работы:
пн–пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед),
сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед),
вс и праздничные дни – выходной
Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)
E-mail: cstechexpert@mail.ru
www.cstechexpert.ru

Бесплатная горячая линия по России:
8-800-555-00-80

Производитель:
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
(НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)
No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park,
Jiangbei District, Ningbo, China.
(№ 239 Цзяньку Род, Зоун С Нонтанг Индустриал Парк,
Цзяньби Дистрикт, Нинбо, Китай)

Сделано в Китае

**Адреса региональных торговых
представительств и центров технического
обслуживания продукции CS Medica в России**

- Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье»,
ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05,
arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар),
ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202,
cs_medicarm@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье»,
ул. Суворова, 2, оф. 7, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10,
potomie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань», ул. Боевая,
д. 134, корп.5 тел.: (8512) 38-20-78, csmedica30@mail.ru
- Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886,
тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-barnaul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород»,
ул. Архиперская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94,
cs-belmed@mail.ru
- Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток
и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103,
оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25,
csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41
тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск»,
2-й Советский пер., д. 3, оф. №1,
тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад»,
ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75,
novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток
и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101,
тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир»,
ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47,
csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга»,
ул. Землянского, д. 7, оф.24, тел.: (8442) 23-84-44,
23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда», Советский пр-т.,
д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СиЭс Медика Черноземье»,
ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10,
тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76,
voronezh@csmedica.vrn.ru
Сервисно-консультационный центр,
ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11,
тел.: (473) 232-03-58, (473) 255-08-71, (910) 732-03-58,
voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал»,
ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75,
region66@csmedica.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Тургенева, д. 30А,
тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «СиЭс Медика Ярославль»,
ул. Степанова, дом 5, оф. 105, (4932)26-76-90, 26-76-10,
csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров),
ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664,
csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск»,
ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74,
(3952) 43-69-05 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО « СиЭс Медика Чебоксары»,
пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73,
csm@tari-el.ru
- Казань, ООО «СиЭс Медика Казань»,
ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06,
527-64-43, cskzn@mail.ru
Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская,
д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград»,
ул. Нарвская, д. 49е, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65,
8 (963) 737-79-94, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7,
тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69,
csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово»,
ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02,
65-74-60, kemerovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка»,
Студенческий пр-т. д. 19, корп. 2,
тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru

- Кострома, ООО «СиЭс Медика Ярославль»,
пр-т Мира, д. 51, оф. 7, тел.: (4942) 63-77-79,
(4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань»,
ул. Севастопольская, д. 6/1,
тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, omron@kubannet.ru
Сервисно-консультационный центр,
ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95,
service23@csmedica.ru
- Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей»,
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602,
тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98,
info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЭс Медика Курск»,
ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78,
74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк»,
ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16,
(4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Челябинск»,
ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14,
mgn@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала»,
ул. Богатырева, д. 11а, корп. 119, подъезд №5,
тел.: (928) 941-00-20, director5@csmedica.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика Северный
Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31,
факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия» (Петрозаводск),
пр-т Колльский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43,
murmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика Казань»,
пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97,
csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Тюмень»,
ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (982) 970-32-23,
nvk@csmedica.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье»,
ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90,
csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Кемерово»,
пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464-05-18
novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь»,
ул. Немровича-Данченко, д. 169,
тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЭс Медика Омск»,
ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03,
csmedika_omsk@mail.ru
- Орёл, ООО «СиЭс Медика Орел», ул. Московская, д.80,
тел.: (4862) 54-24-00, ore1@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 /
ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608,
csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье»,
Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28,
cspodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89,
тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28,
тел.: (342) 224-52-19, permt@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия»,
ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6,
тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЭс Медика Северо-Запад»,
ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001,
тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россосшь, ООО «СиЭс Медика Черноземье» (Воронеж),
ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94,
rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону»,
ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85,
(863) 231-03-86, (863) 231-04-85, (863) 231-04-86,
(863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань»,
ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10,
96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара»,
ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 405,
тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18,
samara@csmedica.ru
Сервисно-консультационный центр,
ул. Советской Армии, дом 180, стр. 3, оф. 406,
тел.: (846) 254-14-19, csmedica-samara@sama.ru

- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика
Северо-Запад», Малодетскоельскый пр-т, д. 36,
тел.: (812) 467-46-26, csnlw@csmedica.ru
Сервисно-консультационный центр,
Малодетскоельскый пр-т, д. 36, лит. Н,
тел. (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск»,
ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222,
тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов»,
ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46,
saratov@csmedica.ru
- Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород),
пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77,
arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым»,
ул. Жильцовой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68,
(978)137-90-68, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск»,
ул.2-я Линия Красноармейской Слободы, д. 5,
тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань» (Краснодар),
Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1,
тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь»,
ул. Маршала Жукова, д. 7, оф.3 тел.: (8652) 26-38-96,
26-38-93, csmedicastv@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЭс Медика Тюмень»,
ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №3,
тел.: (3462) 25-46-17, (922) 074-32-72
surgut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов»,
ул. Ореховая, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10,
tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь»,
пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66,
(4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара»,
б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89,
tt@csmedica.ru
- Томск, ООО «СиЭс Медика Томск»,
ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж,
тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149,
тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень»,
ул. Амурская, д.4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70,
(919) 944-10-11, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск»,
ул. Терешковой д. 26, пом. 23, тел.: (3012) 210-428,
210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье»
(Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101,
тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан»,
ул. Наталья Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30,
тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105,
csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток
и Забайкалье», ул. Владивостокская, д.16, оф.116,
тел.: (4212) 70-12-65, csmedica_hab@mail.ru
- Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары»,
ул. Энгельса, д. 28, оф. 107,
тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-11, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск»,
ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93,
chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда»,
пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63,
моб.:(921)834-78-65 csmedicacherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»
(Хабаровск), ул. Чкалова, д. 124, оф. 116,
тел.: 8(3022) 21-05-05, 8 (914) 368-56-05,
csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов-на-Дону»,
ул. ИONOва, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53,
shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль»,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18,
тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53
cs-yar76@yandex.ru