

Руководство по эксплуатации

Массажер
DMG-20Y

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Массажер — устройство, предназначенное для массажа тела.

Меры предосторожности

- Использование данного массажера противопоказано людям, страдающим сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, людям, принимающим препараты-антикоагулянты, людям с кардиостимуляторами и другими сердечными имплантатами, а также беременным женщинам.
- Использование массажера противопоказано во время острых инфекционных заболеваний, а также при наличии на теле открытых ран, воспалений, ожогов или кровотечений.
- Устройство предназначено только для целей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Перед началом использования убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии.

В случае обнаружения любого дефекта немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Ремонт и обслуживание устройства должны производиться только квалифицированными специалистами. Никогда не пытайтесь разобрать или самостоятельно отремонтировать устройство, так как это может привести к поломке и повлечь за собой аннулирование гарантии.
- Перед началом массажа убедитесь, что кожа на выбранном для массажа участке сухая. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне или сауне. Никогда не погружайте устройство или шнур питания в воду.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и экстремальных температур. Держите его вдали от источников открытого огня.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию

при очень высоких (выше +40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

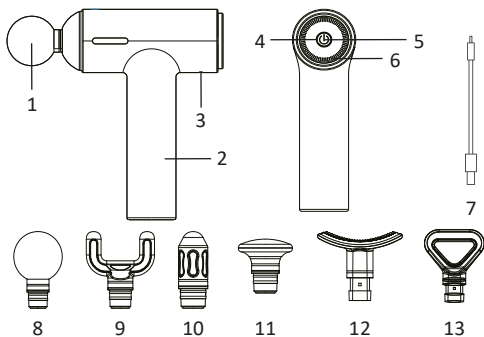

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Массажная насадка. | 7. Кабель Type-C. |
| 2. Ручка. | 8. Шаровидная насадка. |
| 3. Порт для зарядки Type-C. | 9. U-образная насадка. |
| 4. Индикатор заряда батареи. | 10. Пулевидная насадка. |
| 5. Кнопка «Вкл. / Выкл. / Регулировка скорости». | 11. Плоская насадка. |
| 6. Индикатор выбранного режима скорости. | 12. Дугообразная насадка. |
| | 13. Насадка-лопатка. |

Технические характеристики

- Модель: DMG-20Y.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры питания: 5 В = 2 А.
- Мощность: 60 Вт.
- Количество насадок: 6 шт.
- Время автономной работы: 4 часа.
- Время зарядки: 3,5 часа.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Кабель USB Type-C.
- Съёмная насадка — 6 шт.
- Кейс для хранения.
- Руководство по эксплуатации.

Эксплуатация

Зарядка устройства

- Когда останется менее 10% заряда, индикатор заряда будет мигать оранжевым цветом. Когда заряд батареи более 10%, индикатор заряда будет равномерно гореть синим.
- При зарядке устройства индикатор заряда будет мигать синим. После окончания зарядки индикатор заряда будет равномерно гореть синим.

Установка насадок

- Перед установкой насадки выключите устройство.
- Выберите подходящую насадку, в зависимости от ваших целей и предпочтений.

- Для того, чтобы установить насадку в массажер, вставьте ее в разъем в передней части устройства до упора. Убедитесь, что насадка надежно закреплена.

Инструкция по эксплуатации

- Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл. / Выкл. / Регулировка скорости» в течение 1 секунды — индикатор выбранного режима скорости загорится по часовой стрелке, пока не будет гореть полностью. По умолчанию устройство будет работать на первой скорости. Начало работы.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл. / Выкл. / Регулировка скорости» в течение 2 секунд — индикатор выбранного режима скорости потухнет против часовой стрелки, пока не затухнет полностью. После этого устройство прекращает работу.

Настройка скорости

После включения устройства нажмите кнопку «Вкл. / Выкл. / Регулировка скорости» — скорость поменяется, световое отображение режима скорости изменится. Нажимайте на кнопку до тех пор, пока не найдете подходящий режим скорости. Настройка скорости завершена.

Примечание: чем выше скорость, тем сильнее давление.

Скорость	Индикатор скорости	Рекомендуемое применение
1	Горит полностью, мигает	Автоматическая подборка скорости под уровень давления
2	Горит 1/5 часть	Разогрев мышц
3	Горит 2/5 части	Мышечно-фасциальное расслабление

4	Горит 3/5 части	Расщепление молочной кислоты
5	Горит 4/5 части	Расслабление мышц
6	Горит полностью	Глубокий массаж

Самозащита

- Защита от заклинивания ротора: во избежание получения травмы или поломки устройства устройство перестанет работать через 3 секунды. Для того, чтобы возобновить работу устройства, нажмите кнопку «Вкл. / Выкл. / Регулировка скорости».
- Функция автоотключения: с целью защиты ваших мышц и костей устройство автоматически отключится после 10 минут непрерывного использования.

Очистка и уход

- Обязательно выключите устройство перед очисткой. Не производите очистку, когда устройство заряжается.
- Не промывайте устройство под струей воды или сильно влажной тряпкой. Для чистки устройства используйте слегка влажную мягкую ткань.
- Не используйте абразивные чистящие средства или растворители.
- Перед тем, как использовать устройство, убедитесь, что оно полностью высохло.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Yolanda Technology Co., Ltd.
Room 201, Jinfulai Comprehensive Building, No.49-1, Dabao Road, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Йоланда Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 201, зд. Цзиньфулай Комприхенсив, №49-1, шоссе Дабао, комьюнити Далан, ул. Синьянь, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

