

Руководство по эксплуатации

Массажная подушка
MP-10BW

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Массажная подушка – устройство, предназначенное для массажа различных областей тела.

Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не храните устройство рядом с острыми предметами во избежание его повреждения.
- Рекомендуется хранить массажер в сухом помещении, защищенном от попадания влаги. Не используйте устройство во влажных помещениях, а также в непосредственной близости источников воды.
- Не используйте массажер при повреждении самого устройства, при наличии сбоев в работе, а также при попадании воды на устройство.
- Хранить массажный воротник рекомендуется в темном, сухом, недоступном для детей месте, вне досягаемости прямых солнечных лучей.
- Не размещайте массажер вблизи отопительных устройств.
- Несоблюдение мер предосторожности и ненадлежащая эксплуатация исключают возможность гарантийного ремонта.
- Устройство предназначено только для личного использования, не допускается использование в коммерческих целях.
- Содержите чехол подушки в чистоте.
- Во избежание выхода устройства из строя используйте только адаптеры питания, совместимые с техническими характеристиками устройства (5 В = 1 А).

Схема устройства

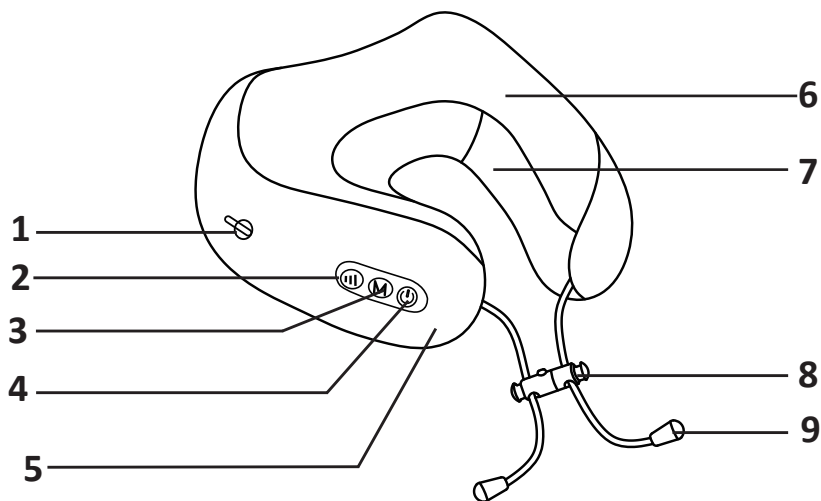

1. Шнур питания.
2. Кнопка настройки скорости (быстро/медленно).
3. Кнопка выбора режима.
4. Кнопка питания.
5. Встроенный аккумулятор.
6. Массажная головка и мотор.
7. Молния.
8. Застежка-ограничитель.
9. Шнур.

Инструкция по эксплуатации

Включение/выключение устройства: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Световой индикатор загорится синим цветом.

Кнопка выбора режима: данная кнопка предназначена для выбора одного из трех режимов работы:


- Однократное нажатие: механический массаж + вибромассаж.
- Двукратное нажатие: механический массаж.
- Трехкратное нажатие: вибромассаж.

Кнопка настройки скорости: медленный и быстрый режимы массажа.

При зарядке устройства световой индикатор загорится красным светом, по окончании зарядки — зеленым.

Примечание: извлечение батареи должно производиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра.

Снятие чехла

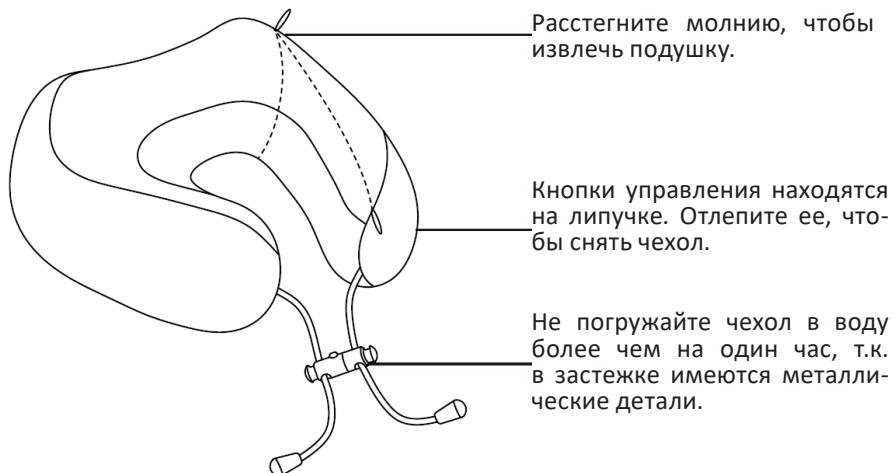

Чистка и хранение

- При необходимости снимите чехол с подушки для последующей стирки (только ручная стирка, машинная стирка не допускается). Перед использованием чехол необходимо полностью просушить.
- Храните устройство в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от солнечных лучей и недоступном для детей и животных месте.
- Не используйте устройство вблизи отопительных приборов, открытого огня, прямых солнечных лучей. Не храните устройство в условиях экстремальных температур, влажности, не подвергайте ударам.
- Хранение должно производиться в сухом помещении при температуре от 0 °С до 40 °С.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Решение
Устройство не включается	Зарядите батарею
Устройство автоматически выключается после 10 минут работы	Нажмите кнопку питания

Если после выполнения вышеупомянутых способов проблема не исчезла, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

- Модель: MP-10BW.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 4 Вт.
- Параметры питания: 5 В – 1 А.
- Емкость батареи: 2000 мА·ч.
- 2 массажных ролика.
- Класс защиты: III.
- Тип крепления шнура: X.
- Встроенный таймер выключения (10 минут).
- Время полной зарядки аккумулятора: 5 часов.
- Автоматическая смена направления вращения массажных головок.
- 3 режима массажа: механический массаж, вибромассаж, механический + вибромассаж.
- Комплектация: устройство, кабель питания USB, руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд.

Шоссе Ваньсян, д. Хуан Лун, Вань Цюань, уезд Пинъян, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Wenzhou Songling Healthcare Equipment Co., Ltd.

Wanxiang Road, Huang Long Village, Wan Quan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.4

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



