

Руководство по эксплуатации

Массажный воротник
MP-50BW

DEXP

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Основные функции	5
Технические характеристики.....	5
Комплектация	5
Схема устройства	6
Эксплуатация.....	6
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	7
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Массажный воротник — устройство, предназначенное для массажа различных областей тела.

Меры предосторожности

- После использования и перед чисткой устройства рекомендуется вытаскивать вилку из розетки во избежание короткого замыкания.
- При попадании воды на устройство немедленно отключите его от сети.
- Рекомендуется хранить массажный воротник в сухом помещении, защищенном от попадания влаги, в темном сухом месте, вне досягаемости прямых солнечных лучей. Не используйте устройство во влажных помещениях, а также в непосредственной близости источников воды.
- Рекомендуется хранить устройство в месте, недоступном для детей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не оставляйте устройство без присмотра, если массажный воротник подключен к сети. Если устройство не используется, рекомендуется отсоединить его от сети.
- Используйте массажный воротник только в соответствии с данным руководством.
- Не используйте приспособления, описания которых нет в данном руководстве.
- Не используйте массажный воротник при повреждении розетки или самого устройства, при наличии сбоев в работе, а также при попадании воды на устройство.
- Не размещайте устройство вблизи отопительных устройств.
- Не используйте устройство во время сна.
- Не используйте массажный воротник, если в помещении недавно были распылены едкие аэрозоли.
- Не подкладывайте под устройство подушки и другие материалы во избежание риска возгорания вследствие инфракрасного прогрева.
- Для того чтобы отсоединить устройство, отключите все функции и извлеките вилку из сети.
- Не рекомендуется использовать устройство людям со слабой циркуляцией крови и чувствительной кожей.
- Не используйте устройство на травмированной, аномально пигментированной или нечувствительной коже.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Основные функции

- 8 массажных головок с инфракрасным прогревом снимают усталость и помогают расслабиться.
- Два направления движения массажных головок: по часовой стрелке и против часовой стрелки.
- Форма массажного воротника позволяет производить массаж различных областей тела: шеи, спины, поясницы и т. д. Ручки помогают удобно расположить устройство и удерживать его в необходимом положении.
- Массажный воротник позволяет снять усталость, напряжение и боль в мышцах, улучшить кровоток и клеточный обмен.
- Автомобильный адаптер позволит Вам пользоваться массажным воротником не только дома или в офисе, но и в пути.


Технические характеристики

- Модель: MP-50BW.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры адаптера питания:
 - Вход: 100–240 В, 50 Гц.
 - Выход: 12 В = 2 А.
- Мощность: 24 Вт.
- Массаж: тепловой и механический.
- 2 режима.
- Инфракрасный подогрев.
- Автоматическое отключение через 15 минут.
- 8 массажных роликов.
- Вращение в обоих направлениях.
- Электропитание от сети и от прикуривателя.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Тип крепления шнура: X.

Комплектация

- Устройство.
- Сетевой адаптер.
- Разъем от прикуривателя.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства

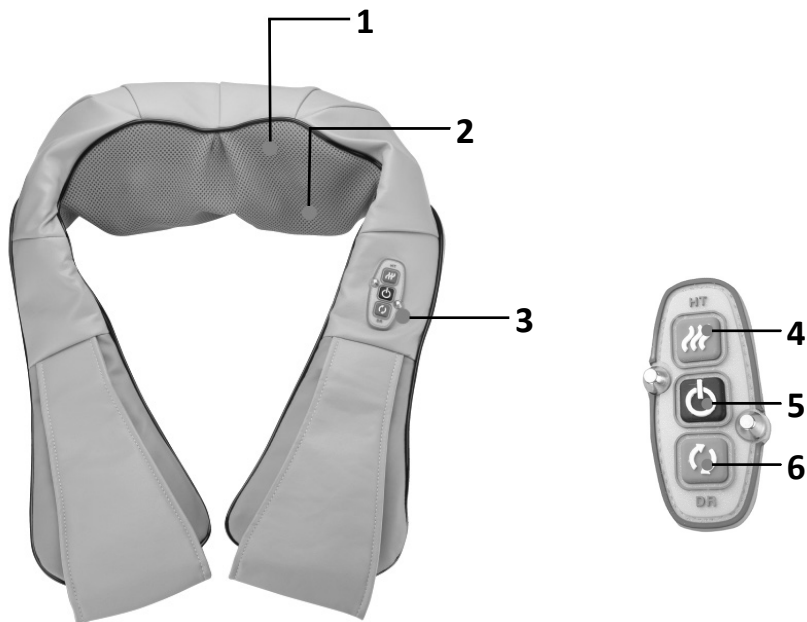

1. Сетчатая накидка.
2. Массажные головки.
3. Панель управления.
4. Переключатель температуры.
5. Кнопка питания.
6. Переключатель направления движения массажных головок.

Эксплуатация

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство в режиме массажа с ИК-подогревом.
2. Массажные головки будут двигаться по часовой стрелке.
3. С помощью соответствующих переключателей установите необходимую температуру нагрева и направление движения массажных головок.

ВАЖНО:

- Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут.
- Не массируйте одни и те же группы мышц несколько сеансов подряд.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд.

Шоссе Ваньсян, д. Хуан Лун, Вань Цюань, уезд Пинъян, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Wenzhou Songling Healthcare Equipment Co., Ltd.

Wanxiang Road, Huang Long Village, Wan Quan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.4

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



