

Инструкции по эксплуатации Портативного Электрического Ирригатора для Полости рта Oclean

Благодарим за приобретение Электрического Ирригатора для Полости рта Oclean.

Памятка по Безопасности

- Данное изделие можно использовать только со специальными насадками Oclean. Мы не несем никакой ответственности за использование каких-либо сторонних аксессуаров.
- Используйте ирригатор только для очистки полости рта, так как при использовании ирригатора для других целей вода может попасть в глаза, нос, уши или горло и вызвать случайную травму.
- Лицам, которые только что перенесли челюстно-лицевое хирургическое вмешательство. Рекомендуется, чтобы потребитель, у которого имеется заболевание полости рта, например серьезная кровоточивость десен, проконсультировался со стоматологом перед использованием этой зубной щетки.
- При первом использовании возможно появление дискомфорта или кровотечения, это нормальное явление, по мере улучшения состояния десен дискомфорт исчезнет. В случае сильного кровотечения, не проходящего через 3-4 недели, обратитесь к стоматологу.
- Согласно инструкциям производителя, для данного устройства следует использовать только холодную или теплую воду (ниже 40°C) или специальные растворы.
- Не подходит для использования детям младше 12 лет.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 12 лет и старше. Дети младше 12 лет, а также лица с ограниченными физическими и умственными способностями, сенсорными нарушениями или не имеющие достаточного опыта и знаний должны использовать его только под наблюдением или после инструктажа относительно безопасного использования устройства и разъяснения связанных с ним опасностей. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети должны чистить и проводить техническое обслуживание данного прибора только под присмотром.
- Питание должно быть обеспечено только безопасным сверхнизким напряжением, соответствующим маркировке на устройстве.
- Резервуар для воды можно отсоединить, поэтому, по соображениям безопасности, устройство следует заряжать в горизонтальном положении.
- В инструкциях к продуктам, аккумуляторы которых не подлежат замене пользователем, должно быть указано следующее: Аккумулятор в данном устройстве должен заменять только квалифицированный специалист.
- Прежде чем заряжать устройство, убедитесь, что порт зарядки сухой.
- Для зарядки устройства следует использовать только специальный зарядный кабель Oclean Типа C. В противном случае Oclean не несет ответственности за возможные поломки.
- Перед первым использованием уберите пенопласт из резервуара для воды.




Световой индикатор батареи

Мигает красный свет: предупреждение о низком заряде батареи;
Мигает белый свет: ирригатор заряжается;
Белый свет горит ровно, аккумулятор полностью заряжен; ирригатор готов к работе

Усиленный нормальный режим
Стандартный нормальный режим
Нормальный режим для чувствительных зубов
Импульсный режим
Режим «Струя»

Интерфейс зарядки Типа-С

Откройте крышку, вставьте USB-порт кабеля в зарядный порт ирригатора, а второй его конец подключите к источнику питания.

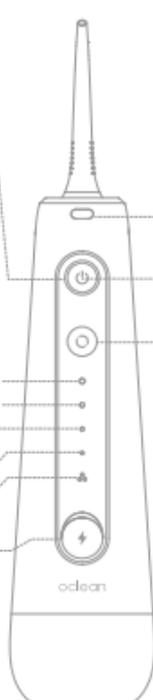

Кнопка для установки насадки

Нажмите кнопку и установите насадку на основной блок ирригатора для полости рта. Нажмите кнопку еще раз и выньте насадку из основного блока ирригатора для полости рта.

Кнопка питания

Чтобы включить ирригатор, нажмите кнопку питания, загорится белый индикатор, чтобы выключить ирригатор, нажмите кнопку питания еще раз.

Кнопка «Режим»

Инструкция по применению




1 Установите насадку

Установите насадку на основной блок ирригатора для полости рта.



2 Залейте воду в резервуар для воды

Откройте крышку, залейте чистую воду комфортной температуры (рекомендуется не выше 40°C), затем закройте крышку. Ирригатор готов к использованию.

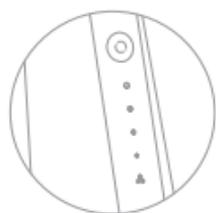

3 Кнопка переключения

Нажмите на кнопку «Режимы» для переключения режимов.

4 Подготовка к использованию

Перед использованием слегка наклонитесь и направьте насадку в ротовую полость, нацельтесь на зубы, промежутки между зубами или деснами, чтобы поток воды был перпендикулярен обрабатываемой поверхности, держите рот приоткрытым и слегка наклонитесь над раковиной, чтобы в нее стекала вода.

Советы:

При первом использовании ирригатора для полости рта может появиться зуд или небольшое кровотечение десен. Как правило, это проходит в течение 1-2 недель, зуд и кровотечение, не преходящие через 2 недели, могут указывать на заболевания десен, в данном случае следует прекратить использовать ирригатор для полости рта и обратиться к стоматологу.

5 Процедура ирригации

Нажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ, чтобы включить ирригатор. Ирригатор имеет функцию автоматического выключения через 2-минуты, если вам нужно продолжить процедуру, убедитесь, что в резервуаре для воды есть вода, и повторно нажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ. Если во время процедуры вам нужно сделать паузу, нажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ, и чтобы продолжить, нажмите кнопку ВКЛ-ВЫКЛ еще раз.



Функция напоминания об изменении объема воды

При изменении объема воды сила импульса потока воды изменяется два раза, после подачи сигнала импульс потока воды возвращается к нормальному значению.

Когда резервуар для воды заполнен водой, то по умолчанию: при переходе по степеням процедуры ирригации ирригатор для полости рта будет подавать сигнал каждые 3/4, 1/2, 1/4 теоретического времени процедуры ирригации на текущей степени, сигнал подается всего 3 раза.

Например, в режиме «Струя» ирригатор для полости рта может продолжать распылять воду в течение 60 секунд. После запуска сигнал подается один раз соответственно через 45, 30 и 15 секунд.

Примечание: функция «напоминания об изменении объема воды» активна только в режиме «Струя» и импульсном режиме, и функция не активна в «Очистка».

Способ Очистки



После каждого использования насадку нужно снимать с основного блока и промывать, чтобы удалить загрязнения.



После использования нажмите нижнюю кнопку резервуара для воды и аккуратно переместите его вниз, если в резервуаре для воды осталась вода, слейте ее. Откройте крышку резервуара для воды и слейте всю оставшуюся воду из него.



После очистки протрите поверхность основного блока сухой мягкой тканью.

Зарядка

Если во время использования батарея разрядится до 15%, индикатор батареи начнет мигать красным светом, ирригатор следует зарядить. Откройте водонепроницаемую крышку зарядки, расположенную на передней части блока ирригатора, вставьте USB-порт кабеля в зарядный порт ирригатора, а второй его конец подключите к источнику питания. Когда ирригатор заряжается, индикатор батареи мигает белым светом; когда зарядка завершена, индикатор батареи горит ровным белым светом.

Насадки



Стандартная насадка
Для ежедневной очистки



Насадка для пародонтального кармана
Для очистки пародонтального кармана



Ортодонтическая насадка
Для очистки зубов при установленной брекет-системе



Скребок для языка
Для очистки языка

Характеристики Изделия

Наименование Товара	Портативный Электрический Ирригатор для Полости рта Oclean W10
Модель	W6010
Объем Резервуара для Воды	200мл ($\pm 5\%$)
Входная Мощность	5В \equiv 1А
Зарядка	Кабель для зарядки с портом USB Типа-C
Входное напряжение	Постоянный ток 5В / 1А
Рекомендуемые Характеристики Зарядного Устройства	Зарядное устройство с зарядным током 5В/1А Постоянного тока и выше
Период Обслуживания	30 Дней (*)
Емкость Аккумулятора	1400мАч (**)Литий-ионный аккумулятор
Длительность Зарядки	4 Часа (**)
Габариты Изделия	72x55x267мм (при установленной насадке)
Вес Нетто Изделия	278г
Применяемый Стандарт	IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-52

- * Примечание: 1. Мощность - входная мощность;
2.Процедуру ирригации следует проводить один раз в день, используя весь объем воды в резервуаре за раз.

- ** Емкость аккумулятора теоретически имеет допуск по емкости ± 50 мАч.

Подпишитесь на Официальную С
траницу Oclean на Facebook
Страница Oclean на Facebook



www.facebook.com/ocleanglobal

Важные советы по использованию

1. Не используйте данное изделие для целей, отличных от описанных в настоящем руководстве
2. Не используйте это устройство, если насадка не установлена.
3. Лица (включая детей), не имеющие соответствующего опыта и знаний, например, лица с ограниченной дееспособностью, должны использовать, чистить и обслуживать данное устройство под наблюдением и руководством ответственных за них лиц.
4. С устройством допускается использовать только насадки и аксессуары, поставляемые, реализуемые и рекомендованные компанией Oclean.
5. Не разбирайте данное устройство и не заменяйте его части, чтобы избежать повреждений и возникновения опасных ситуаций.
6. Не используйте устройство для каких-либо целей, кроме чистки полости рта.
7. Не надавливайте насадкой на десны и зубы с силой, чтобы избежать травм.
8. Запрещается использовать устройство в помещениях с распыленными аэрозолями и местах с повышенным уровнем содержания кислорода.
9. Перед использованием устройства удалите все украшения с зубов.
10. Не добавляйте в резервуар для воды йод, соленую воду или концентрированные эфирные масла, которые не растворяются в воде. Указанные жидкости снижают производительность устройства и сокращают срок его службы; также не рекомендуется заливать ополаскиватель для полости рта, если вы хотите использовать жидкость для ополаскивания рта, то предварительно разбавьте ее, после использования разбавленного ополаскивателя полости рта через ирригатор следует пропустить чистую воду, чтобы очистить внутренние трубки.
11. Не погружайте основной блок в воду, а после использования протирайте его сухой тканью.
12. Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, слейте из резервуара всю воду и просушите его, очистите насадки, основной блок и кабель для зарядки. Храните изделие в прохладном и сухом месте.
13. Во время использования нового устройства первое время может ощущаться легкий запах пластика, это нормально, со временем запах исчезнет.

Запросите отчет по техническому обслуживанию из сервисного центра и храните его вместе с гарантийным сертификатом.(см. левую часть страницы)

Компания Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd, в строгом соответствии с Требованиями по техобслуживанию, замене и возврату бытовых приборов, предоставляет гарантию для потребителей, которые приобрели Портативный Электрический Ирригатор для Полости рта Oclean. Если будут обнаружены расхождения между положениями по сервисному обслуживанию и условиями гарантии, преимущественную силу будут иметь условия гарантии и текст гарантийного сертификата. Если в приобретенном вами продукте обнаружена неисправность или дефект, свяжитесь с нами. service@oclean.com

Владелец Торговой Марки: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
#28G, Building 3, Dachong Business Center (west of Tonggu Road and north of Shennan Avenue), Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China
Производитель: Shenzhen Risun Technology Co., Ltd.
Building A, No.6 of Xinmu Road, Xinmu Community, Pinghu, Shenzhen, China
Website: www.oclean.com

