


Пайдалану бойынша нұсқаулық

DEXP

Массаждық жастық DEXP MP-40

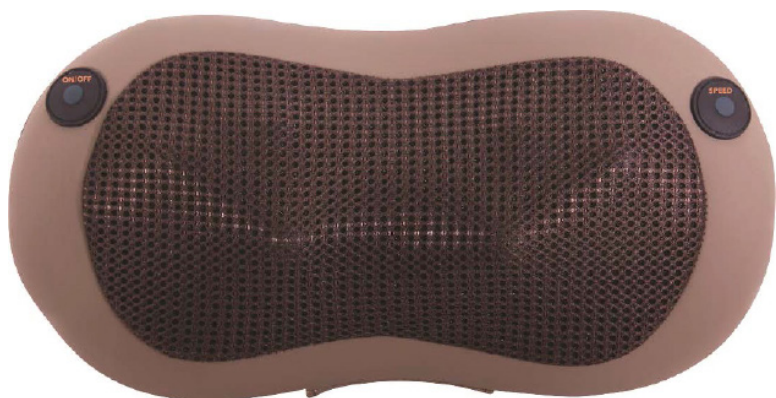

Мазмұны

Құрылғының қолданылу мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Негізгі функциялары.....	5
Құрылғыны пайдалану.....	6
Техникалық сипаттамалар.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	8
Қосымша ақпарат.....	8

Құрметті сатып алушы

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз.

Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдалануды бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақтығы жайында қамқорлық етіңіз және өнімді одан әрі пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының қолданылу мақсаты

Массаждық жастық – бұл дененің әртүрлі бөлігіне массаж жасауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және тазаламас бұрын, қысқа тұйықталудың алдын алу үшін ашаны розеткадан суырып алу ұсынылады.
- Құрылғыға су кіріп кетсе, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Массаждық жастықты ылғалдан қорғалған, қараңғы, құрғақ, тікелей күн сәулесі түспейтін жерде сақтау ұсынылады. Құрылғыны дымқыл бөлмелерде, сондай-ақ тікелей су көздерінің маңында қолданбаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаған жөн.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Массаждық жастық желіге қосылған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы пайдаланылмаған кезде оны желіден ажыратқан жөн.
- Массаждық жастықты тек осы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз.
- Осы нұсқаулықта сипатталмаған қосымша құралдарды пайдаланбаңыз.
- Массаждық жастықты розеткасы немесе өзі зақымдалған кезде, жұмысында ақаулықтар болғанда, сондай-ақ құрылғыға су кірген кезде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларына жақын орналастырмаңыз.
- Құрылғыны ұйықтап жатқанда пайдаланбаңыз.
- Бөлмеде жақында күйдіргіш аэрозольдер шашыратылған болса, массаждық жастықты пайдаланбаңыз.
- Инфрақызылдық жылыту салдарынан болатын өрт қаупіне жол бермеу үшін құрылғының астына жастықтар мен басқа материалдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін барлық функцияларды сөндіріп, штепсельді розеткадан шығарыңыз.

- Құрылғыны қан айналымы нашар және терісі сезімтал адамдарға қолдануға ұсынылмайды.
- Құралды жарақаттанған, қалыптан тыс пигментті немесе сезбейтін теріге қолданбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.


Негізгі функциялары

- Инфрақызылдық жылыту функциясы бар 8 массаж бастары шаршауды басып, демалуға көмектеседі.
- Массаж бастарының екі бағыттағы қозғалысы: сағат тілі бағытымен және сағат тілі бағытына қарсы.
- Массаждық жастықтың пішіні дененің әртүрлі бөліктеріне: мойынға, арқаға, белге және т. б. массаж жасауға мүмкіндік береді.
- Массаждық жастық бұлшықеттердегі шаршауды, қозуды және ауырсынуды басады, қан ағысы мен жасуша метаболизмін жақсартады.
- Автокөлік адаптері сізге жастықшаны үйде немесе кеңседе ғана емес, жолда да қолдануға мүмкіндік береді.

Құрылғыны пайдалану



Құрылғыны ИҚ жылыту функциясымен массаж режимінде қосу үшін қуат түймесін басыңыз. Массаж бастары сағат тілі бағытымен қозғалады.

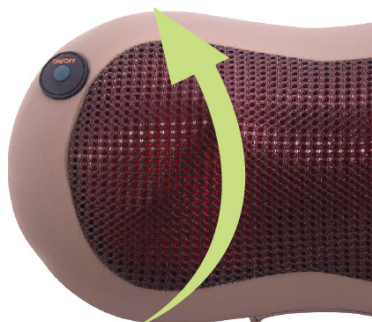

Құрылғыны ИҚ жылыту функциясымен массаж режимінде сағат тілі бағытына қарсы қозғалуы үшін қуат түймесін қайта басыңыз.



Қуат түймесін үшінші рет басып, ИҚ жылыту функциясын өшіріңіз.



Қуат түймесін төртінші рет басып, құрылғыны өшіріңіз.



Массаждық бастардың айналу жылдамдығы мен әсер ету күшін реттеу үшін жылдамдық түймесін басыңыз.



Массаж бағыты минут сайын өзгереді.

МАҢЫЗДЫ:

- Массаж сессиясының ұсынылатын ұзақтығы – 15 минут.
- Бір бұлшықет топтарына қатарынан бірнеше сеанс массаж жасамаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: MP-40.
- Қуат адаптерінің параметрлері:
 - AC: 220-240 В, 50 Гц.
 - DC: 12 В = 2.5 А.
- Қуаты: 24 Вт.
- Жылыту және механикалық массаж.
- 2 режим.
- Инфрақызылдық жылыту
- Автоматты өшірілуі 15 минут өткенде.
- 8 массаждық роликтер.
- Екі бағытқа да айналу.
- Желіден және тұтатқыштан қуат алады.
- Жиынтықтама: массаждық жастық, желі адаптері, тұтатқышқа арналған ағытпа, пайдаланушы нұсқаулығы, кепілдік талоны.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында, өндіруші қаптамасында, 5°C...40°C температура аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Жайларда коррозия тудыратын қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд

Ваньсян тас жолы, Хуан Лун а., Ван Цюан, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамаларын жетілдіру үшін алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



