

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Портативті ирригатор
CIR-710P

DEXP

Мазмұны

| | |
|---|----|
| Құрылғы мақсаты | 3 |
| Сақтық шаралары | 3 |
| Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion) | 4 |
| Құрылғы схемасы | 5 |
| Пайдаланушы нұсқаулығы | 6 |
| Зарядтау | 6 |
| Пайдалануға дайындық | 6 |
| Пайдалану | 7 |
| Қызмет көрсету және күтім | 8 |
| Техникалық сипаттамалары..... | 8 |
| Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері | 9 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары | 9 |
| Қосымша ақпарат | 10 |

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ирригатор — бұл тіс өңездерін, тіс аралықтарындағы тамақ қалдықтарын кетіруге және су ағынының пульсациясы арқылы қызыл иекке массаж жасауға арналған арнайы құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны ваннаға немесе раковинаға кездейсоқ түсіп кетуі мүмкін жерлерде пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Зарядтағышты дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қолданар алдында USB кәбілінің зақымдануын тексеріңіз. Зақымдалған USB кәбілі бар құрылғыны пайдаланбаңыз. USB кәбілінің ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Осы құрылғымен үшінші тарап өндірушілерінің жиынтықтауыштарын пайдалануға жол берілмейді.
- Құрылғының резервуарын тек сумен немесе тіс дәрігері ұсынған ерітіндімен толтыруға болады.
- Құрылғының кез келген тесіктеріне бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз.
- Егер сізде ауыз қуысында зергерлік бұйымдар болса, осы құрылғыны қолданар алдында оларды алып тастаңыз.
- Тілде ашық жара немесе ауыз қуысында басқа зақым болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Су ағынын тілдің астына, құлаққа, мұрынға немесе басқа сезімтал мүшелерге бағыттамаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Алғаш рет қолданған кезде, қызыл иек сау болса да, аздап қан кете бастайды — бұл қалыпты жағдай, өйткені олар қысыммен су ағынының әсеріне әлі үйренбеген. Қан кету әдетте бейімделудің 1–2


аптасынан кейін тоқтайды. Егер қан кету тым көп болса немесе ол 2 апталық процедурадан кейін де пайда бола берсе, құрылғыны пайдалануды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз.

- Бірінші рет қолданған кезде су ағынының төмен қысымын таңдау ұсынылады.
- Егер сіз соңғы 2 айда ауыз қуысына операция жасасаңыз, ирригаторды қолданар алдында міндетті түрде тіс дәрігерімен кеңесіңіз. Оның кеңестері мен ұсыныстарын қатаң сақтаңыз.
- Қуат параметрлері техникалық сипаттамаларда көрсетілгеннен өзгеше адаптері бар құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғының ақаулары немесе дұрыс жұмыс істемеуі анықталса, оны пайдалануды тоқтатып, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтау кәбілін пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

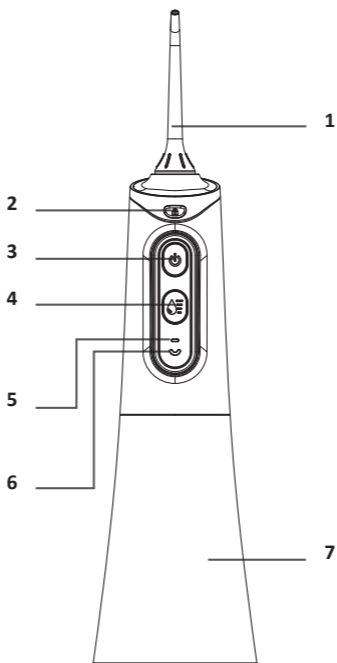

1. Саптама.
2. Саптаманы алу батырмасы.
3. «Қосу/өшіру» батырмасы.
4. Су қысымын реттеу батырмасы.
5. Құрылғының жұмыс индикаторы.
6. Заряд индикаторы.
7. Су резервуары.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Ескерту: бірінші рет қолданар алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Зарядтау кезінде ирригаторды пайдаланбаңыз.

Зарядтау

- Құрылғыны зарядтау үшін оны кіріс USB кәбілін пайдаланып 5 В шығыс кернеуі бар адаптерге қосыңыз.
Назар аударыңыз: құрылғыны шығыс кернеуі 5 В-тан асатын қуат көздеріне қоспаңыз, себебі бұл бұзылуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы зарядталып жатқанда, оның корпусындағы заряд индикаторы қызыл болып жанады. Батарея толығымен зарядталған кезде индикатордың түсі жасылға өзгереді.
- Батарея зарядының мөлшерін білу үшін су қысымын реттеу батырмасын басып тұрыңыз (алдын ала «Қосу/өшіру» батырмасын баспай). Индикатордың түсі ағымдағы зарядты көрсетеді:
 - көк — зарядтың 60%-дан жоғары;
 - жасыл — зарядтың 21%-дан 59%-на дейін;
 - қызыл — зарядтың 20%-дан төмен.

Пайдалануға дайындық

Ескерту: сіз жаңа құрылғының резервуарында аз мөлшерде тазартылған суды таба аласыз. Бұл су өндірушінің зауытында ирригаторды тексеру үшін пайдаланылды және сіздің денсаулығыңызға ешқандай зиян келтірмейді.

1. Тіс дәрігерінің ұсынысы бойынша резервуарды сумен немесе арнайы ерітіндімен толтырыңыз. Мұны істеу үшін оны қозғалтқыш блогынан алыңыз, блокты қолыңызбен ұстаңыз, ал резервуарды екінші қолыңызбен солға бұраңыз. Толтырылған резервуарды оңға айналдыру арқылы орнына бекітіңіз.

Назар аударыңыз: егер су ыдысы бос болса, құрылғыны қоспаңыз.



2. Саптаманы орнату үшін оны қозғалтқыш блогының жоғарғы жағындағы тесікке басылғанша салыңыз. Саптаманы алу үшін саптаманы алу батырмасын басыңыз.

Егер сіз құрылғыны бірінші рет қолдансаңыз немесе оны ұзақ уақыт бойы бірінші рет қоссаңыз, су «Қосу/Өшіру» батырмасын басқаннан кейін бірден саптамаға кіре алмауы мүмкін.

Бұл мәселені шешу үшін саптаманы алып та-стаңыз және оң жақтағы суретте көрсетілген-дей саптаманың ойығына аздап су тамызыңыз.

Осыдан кейін саптаманы орнына қойып, «Қосу/Өшіру» батырмасын қайтадан басыңыз.



Пайдалану

Су қысымының деңгейін реттеу

Ирригаторда су ағынының қысымын біркелкі реттеу мүмкіндігі бар, яғни сіз қысымның қарқындылығын жеке қалауыңыз бойынша реттей аласыз.

- «Қосу/Өшіру» батырмасын басып, құрылғыны қосу үшін 1 секунд ұстап тұрыңыз.
- Су қысымын реттеу батырмасын басып тұрыңыз — қысым қарқындылығы біртіндеп артады. Қысым сізге ыңғайлы болған кезде батырманы босатыңыз.
- Қысым мәні циклдік түрде реттеледі: қысымның минималды қарқындылығына оралу үшін реттеу батырмасын максималды мәнге жеткенше ұстап тұрыңыз, содан кейін босатыңыз және қайтадан басыңыз.

Ескерту: берілген қысым реттеулері өшірілген кезде сақталады.

Пайдалану бойынша кеңестер

- Алғаш рет қолданған кезде қызыл иектің қан кетуіне жол бермеу үшін су қысымының ең төменгі деңгейін таңдаған жөн. Сіз үйрену кезінде қысымды біртіндеп арттыра аласыз.
- Жақсы әсер ету үшін құрылғыны тігінен және ауыз қуысына перпендикуляр ұстау керек, су ағынын тістерге бағыттау керек. Саптаманы тістер арасындағы бос орындарға 1–2 мм жақындатыңыз.
- Раковинаның үстіне еңкейіп, су ағып кетуі үшін, бірақ шашырамауы үшін аузыңызды сәл ашыңыз.
- Жақсы нәтиже алу үшін алдымен бүйір тістеріңізді (азу тістеріңізді), содан кейін алдыңғы тістеріңізді тазалаңыз. Саптаманың ұшын тістердің арасына ұстап, қызыл иек сызығы бойымен жылжытыңыз. Процедураны барлық тістер қатарын, сондай-ақ барлық тістер аралықтарын тазалағанша жалғастырыңыз.
- Пайдалану аяқталғаннан кейін резервуарды қалған судан босатыңыз және оны шайыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны толығымен суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғының корпусын жұмсақ щеткамен немесе губкамен аз мөлшерде абразивті емес жуғыш затпен тазалаңыз. Құрылғыны шүберекпен немесе майлықпен құрғатқаннан кейін сүртіңіз.
- Құрылғыны тазарту үшін спирт, бензин, еріткіштер және басқа химиялық заттарды қолданбаңыз.
- Егер корпуста қатты ластану болса, құрылғыны су ағынының астында жууға болады, оның температурасы 50 °С-тан аспауы керек.
- Саптаманы тазалау үшін саптаманы алу батырмасын басу арқылы оны алыңыз. Құрылғыны орнатпас бұрын / сақтау үшін алып тастамас бұрын саптаманы су астында шайыңыз және құрғатыңыз.
- Саптаманы әр 3 ай сайын жаңасына ауыстыру ұсынылады. Әйтпесе, құрылғыны пайдалану тиімділігі төмендейді.
- Ирригатор түтігін жуған кезде оны майыстырмаңыз немесе деформацияламаңыз, себебі ол зақымдалған кезде резервуардағы суды дұрыс соруды тоқтатуы мүмкін. Бітеліп қалмас үшін түтіктің сүзгі торын үнемі тазалап отырыңыз. Тазалағаннан кейін түтікті майлықпен сүртіңіз.
- Құрылғы мен саптамаларды құрғақ, таза жерде сақтаңыз.
- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, су ыдысын босатыңыз. Резервуар толған кезде құрылғыны төмен температураға ұшыратпаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CIR-710P.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Аккумулятор: Li-on, 3,7 В, 1500 мА·сағ.
- Қуат параметрлері: 5 В – 1 А.
- Қуаты: 10 Вт.
- Толық зарядтау уақыты: 5 сағат.
- Автономды жұмыс мерзімі: 90 мин.
- Ағынды қысымды тегіс реттеу.
- Минималды қысым: 206 кПа.
- Максималды қысым: 860 кПа.
- Реактивті пульсация жиілігі: 1400–1800 имп/мин.
- Резервуардың көлемі: 300 мл.
- Жиынтықтағы саптамалардың саны: 4.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX7.
- Жинақталым: құрылғы, стандартты саптамалар (4 дана), USB кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

| Мәселе | Себеп | Шешім |
|---|--|---|
| Саптаманың соңындағы жарықтар | Құлау немесе басқа механикалық зақым | Саптаманы жаңасына ауыстырыңыз |
| Саптама мен құрылғының корпусы арасында ағыңыз | Саптама дұрыс орнатылмаған | Саптаманы алып тастаңыз және оны басқанша сырғытқаныңызға көз жеткізіңіз |
| Су резервуары ағып жатыр | Резервуар дұрыс орнатылмаған | Резервуардың қозғалтқыш блогына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдалану аяқталғаннан кейін әрқашан резервуарды босатыңыз |
| Су саптама арқылы кірмейді / су төмен қысыммен келеді | Сіз құрылғыны саптаманы төмен қаратып ұстайсыз | Құрылғыны саптаманы жоғары қаратып тік ұстау керек |
| | Резервуарда су жеткіліксіз | Резервуарды толтырыңыз |
| | Су қысымының төмен деңгейі реттелген | Су қысымының деңгейін жоғарылатыңыз |

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды

жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Баолицзе Тэкнолоджи Ко., Лтд.

A2, B2, C2, D2, E2, F2, Шасань тас жолы №47, Шасань комьюнити, Шацзин к-сі, Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы біздің өнімнің сапасын жақсарту үшін алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



