

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Портативті ирригатор
CIR-710P

DEXP

Мазмұны

| | |
|--|----|
| Құрылғы мақсаты..... | 3 |
| Сақтық шаралары..... | 3 |
| Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion). | 4 |
| Құрылғы схемасы | 5 |
| Пайдалану бойынша нұсқаулық | 6 |
| Зарядтау..... | 6 |
| Қолдануға дайындық..... | 6 |
| Қолданылуы | 7 |
| Қызмет көрсету және күтім..... | 8 |
| Техникалық сипаттамалары..... | 8 |
| Ықтимал проблемалар және олардың шешімі | 9 |
| Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары | 9 |
| Қосымша ақпарат..... | 10 |

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ирригатор — бұл тіс аралық кеңістіктегі қақтарды, тамақ қалдықтарын кетіруге және су ағынының пульсациясы арқылы қызыл иекке массаж жасауға арналған арнайы құрылғы.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны ваннаға немесе раковинаға байқаусызда түсіп кетуі мүмкін жерде пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Зарядтағышты дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қолданар алдында USB кәбілінің зақымдалуын тексеріңіз. Құрылғыны зақымдалған USB кәбілімен пайдаланбаңыз. USB кәбілінің ыстық беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғымен үшінші тараптардың құрамдастарын пайдалануға рұқсат етілмейді.
- Құрылғының резервуарын тек сумен немесе тіс дәрігері ұсынған ерітіндімен толтыруға болады.
- Бөтен заттардың құрылғыдағы саңылауларға кіруіне жол бермеңіз.
- Аузыңызда зергерлік бұйымдар болса, осы құрылғыны қолданар алдында оны алып тастаңыз.
- Тіліңізде ашық жара немесе аузыңызда басқа зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Су ағынын тілдің, құлақтың, мұрынның немесе басқа сезімтал мүшелердің астына бағыттамаңыз, бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, тістер сау болса да, аздап қанауы мүмкін - бұл қалыпты жағдай, өйткені олар су ағынының қысымына әлі үйренбеген. Қан кету әдетте бейімделгеннен


кейін 1–2 аптадан кейін тоқтайды. Егер қан кету шамадан тыс болса немесе емдеудің 2 аптасынан кейін де жалғаса берсе, құрылғыны пайдалануды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз.

- Бірінші рет пайдаланған кезде су ағынының төмен қысым деңгейін таңдау ұсынылады.
- Егер сіз соңғы 2 ай ішінде ауыз қуысына операция жасасаңыз, ирригаторды қолданар алдында тіс дәрігеріңізбен кеңесуді ұмытпаңыз. Оның кеңестері мен ұсыныстарын қатаң ұстаныңыз.
- Құрылғыны қуат параметрлері техникалық сипаттамаларда көрсетілгеннен өзгеше адаптермен пайдаланбаңыз.
- Құрылғының қандай да бір ақауларын немесе дұрыс жұмыс істемейтінін тапсаңыз, оны пайдалануды тоқтатыңыз және құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

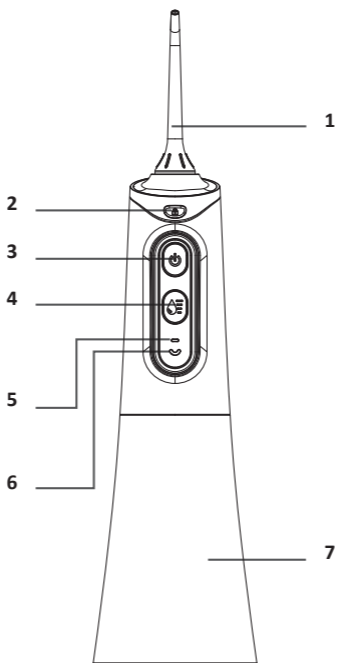

1. Саптама.
2. Саптамаларды босату батырмасы.
3. Қосу/өшіру батырмасы.
4. Су қысымын реттеу батырмасы.
5. Құрылғы жұмысының индикаторы.
6. Зарядтау индикаторы.
7. Су ыдысы.

Пайдалану бойынша нұсқаулығы

Ескерту: бірінші пайдалану алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Зарядтау кезінде ирригаторды пайдаланбаңыз.

Зарядтау

- Құрылғыны зарядтау үшін оны жинақтағы USB кәбілі арқылы 5 В шығыс адаптеріне қосыңыз.
Назар аударыңыз: құрылғыны шығыс кернеуі 5 В-тан асатын қуат көздеріне қоспаңыз, бұл зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғы зарядталып жатқанда оның корпусындағы заряд көрсеткіші қызыл болып жанады. Батарея толығымен зарядталғанда, индикатор түсі жасылға өзгереді.
- Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін су қысымы батырмасын басып тұрыңыз (алдымен қосу/өшіру батырмасын баспай). Индикатордың түсі ағымдағы зарядты көрсетеді:
 - көк — 60% жоғары заряд;
 - жасыл — заряд 21%-дан 59%-ға дейін;
 - қызыл — заряд 20% төмен.

Қолдануға дайындық

Ескерту: жаңа құрылғының резервуарында тазартылған судың аз мөлшерін табуға болады. Бұл су өндірушінің зауытында ирригаторды сынау үшін қолданылған және сіздің денсаулығыңызға ешқандай зиян келтірмейді.

1. Резервуарды тіс дәрігері ұсынған сумен немесе арнайы ерітіндімен толтырыңыз. Мұны істеу үшін оны мотор блогынан алыңыз, блокты қолыңызбен ұстап, екінші қолыңызбен резервуарды солға бұраңыз. Толтырылған резервуарды оңға бұрау арқылы орнына бекітіңіз.

Назар аударыңыз: су ыдысы бос болса, құрылғыны қоспаңыз.

2. Қосымшаны орнату үшін оны мотор бөлігінің үстіңгі жағындағы тесікке сырт етіп орнына түскенше кіргізіңіз. Қосымшаны алу үшін қосымшаны босату түймесін басыңыз.



Құрылғыны бірінші рет пайдалансаңыз немесе оны ұзақ уақыт бойы бірінші рет қоссаңыз, «Қосу/өшіру» түймесін басқаннан кейін саптамаға су бірден ағып кетпеуі мүмкін.

Бұл мәселені шешу үшін саптаманы алып таптап, оң жақтағы суретте көрсетілгендей саптама ойығына аздап су тамызыңыз. Осыдан кейін саптаманы орнына қойып, «Қосу/өшіру» батырмасын қайта басыңыз.



Қолданылуы

Су қысымының деңгейін орнату

Суарғышта су ағынының қысымын біркелкі реттеу бар — бұл сіздің жеке қалауыңызға сәйкес қысымның қарқындылығын реттеуге болатындығын білдіреді.

- Құрылғыны қосу үшін «Қосу/өшіру» батырмасын басып, 1 секунд ұстап тұрыңыз.
- Су қысымын реттеу батырмасын басып тұрыңыз - қысымның қарқындылығы бірте-бірте артады. Қысым сізге ыңғайлы болған кезде батырманы босатыңыз.
- Қысым мәні циклді түрде реттеледі: ең төменгі қысым қарқындылығына оралу үшін реттеу батырмасын максималды мәнге жеткенше ұстап тұрыңыз, содан кейін жіберіп, қайтадан басыңыз.

Ескерту: көрсетілген қысым параметрлері өшірілгенде сақталады.

Қолдану бойынша кеңестер

- Бірінші рет пайдаланған кезде қызыл иектің қан кетуін болдырмау үшін судың ең төменгі қысымын таңдау ұсынылады. Сіз үйренген сайын қысымды бірте-бірте арттыра аласыз.
- Ең жақсы әсерге жету үшін құрылғыны ауыз қуысына тігінен және перпендикуляр ұстап, су ағынын тістерге бағыттау керек. Ұшты тістер арасындағы бос орындарға 1–2 мм қашықтықта жақындатыңыз.
- Раковинаның үстіне еңкейіп, су шашыратпай ағып кетуі үшін аузыңызды сәл ашыңыз.
- Жақсы нәтиже алу үшін алдымен артқы тістерді (молярларды), содан кейін алдыңғы тістерді тазалаңыз. Ұштың ұшын қызыл иектің бойымен сырғытыңыз, оны тістер арасында ұстаңыз. Процедураны бүкіл тіс қатарын, сондай-ақ барлық тіс аралық кеңістіктерді тазалағанша жалғастырыңыз.
- Қолдануды аяқтағаннан кейін резервуарды қалған судан босатыңыз және оны шайыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны толығымен суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғының корпусын жұмсақ щеткамен немесе губкамен және аз мөлшерде абразивті емес жуғыш затпен тазалаңыз. Содан кейін құрылғыны шүберекпен немесе майлықпен құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін спиртті, бензолды, еріткіштерді немесе басқа химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
- Егер корпуста қатты ластану болса, құрылғыны ағынды сумен жууға болады, оның температурасы 50 °C аспауы керек.
- Саптаманы тазалау үшін саптаманы босату түймесін басу арқылы оны алыңыз. Құрылғыны орнату/сақтау алдында саптаманы су астында шайыңыз және құрғатып сүртіңіз.
- Саптаманы әр 3 ай сайын жаңасына ауыстыру ұсынылады. Әйтпесе, құрылғыны пайдалану тиімділігі төмендейді.
- Ирригатор түтігін шаю кезінде оны майыстырмаңыз немесе деформацияламаңыз, зақымдалған сияқты, ол резервуардан суды дұрыс соруды тоқтатуы мүмкін. Бітелуді болдырмау үшін түтік сүзгі торын жүйелі түрде тазалаңыз. Тазалаудан кейін түтікшені майлықпен сүртіңіз.
- Құрылғы мен қондырмаларды құрғақ, таза жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, су ыдысын босатыңыз. Резервуар толы болған кезде құрылғыны төмен температураға ұшыратпаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CIR-710P.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Аккумулятор: Li-on, 3,7 В, 1500 мА·сағ.
- Қуат параметрлері: 5 В – 1 А.
- Қуаты: 10 Вт.
- Толық зарядтау уақыты: 7 сағат.
- Автономды қызмет ету мерзімі: 30 күнге дейін.
- Ағын қысымын біркелкі реттеу.
- Ең төменгі қысым: 207 кПа.
- Максималды қысым: 827 кПа.
- Реактивті пульсация жиілігі: 1400–1800 имп/мин.
- Резервуардың көлемі: 300 мл.
- Қосылған тіркемелер саны: 4.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX7.
- Жинақталым: құрылғы, стандартты қосымшалар (4 дана), USB кәбілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

| Проблема | Себеп | Шешім |
|--|---|---|
| Саптаманың соңындағы жарықтар | Құлау немесе басқа механикалық зақым | Саптаманы жаңасымен ауыстырыңыз |
| Саптама мен құрылғы корпусының арасында ағып кету | Саптама дұрыс орнатылмаған | Қосымшаны алып тастап, оны сырт еткенше салғаныңызға көз жеткізіңіз. |
| Су ыдысы ағып жатыр | Резервуар дұрыс орнатылмаған | Резервуардың мотор блогына мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдалануды аяқтағаннан кейін әрқашан резервуарды босатыңыз |
| Саптама арқылы су ағып кетпейді / су төмен қысымда ағады | Құрылғыны саптаманы төмен қаратып ұстаңыз | Құрылғыны саптаманы жоғары қаратып тігінен ұстау керек. |
| | Резервуарда су жеткіліксіз | Резервуарды толтырыңыз |
| | Су қысымы төменге орнатылды | Су қысымының деңгейін жоғарылатыңыз |

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына,

ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Баолицзе Тэкнолоджи Ко., Лтд.

A2, B2, C2, D2, E2, F2, Шасань №47 тас жолы, Шасань комьюнити, Шацзин к-сі, Баоань ауд., Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімдеріміздің сапасын жақсарту үшін өнімнің сыртқы түрі, техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.dexp.club