



## ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

балаларға арналған дыбыстық электрлік тіс қылшағы DET-500A





# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумулятормен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion).....	5
Құрылғы схемасы .....	6
Құрастыру.....	7
Пайдалану .....	7
Құрылғыны зарядтау .....	9
Қызмет көрсету және күтім .....	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі .....	10
Техникалық сипаттамалары .....	11
Жинақталым .....	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	12
Қосымша ақпарат.....	13

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Электрлік тіс қылшағы — тістерді тазалау және қызыл иектерді ұқалау үшін арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары


- Егер сіз тістеріңізге немесе қызыл иектеріңізге операция жасаған болсаңыз, сондай-ақ тіс протездері немесе импланттары болса, құрылғыны тек тіс дәрігерінің басшылығымен пайдаланыңыз.
- Егер сіз кардиостимуляторды немесе кез келген басқа медициналық құрылғыны пайдалансаңыз, тіс қылшағын пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңізбен қосымша кеңесіңіз.
- Саптамаларды әр 3 ай сайын ауыстырып отыру және жинақталымға кірмейтін басқа саптамаларды пайдаланбау ұсынылады.
- Құрылғы 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға ұсынылмайды. Тіс қылшағын балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың пайдалануына олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамдардан басқа адамдар бақылау жүргізген кезде жол беріледі.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Егер сіздің тіс пастаңызда пероксид, ас содасы немесе басқа да бикарбонаттар (көбінесе ағартқыш тіс пасталарында қолданылады) болса, тіс қылшағының саптамасын әр қолданғаннан кейін сумен мұқият тазалаңыз. Бұл жарықтардың пайда болуына жол бермейді.
- Зарядтау құрылғысын әрқашан судан және дымқыл немесе ылғал беттерден алыс ұстаңыз.
- Зарядтау құрылғысына тиындар немесе қыстырғыштар сияқты ұсақ металл заттарды қоймаңыз.




- Бұл құрылғыда кіріктірілген аккумулятор бар, оны отқа тастамаңыз, зарядтамаңыз және оны жоғары температуралы жерлерде пайдаланбаңыз.
- Зарядтау кезінде құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Тіс қылшағы — жеке гигиена құралы және бірнеше адамның пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны пайдаланбас бұрын, оның зақымдануын тексеріңіз. Егер зақым анықталса, қылшақты пайдалануды тоқтатыңыз.
- Электр тогының соғуын және құрылғының бұзылуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз, аспаңыз немесе өзгертпеңіз.

## Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
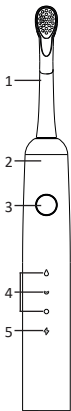
## Құрылғы схемасы




1. Саптама.
2. Құрылғының корпусы.
3. Қуат / жұмыс режимін өзгерту батырмасы.
4. Режим индикаторлары:
  - «Soft» режимі — 
  - «Clean» режимі — 
  - «White» режимі — 
5. Заряд индикаторы.

## Құрастыру

1. Саптаманы тіс қылшағының корпусына орнатыңыз, оны абайлап істікке кигізіп, қысыңыз.
2. Саптаманы алу үшін оны тігінен жоғары қарай тарту керек.

Саптаманы орнатқаннан кейін, оның және тіс қылшағының корпусының арасында кішкене алшақтық қалады, бұл құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде тазалау басының дұрыс қозғалуын қамтамасыз етеді.

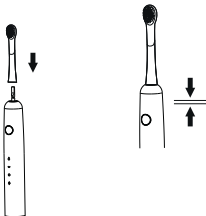

## Пайдалану

### Жұмыс режимдері


Соңғы қолданылған режим келесі рет қосылған кезде құрылғының баптауларында сақталады.

- «Soft» режимі: қызыл иекке жұмсақ массаж жасауға арналған төмен жиіліктегі діріл режимі.
- «Clean» режимі: күнделікті тіс тазалауға арналған орташа жиіліктегі діріл режимі.
- «White» режимі: тістерді өңезден және дақтардан қарқынды тазартуға қолайлы жоғары діріл жиілігі режимі.

**Ескерту:** әр режим 2 минут жұмыс істейді.

## Тістерді тазалау


1. Қылшақты сүмен сулаңыз және оған тіс пастасын жағыңыз.

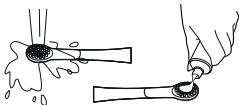


2. Қылшақты қоспас бұрын оны аузыңызға салыңыз.
3. Құрылғыны қосу үшін қуат / жұмыс режимін өзгерту (3) батырмасын басыңыз.
4. Режимдерді өзгерту үшін қуат / жұмыс режимін өзгерту батырмасын қосқаннан кейін 5 секунд бойы кезекпен басуды жалғастырыңыз. Егер режимдерді ауыстырған кезде сіз соңғы режимге жетсеңіз және қуаттандыру / режимдерді ауыстыру батырмасын тағы бір рет бассаңыз, онда құрылғы өшеді, соңғы режимнің жады қалпына келтіріледі және режимдерді ауыстыру батырмасын келесі рет басқан кезде тіс қылшағы бірінші режимнен жұмысын бастайды.



5. Тіс қылшағы берілген режимдердің бірінде 2 минут жұмыс істейді, содан кейін ол өшеді. Бұл ауыз қуысының төрт аймағының әрқайсысына 30 секунд қажет дегенді білдіреді. Сондықтан әр 30 секунд сайын тіс қылшағы жұмыста қысқа үзіліс жасайды, яғни келесі аймаққа көшу керек.

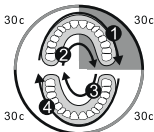

6. Қылшақ корпусын ұстап тұрып, баяу және ақырын айналмалы қозғалыстар жасаңыз. Қатты баспаңыз немесе ысқыламаңыз. Содан кейін қылшақты қызыл иектің сыртқы жиегіне қойыңыз. Қылшақты қызыл иек сызығы бойымен  $45^\circ$  бұрышпен баяу жылжытыңыз.

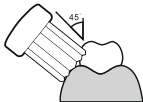

7. Екі минуттық тазалау циклі аяқталғаннан кейін, қылшақты қайта қосып, қосымша тазалауға біраз уақыт жұмсауға болады.

**Ескерту:** кез-келген режимде 5 секундтан астам жұмыс істеген кезде тіс қылшағы осы жұмыс режимін есте сақтайды.

## Құрылғыны зарядтау

Заряд деңгейі сыни мәндерге дейін төмендеген кезде, «⚡» заряд индикаторы қызыл түспен жыпылықтай бастайды. Тіс қылшағын зарядтамас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны зарядтау үшін:

1. Жинақталымдағы қуат кәбілінің бір ұшын қуат көзіне қосыңыз, ал екіншісін тіс қылшағының корпусындағы зарядтау қосқышына қосыңыз.
2. Максималды зарядқа жеткенде индикатор жасыл түспен жана бастайды.

## Ескертулер

- Құрылғыны зарядтауға 4-тен 6 сағатқа дейін уақыт кетеді.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы зарядталмаса, онда заряд индикаторы бірден жанбауы мүмкін. Шамамен 30 минут зарядталғаннан кейін индикатор қайтадан жанады.

## Қызмет көрсету және күтім

- Тістерді тазалау аяқталғаннан кейін құрылғыны өшіріп, саптаманы алып тастап, сумен шайыңыз. Саптаманы табиғи жолмен құрғатыңыз.

**Назар аударыңыз!** Қылшықтардың деформациясын болдырмау үшін оларды тартпаңыз.



- Қажет болса, корпусты тазалаңыз, зарядтау қосқышын жабыңыз және корпусты таза, дымқыл шүберекпен тазалаңыз, содан кейін құрғатыңыз.

**Назар аударыңыз!** Құрылғының корпусын суға батырмаңыз.

- Тіс қылшағын әр қолданғаннан кейін саптаманы тазалаңыз.
- Саптаманы жуу үшін температурасы 40 °С-тан жоғары суды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны, қуат көбілін тазалау үшін химиялық және агрессивті жуғыш заттарды, абразивті пасталарды, құрамында қышқылдар мен еріткіштер бар құралдарды, сондай-ақ құрылғыны және оның қаптамасын зақымдауы мүмкін металл губкаларды пайдаланбаңыз.
- Қуат көбілін тазалауды қуат адаптерінен ажыратқаннан кейін таза, құрғақ шүберекпен жасаңыз.
- Саптамаларды әр 3 ай сайын немесе тозу дәрежесіне байланысты ауыстыру ұсынылады.

## Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Ықтимал шешім
Қылшықтардың әлсіз тербелісі	Қылшақтың тістерге тым көп қысымы	Қылшақпен тістеріңізге қысым жасамаңыз
	Саптаманың корпусқа тығыз бекітілмеуі	«Құрастыру» бөліміндегі нұсқауларға сәйкес саптаманы алып, корпусқа қайта кигізіңіз.

Қысқа жұмыс уақыты	Толық емес зарядтау	Зарядтау индикаторы жасыл түске боялғанша құрылғыны зарядтаңыз
	Зарядтау уақыты жеткіліксіз	Құрылғыны 12 сағат бойы зарядтаңыз
Құрылғы қосылмайды	Құрылғы заряды таусылды.	Құрылғыны зарядтаңыз
	Ішкі ақаулық	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DET-500A.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Құрылғының қуаты: 1 Вт.
- Таза салмағы: 147 г.
- Өлшемдері (Е x Т x Б): 27 x 27 x 228 мм.
- Жұмыс жылдамдығы: минутына 39600 пульсация.
- Толық зарядта жұмыс уақыты: 180 мин.
- Тіс қылшағының номиналды қуаты: 5 В – 1 А.
- Қылшықтардың қаттылығы: жұмсақ.
- Қылшық материалы: DuPont нейлоны.
- Аккумулятор:
  - Түрі: Li-ion.
  - Сыйымдылығы: 500 мА·сағ.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX7.
- Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: III.
- Қылшақ түрі: дыбыстық.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Саптамалар жиынтығы — 4 дана.
- Жапсырмалар жинағы.
- Зарядтау кәбілі.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы тұрақты бекітуді қажет етпейді. Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау қаптамада дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мүқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорындан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: Айми Хэлс Тэкнолоджи (Гуандун) Ко., Лтд. 1-ғимарат, Цуйху тас жолы, №77, Чиган, Хумэнь, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

**Manufacturer:** Aimi Health Technology (Guangdong) Co., Ltd.

Building 1, No.77 Cuihu Road, Chigang, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім туралы сипаттамалар, ақпарат, сондай-ақ оның сыртқы түрі біздің өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. \_V.2

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>



