



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

детская звуковая электрическая зубная щетка DET-500A



Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	5
Схема устройства	6
Сборка	7
Эксплуатация	7
Зарядка устройства	9
Обслуживание и уход	10
Возможные проблемы и их решение	10
Технические характеристики	11
Комплектация	11
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	12
Дополнительная информация	13

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Электрическая зубная щетка — устройство для чистки зубов и массажа десен.

Меры предосторожности

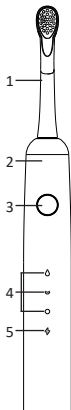
- Если вы перенесли операцию на зубах или деснах, а также при наличии зубных протезов или имплантов используйте устройство только под руководством стоматолога.
- Если Вы пользуетесь кардиостимулятором или любым другим медицинским устройством, дополнительно проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием зубной щетки.
- Рекомендуется заменять насадки каждые 3 месяца и не использовать другие насадки, не входящие в комплект поставки.
- Устройство не рекомендуется для использования детьми младше 3 лет. Разрешается использование зубной щетки детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Если Ваша зубная паста содержит перексид, питьевую соду или другие бикарбонаты (часто используемые в отбеливающих зубных пастах), тщательно очищайте насадку зубной щетки водой после каждого использования. Это предотвратит возможное появление трещин.
- Всегда держите зарядное устройство вдали от воды и мокрых или влажных поверхностей.


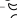

- Не кладите на зарядное устройство мелкие металлические предметы, такие как монеты или скрепки.
- Это устройство содержит встроенный аккумулятор, не бросайте его в огонь, не заряжайте и не используйте его в местах с высокой температурой.
- Во время зарядки не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Зубная щетка — средство личной гигиены и не предназначено для использования несколькими людьми.
- Перед использованием устройства проверьте его на наличие повреждений. При обнаружении повреждений прекратите использование щетки.
- Не разбирайте, не вскрывайте и не модифицируйте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током и порчи устройства.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

Схема устройства

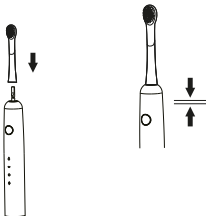


1. Насадка.
2. Корпус устройства.
3. Кнопка питания / смены режимов работы.
4. Индикаторы режимов:
 - Режим «Soft» — .
 - Режим «Clean» — .
 - Режим «White» — .
5. Индикатор заряда.

Сборка

1. Установите насадку на корпус зубной щетки, аккуратно надев ее на штырь и прижав.
2. Для того, чтобы снять насадку, необходимо потянуть ее вертикально вверх.

После установки насадки между ней и корпусом зубной щетки останется небольшой зазор, обеспечивающий правильное перемещение чистящей головки при работе устройства.



Эксплуатация

Режимы работы

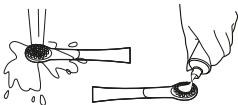
Последний используемый режим сохраняется в настройках устройства при следующем его включении.

- Режим «Soft»: режим с низкой частотой вибрации, предназначенный для мягкого массажа десен.
- Режим «Clean»: режим со средней частотой вибрации, предназначенный для повседневной чистки зубов.
- Режим «White»: режим с высокой частотой вибрации, подходящий для интенсивной чистки зубов от налета и пятен.


Примечание: каждый режим работает в течение 2 минут.

Чистка зубов


1. Смочите щетку водой и нанесите на нее немного зубной пасты.



2. Поместите щетку в ротовую полость, прежде чем включить ее.
3. Нажмите кнопку питания / смены режимов работы (3), чтобы включить устройство.
4. Для смены режимов продолжайте поочередно нажимать кнопку питания / смены режимов работы в течение 5 секунд после включения. Если при переключении режимов вы дошли до последнего режима и нажали кнопку питания / смены режимов еще раз, то устройство выключится, память последнего режима будет сброшена и при последующем нажатии кнопки переключения режимов зубная щетка начнет работу с первого режима.
5. Зубная щетка будет работать в одном из заданных режимов в течение 2 минут, после чего выключится. Это означает, что на каждую из четырех зон полости рта приходится по 30 секунд. Поэтому каждые 30 секунд зубная щетка делает в работе короткую паузу, означая, что нужно переместиться на следующую зону.

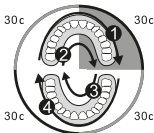

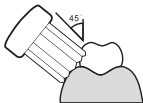6. Держась за корпус щетки медленно и аккуратно совершайте круговые движения. Не надавливайте сильно и не трите. Затем расположите щетку у наружного края десен. Медленно перемещайте щетину по линии десен под углом 45°.



7. После завершения двухминутного цикла чистки, можно повторно включить щетку и потратить немного времени на дополнительную очистку.

Примечание: при работе в каком-либо из режимов на протяжении более 5 секунд зубная щетка запоминает этот режим работы.

Зарядка устройства

Когда уровень заряда опустится до критических значений, индикатор заряда «⚡» начнет мигать красным цветом. Прежде чем заряжать зубную щетку, убедитесь, что она выключена.

Чтобы зарядить устройство:

1. Один конец кабеля питания из комплекта поставки подключите к источнику питания, а другой — присоедините к разъему зарядки на корпусе зубной щетки.
2. По достижению максимального заряда индикатор начнет гореть зеленым цветом.

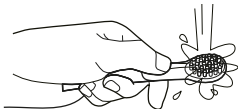
Примечания

- Зарядка устройства занимает от 4 до 6 часов.
- Если устройство оставалось без зарядки долгое время, то индикатор заряда может загореться не сразу. Спустя примерно 30 минут зарядки индикатор снова загорится.

Обслуживание и уход

- После окончания чистки зубов выключите устройство, снимите насадку и промойте ее водой. Просушите насадку естественным способом.

Внимание! Не тяните щетинки во избежание их деформации.



- При необходимости очистить корпус, закройте разъем зарядки и очистите корпус чистой влажной тканью, а затем вытрите насухо.

Внимание! Не погружайте сам корпус устройства в воду.

- Очищайте насадку после каждого использования зубной щетки.
- Не используйте для промывания насадки воду с температурой выше 40 °С.
- Не используйте для очистки устройства, кабеля питания химические и агрессивные моющие средства, абразивные пасты, средства, содержащие кислоты и растворители, а также металлические губки, которые могут повредить устройство и его покрытие.
- Очистку кабеля питания производите чистой сухой тканью, предварительно отключив от адаптера питания.
- Рекомендуется заменять насадки каждые 3 месяца или в зависимости от степени износа.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Возможное решение
Слабое колебание щетинок	Слишком сильное давление щетки на зубы	Не давите щеткой на зубы
	Неплотное крепление насадки к корпусу	Снимите и заново наденьте насадку на корпус, согласно инструкциям в п. «Сборка».

Непродолжительное время работы	Неполная зарядка	Заряжайте устройство пока индикатор заряда не загорится зеленым цветом
	Недостаточное время зарядки	Заряжайте устройство в течение 12 часов
Устройство не включается	Устройство разряжено	Зарядите устройство
	Внутренняя неисправность	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Технические характеристики

- Модель: DET-500A.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность устройства: 1 Вт.
- Вес нетто: 147 г.
- Габариты (Ш × Г × В): 27 × 27 × 228 мм.
- Скорость работы: 39600 пульсаций в минуту.
- Время работы при полном заряде: 180 мин.
- Номинальное питание зубной щетки: 5 В – 1 А.
- Жесткость щетинок: мягкая.
- Материал щетины: нейлон DuPont.
- Аккумулятор:
 - Тип: Li-ion.
 - Емкость: 500 мА·ч.
- Степень защиты от влаги: IPX7.
- Класс защиты от поражения эл.током: III.
- Тип щетки: звуковая.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.
- Комплект насадок — 4 шт.
- Набор наклеек.
- Кабель для зарядки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует постоянной фиксации. Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Айми Хэлс Тэкнолоджи (Гуандун) Ко., Лтд. Зд. 1, шоссе Цуйху №77, Чиган, Хумэнь, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай..

Manufacturer: Aimi Health Technology (Guangdong) Co., Ltd.
Building 1, No.77 Cuihu Road, Chigang, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

