

# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# Ирригатор DEXP EIR-110W



# Содержание

<b>Назначение устройства.....</b>	<b>5</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>5</b>
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	6
Зарядка аккумулятора.....	10
<b>Схема устройства.....</b>	<b>7</b>
<b>Режимы.....</b>	<b>8</b>
<b>Инструкция по эксплуатации.....</b>	<b>9</b>
Обслуживание и уход.....	10
<b>Возможные проблемы и их решения.....</b>	<b>11</b>
<b>Технические характеристики.....</b>	<b>11</b>
<b>Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....</b>	<b>12</b>
<b>Дополнительная информация.....</b>	<b>12</b>

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Ирригатор — специальное устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.

## Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не погружайте зарядное устройство в воду или другую жидкость.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну, душ или раковину.
- Если во время зарядки ирригатор упал в воду, немедленно отключите зарядное устройство от сети и достаньте ирригатор из воды. Перед повторной зарядкой или использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Проверьте USB кабель на предмет повреждений перед использованием. Не используйте устройство с поврежденным USB кабелем.
- В случае каких-либо неисправностей или некорректной работы устройства прекратите использование и отключите устройство от источника питания.
- Следите, чтобы USB кабель не касался горячих поверхностей.
- Не используйте устройство с адаптером, напряжение которого отличается от указанного в технических характеристиках.
- Если вы не планируете использовать данное устройство в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не направляйте струю воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные органы, в противном случае это может привести к повреждению этих органов.

- Устройство может создавать электромагнитные поля (ЭМП), не причиняющие вреда пользователю. Тем не менее, пользователям кардиостимуляторов и других подобных медицинских устройств следует обратиться к врачу за советом перед использованием данного устройства.
- При первом использовании может возникнуть небольшое кровотечение дёсен. Это нормально. Если кровотечение слишком сильное, немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с врачом.
- Не допускайте попадания инородных предметов в любые отверстия устройства.
- Не используйте данное устройство в местах хранения и использования аэрозолей или кислорода.
- Не допускайте контакта данного устройства с йодом, соленой водой или нерастворимыми в воде концентрированными эфирными маслами, не заполняйте резервуар данными веществами, так как это сократит срок службы продукта и приведет к аннулированию гарантии.
- Не используйте данное устройство во время ношения украшений для зубов.
- Не используйте данное устройство при наличии открытой раны на языке или при повреждении ротовой полости.
- Заполняйте резервуар устройства только теплой водой или другой рекомендованной стоматологом жидкостью температурой ниже 40 °C.
- Эксплуатируйте данное устройство в соответствии с данным руководством пользователя и рекомендациям стоматолога.
- Не используйте один ирригатор более чем на одну персону.
- Держа устройство, следите, чтобы пальцы рук не прищемило корпусом и резервуаром для воды.


## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами. Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

## Зарядка аккумулятора

- Перед первым использованием нет необходимости заряжать устройство, оно полностью заряжено. После первого использования заряжайте в течение 1-4 часов по мере необходимости.
- Для того, чтобы зарядить ирригатор, подключите его к зарядному устройству с помощью USB кабеля.
- Полностью зарядите устройство перед хранением.
- Чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство, как только заряд батареи станет низким.

## Схема устройства

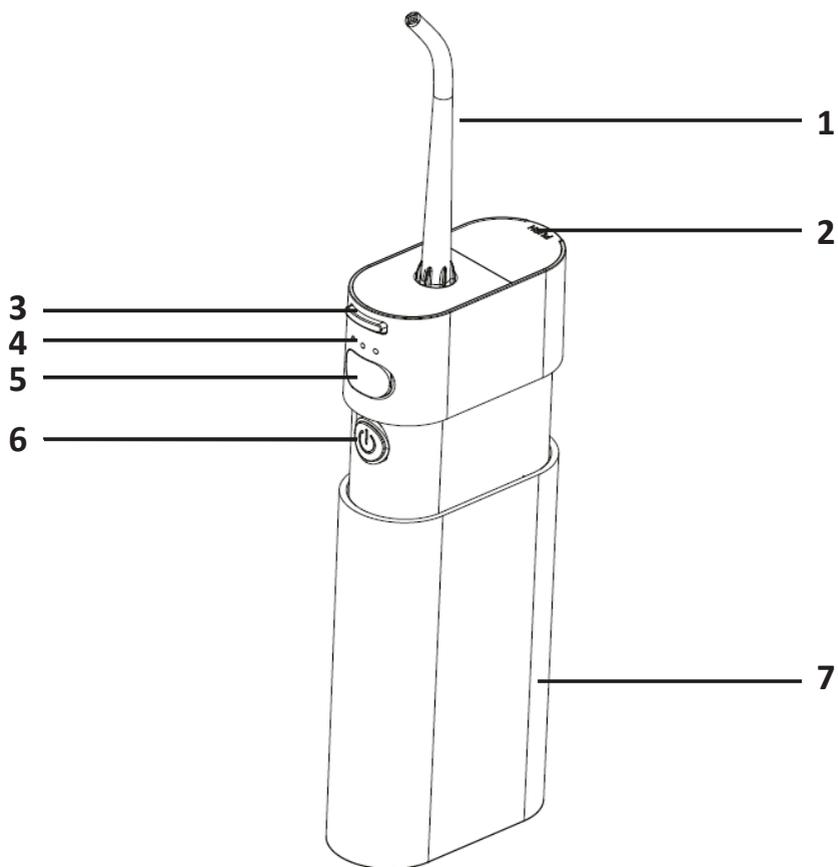

1. Насадка.
2. Водозабор.
3. Кнопка блокировки насадки.
4. Световой индикатор.
5. USB разъем.
6. Кнопка «Вкл./Выкл.».
7. Резервуар.

## Режимы


Режимы	Переключение	Цвет индикатора	Описание	Давление (кПа)
Мягкий.	Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».	Синий.	Мягкое давление воды для чувствительных зубов и начинающих пользователей.	600-690.
Пульсация.	Удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» на протяжении 0.5 сек.	Синий.	Чистка труднодоступных зон, массаж десен, настраиваемая частота пульсаций.	480-580.
Усиленный.	Повторно удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» на протяжении 0.5 сек.	Синий.	Сильное давление воды, наиболее результативное очищение, подходит большинству пользователей.	≥ 760.
Световой индикатор.	1 красный световой индикатор: уровень заряда менее 10 %. 2 мигающих красных световых индикатора: подзарядка. 3 зеленых световых индикатора: уровень полного заряда (когда устройство полностью заряжено, световые индикаторы погаснут через 2 минуты).			

**Примечание:** при первом использовании может возникнуть небольшое кровотечение. Это нормально. Используйте режим «Мягкий» и «Пульсация», и только после того как привыкните, переходите на режим «Усиленный».


# Инструкция по эксплуатации

**Примечание:** полностью зарядите устройство перед первым использованием. Подключите ирригатор к зарядному устройству с помощью USB кабеля и включите ирригатор. Не используйте ирригатор во время зарядки.


1. Вставьте насадку.

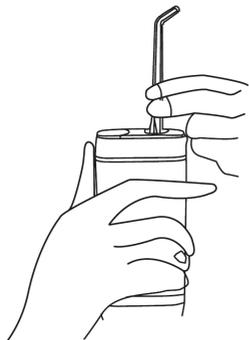

2. Откройте крышку резервуара и залейте в резервуар необходимый объем воды.

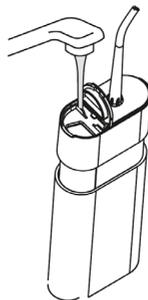

3. Поместите устройство в ротовую полость и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».

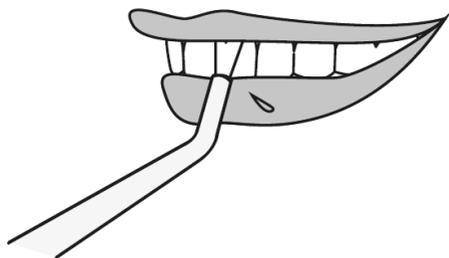


4. Переключайте режимы с помощью кнопки «Вкл./Выкл.».




5. После использования откройте крышку резервуара и положите насадку в специально отведенное место.



6. Извлеките резервуар для воды и вымойте его.

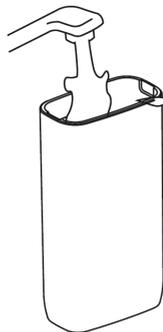

# Обслуживание и уход

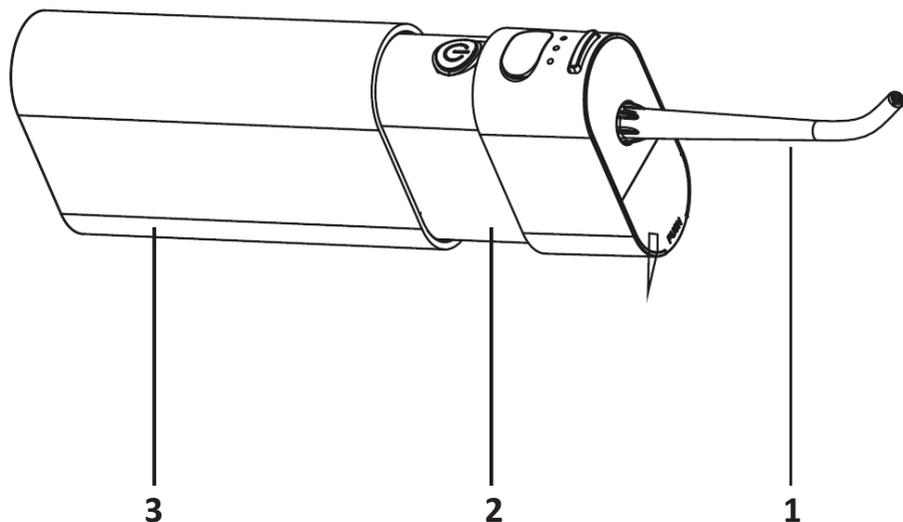

## 1. Насадка

- Нажмите на кнопку блокировки насадки и извлеките ее, вымойте ее чистой водой и вытрите сухой тканью.
- Врачи советуют менять насадку каждые шесть месяцев.
- Если верхняя часть насадки подверглась деформации, смените ее немедленно во избежание дальнейшей поломки устройства.

## 2. Корпус

- Удалите грязь с корпуса при помощи мощного средства, затем промойте его чистой водой и протрите сухой тканью.
- Не используйте спиртосодержащие жидкости для чистки корпуса.
- Не используйте для чистки корпуса воду, температура которой составляет +50 °C и выше.

## 3. Резервуар

- Регулярно заполняйте резервуар водой и следите за чистотой резервуара.
- Сливайте воду из резервуара, если не планируете пользоваться им в течение долгого времени.

## Возможные проблемы и их решения

Проблемы	Причины	Решения
Не работает.	Батарея разряжена.	Подзарядите батарею.
Световой индикатор не мигает/ либо мигает хаотично.	Плохое соединение с зарядным устройством.	Переподключите кабель к ирригатору.
	Неисправное зарядное устройство.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Короткое время работы после подзарядки.	Недостаточное время подзарядки.	Заряжайте устройству не менее четырех часов.
	Проблемы с питанием.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Слабое давление воды.	Насадка забита либо повреждена.	Замените насадку.

## Технические характеристики

- Модель: EIR-110W.
- Мощность: 8 Вт.
- Аккумулятор: 1100 мА·ч, литиевый, 3,7 В.
- Класс защиты: IPX7.
- Режимы давления струи: 3.
- Время полной зарядки: 4-6 часов.
- Входное напряжение: 5 В = 1 А.
- Объем резервуара: 130 мл.
- Частота пульсации струи воды: 1400-1600 имп/мин.
- Уровень давления воды: 480-760 кПа.
- Комплектация: ирригатор, 2 стандартные насадки, USB кабель, руководство пользователя.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Гуандун Хань Ичэнь Интэллиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Каб. 302, зд. 1, Хуанчжуан, секция Чашань № 45, шоссе Шида, Чашань, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_

V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)