

Руководство по эксплуатации

Ирригатор
EIR-310P

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Ирригатор — специальное устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков, и массажа дёсен за счёт пульсаций водной струи.

Меры предосторожности


- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству мокрыми руками.
- Не погружайте зарядное устройство в воду или другую жидкость.
- Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну, душ или раковину.
- Если во время зарядки ирригатор упал в воду, немедленно отключите зарядное устройство от сети и достаньте ирригатор из воды. Перед повторной зарядкой или использованием убедитесь, что устройство полностью заряжено.
- Проверьте USB кабель на предмет повреждений перед использованием. Не используйте устройство с поврежденным USB кабелем.
- В случае каких-либо неисправностей или некорректной работы устройства прекратите использование и отключите устройство от источника питания.
- Следите, чтобы USB кабель не касался горячих поверхностей.
- Не используйте устройство с адаптером, напряжение которого отличается от указанного в технических характеристиках.
- Если вы не планируете использовать данное устройство в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не направляйте струю воды под язык, в уши, нос или другие чувствительные органы, в противном случае это может привести к повреждению этих органов.
- Устройство может создавать электромагнитные поля (ЭМП), не причиняющие вреда пользователю. Тем не менее, пользователям кардиостимуляторов и других подобных медицинских устройств следует обратиться к врачу за советом перед использованием данного устройства.

- При первом использовании может возникнуть небольшое кровотечение дёсен. Это нормально. Если кровотечение слишком сильное, немедленно выключите устройство и проконсультируйтесь с врачом.
- Не допускайте попадания инородных предметов в любые отверстия устройства.
- Не используйте данное устройство в местах хранения и использования аэрозолей или кислорода.
- Не используйте данное устройство во время ношения украшений для зубов.
- Не используйте данное устройство при наличии открытой раны на языке или при повреждении ротовой полости.
- Заполняйте резервуар устройства только теплой водой или другой рекомендованной стоматологом жидкостью температурой ниже 30 °С.
- Эксплуатируйте данное устройство в соответствии с данным руководством пользователя и рекомендациям стоматолога.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °С) и очень низких (ниже -10 °С) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.


Схема устройства

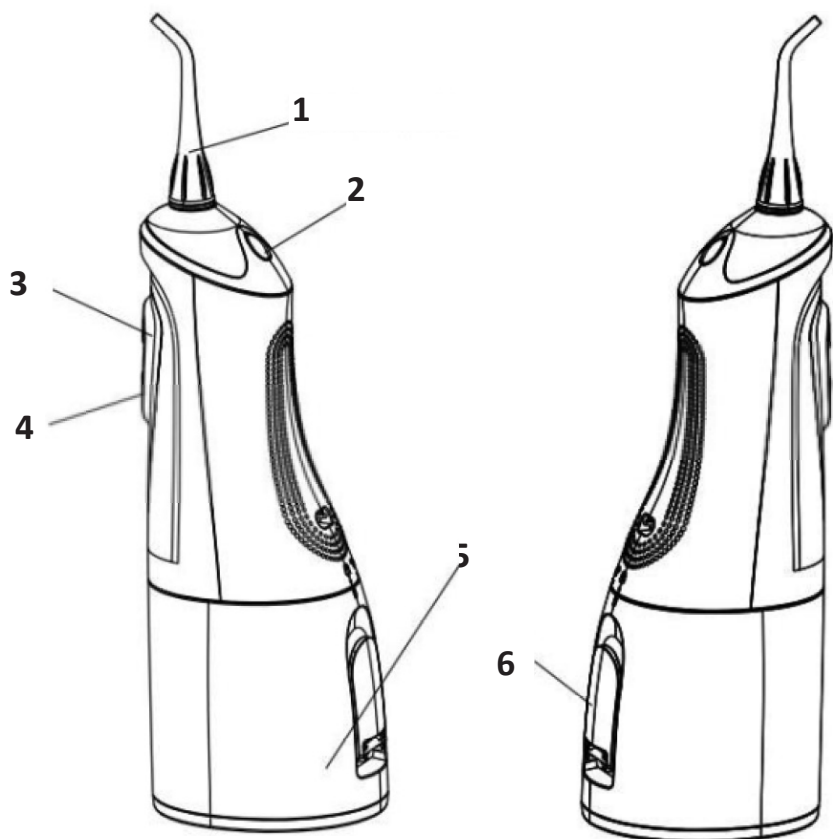

1. Насадка.
2. Кнопка блокировки насадки.
3. Кнопка «Вкл./Выкл.».
4. Кнопка настройки режима.
5. Резервуар.
6. Водозабор.

Примечание: перед использованием проверьте резервуар для воды, там может остаться немного дистиллированной воды, которая применялась в качестве тестирования ирригатора после его изготовления.

Режимы работы

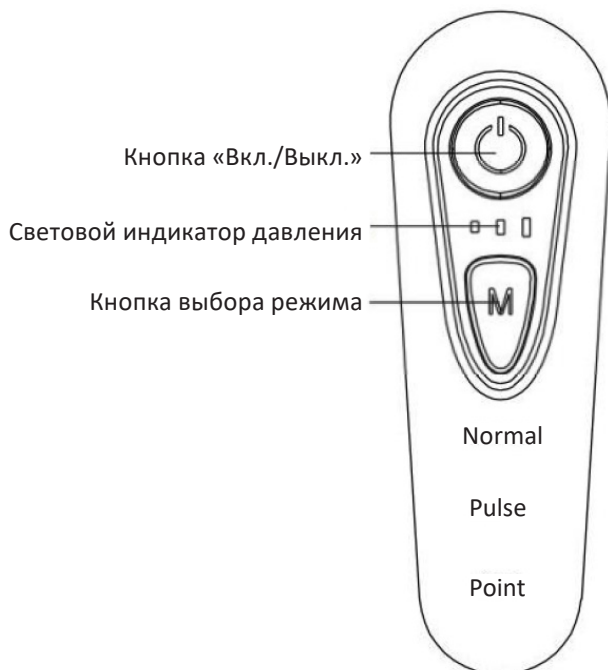

Режимы		Обычный	Пulsация	Точечный
Давление (кПа)	Мягкий	200	200-410	200
	Средний	480	350-550	480
	Интенсивный	960	200-900	960

Примечание: при первом использовании может возникнуть небольшое кровотечение. Это нормально. Используйте уровни давления «Мягкий» и «Средний», и только после того, как привыкните, переходите на «Интенсивный».

Инструкция по эксплуатации


Примечание: полностью зарядите устройство перед первым использованием. Подключите ирригатор к зарядному устройству с помощью USB. Не используйте ирригатор во время зарядки.

1. Выберите режим

- Для того чтобы переключить режим, нажмите кнопку «М».
- Для того чтобы выбрать необходимый уровень давления, коротко нажмите «М» (Уровни давления: «мягкий», «средний», «интенсивный»):
 - Мягкий: предназначен для повседневной чистки рта.
 - Средний: предназначен для чистки и массажа десен.
 - Интенсивный: предназначен для тщательной чистки между зубов.


2. Вставьте насадку

- Вставьте насадку в предназначенное отверстие в верхней части устройства.
- Надавите до характерного щелчка.
- Нажмите кнопку блокировки насадки для того, чтобы снять ее.

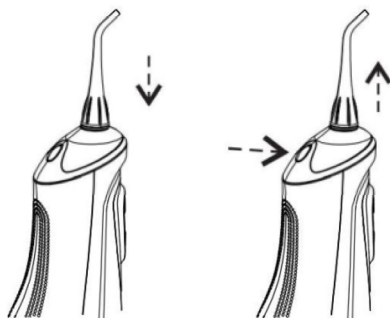

Наполните резервуар водой

- Откройте крышку резервуара.
- Залейте в резервуар необходимый объем воды.

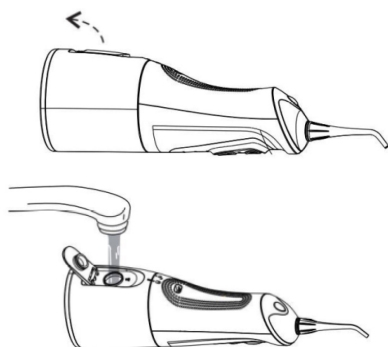


Примечание: перед тем как наполнить резервуар водой, убедитесь, что USB кабель отключен от устройства.

Разбор устройства

- Выключите устройство, откройте крышку резервуара, держа при этом устройства таким образом, чтобы отверстие резервуара было расположено снизу, чтобы слить воду.
- Включите устройство, чтобы слить остатки воды, и выключите устройство.

Зарядка аккумулятора

- Зарядите устройство перед первым использованием, это займет 6 часов.
- Для того, чтобы зарядить ирригатор, подключите его к зарядному устройству с помощью USB кабеля.
- Во время зарядки световой индикатор будет мигать.
- Когда батарея будет полностью заряжена, световой индикатор будет гореть.
- Чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство, как только заряд батареи станет низким.

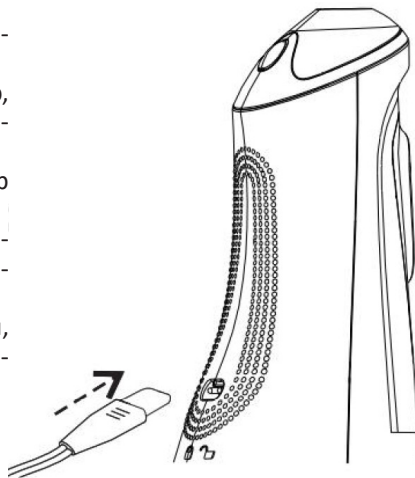


Примечания

1. Выберите комфортный режим для ваших зубов и десен.
2. Не заливайте в резервуар данного устройства и не используйте в качестве ополаскивающей жидкости йод, соленую воду или нерастворимые в воде концентрированные эфирные масла, не заполняйте резервуар данными веществами, так как это сократит срок службы продукта и приведет к аннулированию гарантии.
3. Не наполняйте резервуар водой температура которой составляет +40 °C и выше.
4. Не используйте устройство для промывки носовой, ушной и других чувствительных полостей.
5. Для людей имеющие проблемы связанные с пародонтом и тех у кого за последние 2 месяца проводилась операция в полости рта, необходима консультация лечащего врача.
6. Не используйте один ирригатор более чем на одну персону.
7. Всегда сохраняйте USB разъем сухим.
8. В комплект не входит оригинальная зарядка. Вы можете заряжать ирригатор с помощью обычного сетевого адаптера либо напрямую через компьютер с помощью оригинального USB кабеля.

Примечание: при первом использовании может возникнуть небольшое кровотечение. Это нормально. Используйте уровни да «Мягкий» и «Пульсация», и только после того, как привыкните, переходите на режим «Интенсивный».

После использования

Если ирригатор не использовался в течение долгого времени, с целью избежать попадания бактерий в организм тщательно промойте ирригатор чистой водой и вылейте всю оставшуюся жидкость. Дайте поработать ирригатору 2–5 секунд, чтобы откачать оставшуюся воду из резервуара.

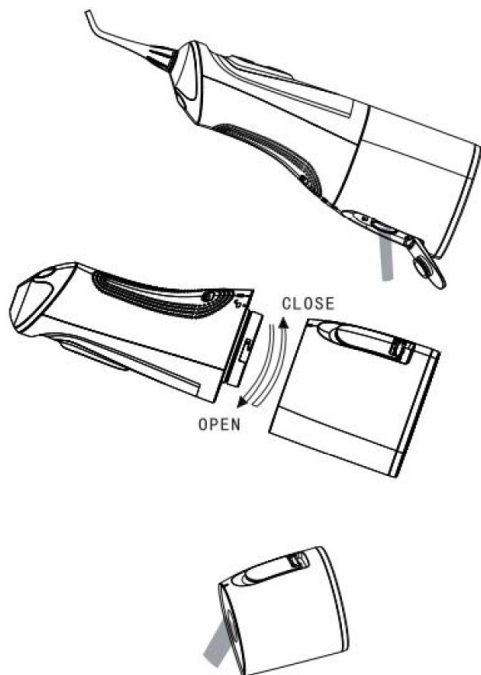

Рекомендации

- В случае каких-либо неисправностей или некорректной работы устройства прекратите использование и отключите устройство от источника питания.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не допускайте попадания инородных предметов в любые отверстия устройства.
- Если прибор находился в условиях отрицательной температуры, перед эксплуатацией необходимо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 12 часов.
- Не используйте ирригатор во время принятия душа.

Возможные проблемы и их решения

Проблемы	Причины	Решения
Устройство не работает	Батарея разряжена	Подзарядите батарею
Световой индикатор не мигает / либо мигает хаотично	Плохое соединение с зарядным устройством. Переподключите кабель к ирригатору	
Короткое время работы после подзарядки	Недостаточное время подзарядки	Заряжайте устройство не менее четырех часов
	Проблемы с питанием	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Слабое давление воды	Насадка забита либо повреждена	Замените насадку
	Устройство находится в неверном положении	Для корректного давления, насадка должна быть в положении выше чем резервуар

Технические характеристики

- Модель: EIR-310P.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 5 Вт.
- Параметры питания: 5 В = 1 А.
- Аккумулятор: 2000 мА·ч, литиевый, 3,7 В.
- Класс защиты: IPX7.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Режимы давления струи: 9.
- Время полной зарядки: 4–6 часов.
- Время автономной работы: 30 дней.
- Объем резервуара: 320 мл.
- Скорость пульсации: 1400–1800 имп/мин.
- Уровень давления воды: 200–960 кПа.

Комплектация:

- Ирригатор.
- 2 стандартные насадки.
- 1 ортодонтическая насадка.
- 1 ложка для языка.
- USB кабель.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Чжэнву Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юг каб-та 601, зд. 3, парк предпринимательства и инноваций в области оптоэлектроники и лекарственно-пищевой техники, №696, пр-т Биньхай Файв, зона экономического и технологического развития Вэньчжоу, Китай.

Manufacturer: Wenzhou Zhengwu Technology Co.,Ltd.

South front of Room 601, Building 3, Optoelectronics and Food and Drug Machinery Entrepreneurship and Innovation Park, No.696, Binhai Five Avenue, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, China

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжжж): _____ V.5

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



