

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Массаж жастығы  
MP-40BW

**DEXP**

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Массаж жастығы — дененің әртүрлі аймақтарын уқалауға арналған құрылғы.

## Сақтық шаралары

- Пайдаланғаннан кейін және құрылғыны тазалау алдында қысқа тұйықталуды болдырмау үшін ашаны розеткадан суырған жөн.
- Құрылғыға су түссе, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Массаж жастықшасын құрғақ бөлмеде, ылғалдан қорғалған, қараңғы, құрғақ жерде, күн сәулесі тікелей түспейтін жерде сақтау ұсынылады. Құрылғыны ылғалды жерлерде немесе су көздерінің жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау ұсынылады.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Массаж жастығы электр желісіне қосылған кезде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы пайдаланылмаса, оны желіден ажырату ұсынылады.
- Массаж жастықшасын тек осы нұсқаулыққа сәйкес пайдаланыңыз.
- Осы нұсқаулықта сипатталмаған қосымшаларды пайдаланбаңыз.
- Розетка немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, ақаулық болса немесе құрылғыға су тиіп кетсе, массаж жастықшасын қолданбаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны ұйықтап жатқанда пайдаланбаңыз.
- Жақында бөлмеде коррозиялық аэрозольдар шашылған болса, массаж жастықшасын қолданбаңыз.
- Инфрақызыл қыздыру салдарынан өрт шығу қаупін болдырмау үшін құрылғының астына жастықтарды немесе басқа материалдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ажырату үшін барлық функцияларды өшіріп, ашаны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны қан айналымы нашар және сезімтал терісі бар адамдарға пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғыны жарақаттанған, әдеттен тыс пигментті немесе сезімтал емес теріге қолданбаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

## Негізгі функциялар

- Инфрақызыл жылытуы бар 16 массаж басы шаршауды басады және демалуға көмектеседі.
- Массаж бастарының қозғалысының екі бағыты: сағат тілімен және сағат тіліне қарсы.
- Массаж жастықшасының пішіні дененің әртүрлі аймақтарын уқалауға мүмкіндік береді: мойын, арқа, төменгі арқа және т.б.
- Массаж жастығы шаршауды, кернеуді және бұлшықет ауырсынуын жеңілдетуге, қан айналымын және жасуша алмасуын жақсартуға мүмкіндік береді.
- Автокөлік адаптері жастықты үйде немесе кеңседе ғана емес, сонымен қатар жолда пайдалануға мүмкіндік береді.


## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MP-40BW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат адаптерінің параметрлері:
  - Кіріс: 100–240 В, 50 Гц.
  - Шығыс: 12 В = 2 А.
- Қуаты: 24 Вт.
- 3 режим.
- Инфрақызыл жылыту.
- 15 минуттан кейін автоматты түрде өшіру.
- 16 массаж роликтері.
- Екі бағытта айналу.
- Желіден және темекі тұтандырғышынан қуат көзі.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы. ағымдағы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Сымды бекіту түрі: X.

## Жинақталым

- Массаж жастығы.
- Желі адаптері.
- Шылым шегетін розетка.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғыны пайдалану

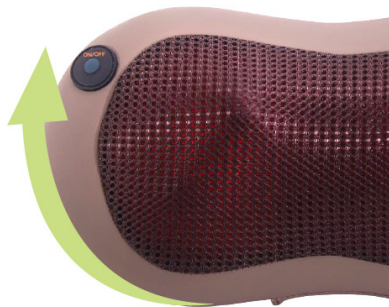

Құрылғыны инфрақызыл массаж режимінде қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Массаж бастары сағат тілімен қозғалады.



Құрылғыны инфрақызыл қыздыру арқылы сағат тіліне қарсы массаж режимінде қосу үшін қуат батырмасын екінші рет басыңыз.



Инфрақызыл қыздыруды өшіру үшін қуат батырмасын үшінші рет басыңыз.



Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын төртінші рет басыңыз.



Массаж бастарының айналу жылдамдығы мен күшін реттеу үшін жылдамдық батырмасын басыңыз.



Массаж бағыты әр минут сайын өзгеріп отырады.

#### **МАҢЫЗДЫ:**

- Массаж сеансының ұсынылатын ұзақтығы — 15 минут.
- Бір бұлшықет топтарын қатарынан бірнеше сеансқа массаж жасамаңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай. Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Вэньчжоу Сунлин Хэлскеа Эквипмент Ко., Лтд.

Ваньсян тас жолы, Хуан Лун ауылы, Вань Цюань, Пинъян уезі, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

**Интернеттегі мекен-жайы:** www.dexp.club

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

