

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Массаждық ванна
SL-FB1

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Массаждық ванна аяқ күтіміне және босаңсытатын және емдік аяқ массажына арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз, әсіресе, егер сіз аяғыңыз ауруымен ауырсаңыз немесе аяғыңызға операция жасасаңыз, қант диабеті, белгісіз ауру немесе жүктілік болса.
- Қант диабетімен ауыратын науқастарға қолдану ұсынылмайды.
- Бұл құрылғыны дененің құрылғымен жанасатын бөлігінде қандай да бір сезімді сезіну мүмкіндігін шектейтін немесе толығымен блоктайтын медициналық жағдайы бар адамдардың пайдалануына тыйым салынады.
- Құрылғыны терінің сезімтал аймақтарында немесе қан айналымы нашар болса қолданбаңыз.
- Ашық жаралар, пигментация, ісіну, күйік, қабыну, тері бөртпелері немесе жаралар болса, құрылғыны ешқашан қолданбаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Ұсынылмаған тіркемелерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғының сымы және/немесе ашасы зақымдалған болса, немесе ол құлаған, зақымдалған немесе суға түсіп кеткен болса, оны ешқашан іске қоспаңыз. Диагностика және жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Сымды жылу көздерінен және қызған беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны қатты және тегіс жерде пайдаланыңыз.

- Ванна немесе душ қабылдау кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Тек құрғақ жерде қолданыңыз.
- Шанышқыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Аяғыңыз суда болғанда құрылғыны қосуға немесе ажыратуға әрекеттенбеңіз.
- Құрылғының үстінде немесе оның ішінде тұрмаңыз. Құрылғыны тек отырған күйде пайдаланыңыз.
- Құрылғының ыстық беттерін абайлап ұстаңыз.
- Құрылғы қосулы тұрғанда оны кез келген затпен жаппаңыз. Шамадан тыс қызу өртке, электр тогының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларына кіруге тыйым салмаңыз. Желдету саңылауларын талшықтан, шаштан және т.б. таза ұстаңыз.
- Құрылғының саңылауларына ешбір затты салмаңыз.
- Аэрозольдерді жұмыс істеп тұрған құрылғының жанында қолданбаңыз.
- Құрылғыны қосулы қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны сумен толтырмас немесе жылжитпас бұрын оны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғының қызып кетуіне жол бермеу үшін оны 30 минут қолданғаннан кейін өшіріңіз. Процедураны жалғастырғыңыз келсе, келесі сеанс алдында құрылғыны суытыңыз.
- Бұл құрылғыны пайдалану жағымды және ыңғайлы болуы керек. Ауырсыну немесе ыңғайсыздық пайда болса, қолдануды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз.
- Егер сіз ұйқышылдықты сезсеңіз, құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Егер сіз ұйықтай бастасаңыз, оны пайдалануды тоқтатыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін қуат батырмасын басып, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны қуат сымынан ұстамаңыз немесе сымды тұтқа ретінде пайдаланбаңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP.
- Үлгісі: SL-FB1.
- Қуаты: 320 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Жиналмалы дизайн.
- Инфрақызыл жылыту.
- Массаж роликтерінің саны: 4.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


Құрылғы схемасы

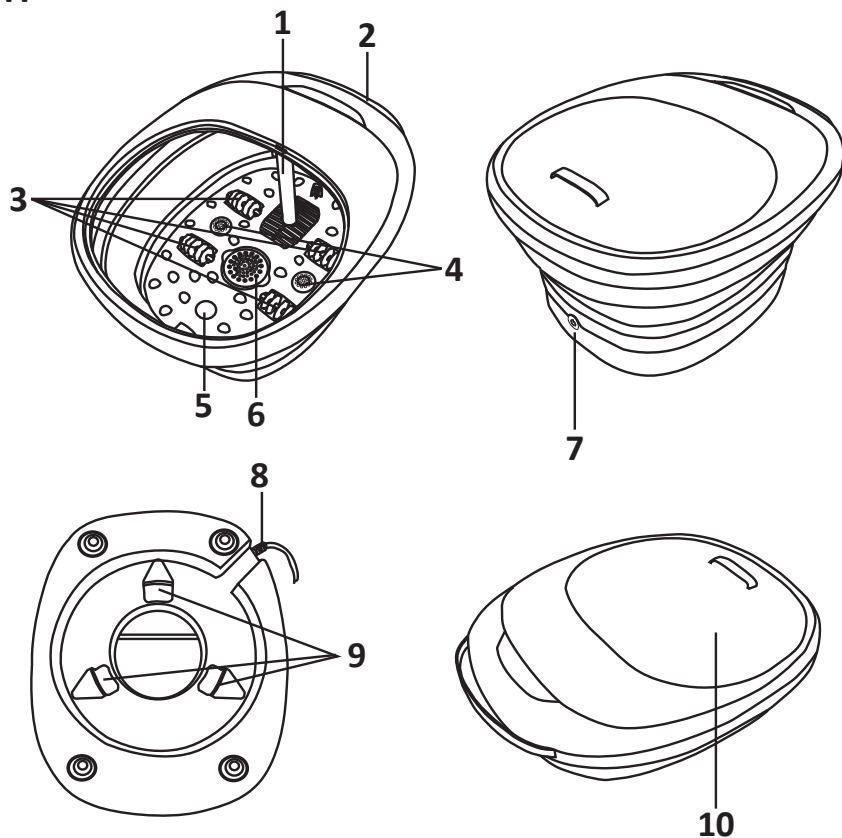

1. Тірек өзегі.
2. Тұтқа.
3. Массаж роликтері
4. Көпіршіктердің шығуы үшін тесіктер.
5. Индикатор.
6. Шөптерге/эфир майларына/ванна тұздарына арналған бөлік.
7. Қуат батырмасы.
8. Қуат кәбілі.
9. Қуат сымның қысқыштары.
10. Қақпақ.

Пайдалану

1. Құрылғыны көлденең қойып, қақпақты алыңыз.
2. Құрылғыны ашыңыз, панельді жоғары көтеріп, құрылғының ішіндегі тірек штангасын тиісті ойыққа орнату арқылы оны осы күйде бекітіңіз.

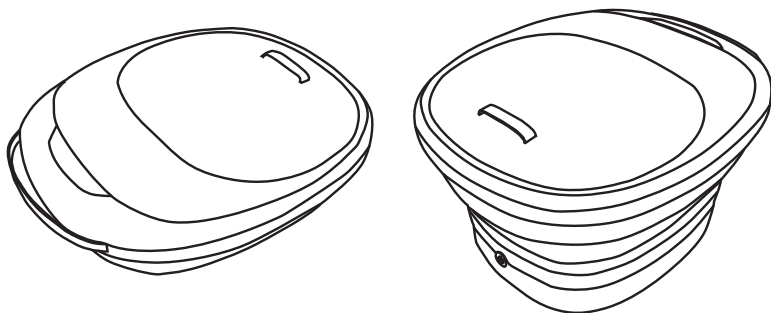

3. Ішіне 40 °С аспайтын температурада су құйыңыз.

Назар аударыңыз: құрылғыны қоспас бұрын резервуарды сумен толтыру керек. Құрылғыны сумен толтырмай қолданбаңыз.

4. Ашаны розеткаға қосып, қуат батырмасын басыңыз: индикатор қызыл болып жанады, су қыза бастайды, көпіршіктер пайда болады.
5. Бұл құрылғыда температураны орнату мүмкіндігі жоқ, сондықтан су температурасы сізге қолайлы температураға жеткенде қыздыруды тоқтату үшін қуат түймесін басып құрылғыны өшіріңіз. Су суыған кезде қыздыруды жалғастыру үшін қуат батырмасын қайта басыңыз.
6. Қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Құрылғыны толығымен суытыңыз.
7. Суды төгіп, құрылғыны құрғатып сүртіңіз.
8. Қуат сымын құрылғының астыңғы жағындағы қыстырғыштарға ораңыз.
9. Құрылғыны қақпақпен жабыңыз және оны таза, құрғақ жерде сақтаңыз.

Қолдану бойынша кеңестер

- Құрылғыны күніне бір рет ұйықтар алдында 20–30 минут бұрын пайдалану ұсынылады. Ұсынылатын температура диапазоны 38–42 °С.
- Шомылу кезінде терлеу күшейетіндіктен, құрылғыны қолданар алдында бір стақан жылы су ішіңіз.
- Процедура барысында суық ауа ағындарын болдырмаңыз: желдеткіштің немесе кондиционердің жанында отырмаңыз.
- Ваннаға арналған тұздарды немесе эфир майларын тікелей суға немесе тиісті бөлікке қосуға болады. Шөптік ваннаны қабылдау үшін шөп қоспасын арнайы қапшыққа салып, оны суға батырыңыз немесе оны бөлікке салыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Қақ пайда болмас үшін құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден тазалаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тек жұмсақ, дымқыл шүберекпен және жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.
- Майларға, тұздарға және шөптерге арналған бөлікті мезгіл-мезгіл тазалаңыз: сүзгіні алып тастаңыз, кірді кетіріңіз, оны сумен шайыңыз және сүзгіні орнына қойыңыз.
- Сақтау алдында зең пайда болуын болдырмау үшін қалған ылғалды құрғақ шүберекпен немесе сүлгімен сүртіңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Сэньлин Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№666, Фэнлянь тас жолы, Ваньцюань, Пинъян уезді, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. v.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен тыс ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



