

Ирригатор
EVOLUTION WF-01Руководство
по эксплуатацииДля беременных
женщин:

Во время беременности женщины склонны чаще испытывать покраснение и опухание десен и должны сохранять гигиену рта, чтобы обеспечить здоровье зубов и деснам.

- Выберите щетку с мягкими щетинками и тщательно промойвайте десны.

- При утренней тошноте прополоскайте или промойте рот водой.

- Пейте много воды или используйте жвачку без сахара, чтобы улучшить выделение слюны и уничтожить бактерии.

- Чистите зубы дважды в день: утром и вечером, и каждый день используйте зубную нить.

Для взрослых:

- Используйте антибактериальный раствор для полоскания, чтобы сократить образование зубного налёта.

- Взрослые ещё могут остановить разрушение зуба или корня, если произошла рецессия десны. Для людей старшего возраста очень важно тщательно промывать дёсны, зубы, открытые

корневые поверхности, чтобы убрать зубной налёт и остатки еды.

- Повышение фторирования: перейдите на фторсодержащую зубную пасту или каждый день полоскайте рот фторсодержащим раствором.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Evolution».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубного пространства. Прибор пускает пульсирующую струю воды под давлением, тем самым очищая ротовую полость, массирует десну, улучшает кровообращение, очищает межзубные пространства и зубодесневые карманы от налета и остатков пищи. Наряду с ежедневной чисткой зубов и использованием зубной нити, ирригатор повышает эффективность гигиены полости рта, предотвращает возникновение кариеса, освежает дыхание, уменьшает риски возникновения заболеваний ротовой полости.

Портативный ирригатор EOLUTION WF-01 работает от аккумулятора и заряжается универсальным кабелем USB Type-C.

Данное устройство предназначено для бытового применения внутри помещений для очистки полости рта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Ирригатор EVOLUTION WF-01
Режим работы: Нормальный/Мягкий/Пульсирующий
Давление воды: 550-1100 КПа
Объем ёмкости для воды: 190 мл
Номинальная входная мощность: 2 Вт
Характеристики батареи: 3,7 В, 1500 мАч (5,55 Вт/ч)
Функция памяти режима: Запоминает последний использованный режим
Время автономной работы: 30 минут (2 минуты за одно использование)
Время зарядки: 6 часов
Степень защиты от воды: IPX7



КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит: ирригатор, 4 сменные насадки, чехол, USB Type-C кабель, руководство по эксплуатации.



Насадки в комплекте

- 1.Классическая струйная насадка.
- 2.Пародонтологическая насадка: при пародонтальных карманах, язвах и воспалении десен.
- 3.Ортодонтическая насадка: для брекетов, ортодонтических процедур.
- 4.Насадка для чистки языка: для свежего дыхания.

ОПИСАНИЕ НАСАДОК



Классическая струйная насадка
Эту насадку можно использовать каждый день, чтобы глубоко очистить зоны между зубами и под линией дёсен, куда не достаёт обычная зубная нить и щётка.



Ортодонтическая распыляющая насадка
У этой насадки конусообразная щётка, которая сделана так, чтобы достать под проволокой и вокруг брекетов. Она идеальна для тех, кто носит брекеты или другие ортодонтические системы. Двигайте насадку вдоль линии дёсен, останавливаясь для аккуратной очистки зоны между зубами и брекетами и удаления остатков еды и налёта.



Распылитель для пародонтальных карманов
Эта насадка промывает и массирует зону под дёснами, получая доступ к очагам поражения.



Скребок для языка
Эта насадка в виде ложки эффективно удаляет бактерии с языка, чтобы предотвратить плохой запах изо рта. Расположите скребок в центре языка, практически в его задней части. Включите устройство и аккуратно продвигайтесь к передней части языка с небольшим давлением. Повторите, если требуется.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



- 1.Насадки
2. Гнездо для установки насадки
3. Кнопка для снятия насадки
4. Порт для зарядки
5. Резервуар для воды
6. Отверстие для залива воды
7. Кнопка включения/выключения/Кнопка выбора режима работы/ Светодиодный индикатор

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Индикатор не загорается при нажатии кнопки питания.	Низкий заряд батареи.	Зарядите устройство.
Короткое время работы после зарядки.	Неисправность аккумулятора.	Обратитесь в сервисный центр.
Индикатор не загорается во время зарядки.	Плохое подключение к источнику питания.	Попробуйте еще раз подключиться к источнику питания или заменить зарядный кабель.
Слишком низкое давление воды.	Повреждение насадки или разряжен аккумулятор.	Смените насадку или зарядите аккумулятор.

Если проблемы по-прежнему не решены, свяжитесь с авторизованным сервисным центром для ремонта или замены. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство!

УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ

Если Вы используете ирригатор один раз в день или меньше, рекомендуется заряжать его один раз в неделю ночью. Если Вы используете его дважды в день и больше, заряжайте устройство чаще. Не разряжайте аккумулятор до конца, так как это может сократить его время работы. Если ирригатор необходимо хранить долгое время (6 месяцев или больше), удостоверьтесь, что он полностью заряжен.

УТИЛИЗАЦИЯ

С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды устройство для утилизации необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы. После приобретения ирригатора выдержите его при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы предотвратить повреждение из-за резкого изменения температуры. Полностью зарядите батарею.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Убедитесь, что зарядный порт плотно закрыт. Откройте крышку резервуара для воды.



2. Надавите на резервуар и сдвиньте его вниз до указанной на резервуаре стрелки.



3. Наполните резервуар водой и закройте крышку резервуара до щелчка.


Примечание:

- Рекомендуется использовать теплую воду,

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Гарантийный талон необходимо предъявить по адресу в сервисный центр в течение всего гарантийного срока. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек). Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром. Товар принимается в гарантийное обслуживание в чистом виде. Гарантия распространяется на все производственные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания.

минеральную воду и водопроводную воду температурой не выше 40°С;
• Добавьте небольшое количество жидкости для полоскания рта для свежести;
• Не добавляйте химические вещества, такие как зубная паста или другие твердые вещества, чтобы избежать засорения или повреждения устройства.

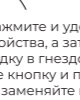

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
2. Повреждение устройства, вызванное его использованием в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т. е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Неисправности, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, попаданием жидкостей, пыли, насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Товары, отремонтированные вне авторизованных сервисных центров или гарантийных обязательств.
6. Повреждения, возникшие в результате изменения конструкции устройства пользователем или некалифицированной замены его компонентов.
7. Механические повреждения, в том числе из-за небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
8. Нарушение правил руководства по эксплуатации.
9. Неправильная подача сетевого напряжения.
10. Внесение технических изменений.
11. Ущерб по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).
12. Расходные материалы, такие как, например, насадки.

5. Расположите насадку во рту, наклонитесь над раковиной и нажмите кнопку включения. Для переключения режимов кратковременно нажмите кнопку.

Для отключения питания зажмите кнопку на несколько секунд. Ирригатор автоматически выключается после двух минут работы. Чтобы не испачкаться, оставляйте насадку во рту, пока устройство работает.

Не располагайте насадку вплотную к зубам и деснам, чтобы поток воды аккуратно убрал остатки еды.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок. **Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавцов полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется продавцом		ФИО и телефон покупателя	
Наименование устройства	Ирригатор		
Модель устройства			
Серийный номер			
Наименование продавца			
Дата продажи			

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений. В полном комплекте, проверен в моем присутствии, претензии по качеству товара не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Ремонт			
Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Выберите один из трех режимов работы в зависимости от своих нужд. Зажмите кнопку включения и переключения режимов в течение секунды, чтобы включить ирригатор. Чтобы выбрать необходимый режим, быстро нажмите ещё раз. Один раз для обычного режима, два раза – для мягкого и три – для импульсивного. Световой индикатор поменяет цвет на выбранный режим.

• Нормальный режим – синий индикатор. Этот режим непрерывного распыления удаляет зубной налет и остатки еды для глубокого очищения.
• Мягкий режим – голубой индикатор. Если у Вас чувствительные зубы или десны, этот режим даст им более мягкий уход и очистку.
• Импульсивный режим – зеленый индикатор. Этот режим промассирует Ваши десны и прочистит пространства между зубами тремя опрыскиваниями в секунду.

Примечание:
• Не направляйте струю воды непосредственно на пародонтальные карманы, это может вызвать кровоточивость десен.
• Тем, кто использует ирригатор впервые или у кого чувствительные десны, рекомендуется начать со щадящего режима, а затем использовать другие режимы или насадки после привыкания.
• Если Ваши десны сильно кровоточат после использования этого устройства или продолжают кровоточить после 1 недели использования устройства, прекратите использование ирригатора и проконсультируйтесь со стоматологом.

• Чистите зубы утром и вечером в течение двух минут.
• Используйте зубную пасту с фтором, чтобы предотвратить кариес.
• Используйте зубные щетки с мягкими щетинками.
• Чистите язык, чтобы убрать остатки еды.
• Посещайте стоматолога раз в полгода.

ОСОБЫЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Для детей:

Подавайте хороший пример детям в вопросе ухода за гигиеной рта и помогите им заставить зубы и десны, чтобы избежать проблем с зубами.

• Чистите зубы утром и вечером в течение двух минут.
• Используйте зубную пасту с фтором, чтобы предотвратить кариес.
• Используйте зубные щетки с мягкими щетинками.
• Чистите язык, чтобы убрать остатки еды.
• Посещайте стоматолога раз в полгода.

• Чистите зубы дважды в день зубной щеткой средней жесткости.
• Используйте зубную нить, чтобы убрать остатки еды.
• Пейте много воды, особенно после приема пищи, чтобы смыть остатки еды.
• Ограничьте употребление снеков, особенно снеков с повышенным содержанием кислот и сахара.
• Используйте трубочку, чтобы ограничить контакт зубов с кислыми напитками, например, апельсиновым соком.

• Посещайте стоматолога раз в полгода.

Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (Ozon, Onliner, Яндекс.Маркет или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

Еще больше товаров
EVOLUTION



WILDBERRIES

OZON

21vek.by
онлайн-гипермаркет

onliner

5 ЭЛЕМЕНТ

XISTORE
Полное наименование
и адрес продавца
на территории Беларуси

DNS