

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЗА ТЕЛОМ,
СЕРИИ AMG, БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

BODY SHAPER PROMAX

AMG128



8

НАСАДОК
для любого
вида массажа

GÉZATONE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем Вас с приобретением массажера для тела с ИК прогревом 8 в 1 Gezatone «Body Shaper Pro» модели AMG 128! Мы рады, что Вы остановили свой выбор на изделии из нашего ассортимента.

Перед использованием аппарата рекомендуем Вам внимательно прочитать инструкцию по его применению. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время эксплуатации и хранения аппарата следует соблюдать требования электробезопасности во избежание опасности поражения электрическим током или возникновения пожароопасной ситуации.

1. Применяйте аппарат строго по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Изготовитель и его торговый представитель не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате ненадлежащего или неосторожного обращения с аппаратом.
3. Аппарат предназначен исключительно для личного пользования. Аппарат не подлежит применению в медицинских или социальных учреждениях, а также в коммерческих целях.
4. Не используйте с аппаратом другие насадки, помимо тех, что входят в комплект поставки.
5. После перемещения аппарата в теплое помещение с холода подождите не менее одного часа перед началом его использования.
6. Аппарат рассчитан на длительность цикла непрерывной работы не более 15 минут. Во избежание перегрева перед повторным включением дайте аппарату остыть в течение не менее 30 минут.
7. Поверхность аппарата в процессе работы может нагреваться. Лица с повышенной термочувствительностью должны проявлять осторожность.
8. Перед каждым использованием внимательно проверяйте, что корпус аппарата и электрический сетевой шнур не имеют повреждений. В случае обнаружения повреждений, а также после падения аппарата в воду или попадания любой жидкости внутрь корпуса дальнейшее использование аппарата категорически запрещается.
9. Запрещается использование аппарата в помещениях с высокой влажностью, во время приема ванны, под душем, в плавательном бассейне.
10. Если аппарат упал в воду, не предпринимайте попыток извлечь его из воды, пока он находится под напряжением! Незамедлительно отключите шнур электропитания от сети. Только после этого можно достать аппарат. Дальнейшая эксплуатация аппарата, внутрь корпуса которого попала вода, категорически запрещена!
11. Ремонт аппарата следует производить у официального торгового представителя или в авторизованном сервисном центре. Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.
12. Запрещается использование аппарата в местах проведения работ с горючими аэрозолями или газообразным кислородом.
13. Не пользуйтесь аппаратом под одеялом, покрывалом или подушкой и не накрывайте включенный в сеть аппарат указанными или аналогичными предметами. Это может привести к перегреву аппарата и возникновению пожароопасной ситуации.

14. Строго запрещается применять два электроаппарата одновременно (например, массажер и ванночку для ног).
15. Производите подключение/отключение от электросети и использование аппарата только сухими руками.
16. Оберегайте аппарат от падений и ударов.
17. Отключайте аппарат от сети сразу же после окончания его использования и перед проведением чистки.
18. Детям и лицам с ограниченными способностями к самообслуживанию или наличием психических заболеваний можно пользоваться аппаратом только под постоянным контролем со стороны взрослых или обслуживающих их лиц.
19. Запрещается применять аппарат на животных.
20. Храните аппарат в недоступном для детей месте.
21. Храните аппарат при комнатной температуре в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, вдали от нагревательных приборов.

ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА



8

НАСАДОК для любого вида массажа



гладкая
массажная насадка




массажная насадка
«волна»



шариковая
массажная насадка



фигурная
массажная насадка

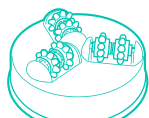

роликовая
массажная насадка



массажная насадка
с гладкими роликами



массажная насадка
с угловыми роликами



дополнительная насадка
с эластичной
тканевой мембраной



насадка
шлифовальная для ног

Аппарат состоит из корпуса и восьми сменных насадок с различной формой массажной поверхности + насадка с эластичной тканевой мембраной, закрывающая поверхность массажных насадок, позволяющая проводить более мягкий и комфортный вариант массажа, а также зарядного устройства.

Внутри корпуса расположен электродвигатель, частоту вращения которого можно плавно изменять в широких пределах с помощью встроенного электронного регулятора оборотов. Вращение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение насадок за счет установленной на валу эксцентриковой муфты, служащей также для крепления массажных насадок.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДОК

Насадки плотно фиксируются на эксцентриковой муфте. Взаимной ориентации муфты и насадок не требуется. Для установки насадки на эксцентриковую муфту просто надавите на насадку в направлении муфты до плотной установки насадки (до упора). Для снятия насадки возьмитесь кончиками пальцев за ее край и аккуратно потяните вниз.

Внимание! Будьте аккуратны при установке и снятии насадок и не прикладывайте чрезмерного усилия.

Дополнительная насадка с эластичной тканевой мембраной устанавливается поверх массажных насадок и фиксируется на корпусе аппарата с помощью пластиковых выступов ключей. Для фиксации насадки поверните ее вправо, с усилием до щелчка, фиксаторы насадки должны плотно войти в пазы, для снятия – поверните влево относительно корпуса аппарата.

Фигурная насадка имитирует традиционный китайский массаж. **Гладкая** массажная насадка используется для массажа живота, для декомпрессионного массажа и для снижения веса. **«Шариковая»** и **3 роликовые** массажные насадки помогают избавиться от эффекта «апельсиновой корки» и способствуют сжиганию подкожного жира. Массажная насадка **«Волна»** улучшает контуры тела, расслабляет мышцы и снимает стресс. **«Шлифовальная»** насадка используется для удаления мозолей и жесткой кожи со ступней ног. **Дополнительная** насадка с эластичной тканевой мембраной позволяет проводить более мягкий и комфортный вариант массажа, предотвращает спутывание волос во время процедуры. Используется только с массажными насадками. ИК-прогрев улучшает местное кровообращение и способствует снятию спазма мышц. Кроме того, инфракрасный прогрев улучшает внешний вид и тонус кожи, помогает устранить проявления целлюлита.

Внимание! Не используйте дополнительную тканевую насадку с роликовыми насадками и шлифовальной насадкой.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С АППАРАТОМ

1. Установите на аппарат массажную насадку в соответствии с видом проводимого массажа. При необходимости установите сверху дополнительную насадку с эластичной тканевой мембраной (кроме случая использования шлифовальной насадки).

Внимание! Не используйте дополнительную тканевую насадку с роликовой и шлифовальной насадкой).

2. Перед использованием прибора убедитесь, что батарея имеет достаточный уровень заряда. Подключите зарядное устройство к прибору, предварительно удалив заглушку из разъема зарядки. При зарядке батареи индикатор на зарядном устройстве горит красным цветом, когда батарея заряжена - зеленым. Полный заряд АКБ занимает около 3 часов.

3. Включите прибор кнопкой "вкл/выкл". Прибор включится с настройками по умолчанию: 1-я программа и 3-й уровень интенсивности. Менять уровень интенсивности можно кнопками "+" и "-", всего в приборе 5 уровней интенсивности. Не рекомендуется начинать массаж с максимального уровня, выберите комфортный для себя уровень интенсивности, подходящий для вас.

4. Прибор имеет 5 программ проведения процедур, которые переключаются кнопкой "М". Выберите подходящую для вас программу, исходя из собственных ощущений. Использование массажных гелей и масел дополняет и усиливает благотворное действие массажа (кроме использования шлифовальной насадки).

5. При использовании массажных насадок перемещайте массажер по поверхности тела плавными круговыми движениями, следуя направлению массажных линий.

6. После очистки и сушки уберите аппарат и насадки в сумочку для хранения.

Замечание:

Прибор отключится автоматически через 15 минут работы.

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

1. Рекомендуемыми зонами воздействия являются плечи и задняя поверхность шеи, спина, руки и ноги (бедро, икры и ступни). Аппарат также можно использовать для массажа всего тела, кроме областей, оговоренных в разделе «Противопоказания».

2. В начале использования оказывайте массажером легкое воздействие на нужную область. Постепенно можно увеличить интенсивность в зависимости от индивидуальной ощущений и потребностей.

3. Вы можете воспользоваться внешней помощью для достижения максимальной эффективности массажа или для воздействия на труднодоступные области тела.

4. Каждый участок массируйте не дольше 3 минут, затем переходите к другой области. После того, как аппарат использовался в течение 15 минут, обязательно отключите питание и дайте аппарату остыть.

а. Общий восстанавливающий массаж

Чтобы полностью расслабиться (условие, необходимое для хорошего массажа), следует лечь на относительно жесткую поверхность. Руки слегка отвести в стороны ладонями кверху. Начинайте массаж со свода стопы и поднимайтесь вдоль ног до седалищной складки. Затем проделайте массаж ягодиц и далее вдоль позвоночника вверх. Длительность массажа 10 минут. Нажатие и интенсивность регулируйте по ощущениям.

в. Массаж спины

Выполняйте плавные медленные движения вверх – вниз слева и справа от позвоночника в районе лопаток с амплитудой 30 см, не отрывая массажер от тела. Продолжительность воздействия 5-6 минут.

с. Массаж внутренней стороны бедра

Сядьте на край стула или встаньте, поставив согнутую ногу на табуретку. Медленно ведите массажером от ступни до сгиба колена и далее до ягодиц. Продолжительность воздействия 4-5 минут.

д. Массаж бедер и ягодиц

Бедра и ягодицы наиболее подвержены накоплению жировых отложений. Поэтому здесь требуется наиболее энергичный массаж. Выполняйте массаж легкими вращательными движениями снизу вверх. Продолжительность воздействия 5 минут для каждой половины тела.

е. Массаж до и после занятий спортом

Массажер используется перед занятиями спортом для разогрева мышц. Массажер используется после физической нагрузки для восстановления мышц, выведения из мышц молочной кислоты и токсинов. Массаж производится в направлении мышечных волокон. Движения медленные и широкие. Продолжительность 5 минут.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- Онкологические заболевания.
 - Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.
 - Острые воспалительные процессы.
 - Нарушение целостности кожи (царапины, ссадины, экземы), раны, острые периоды травмы, дерматит в период обострения, присутствие имплантатов в тканях в зоне воздействия.
 - Гиперчувствительность кожи.
 - Состояние беременности.
 - Нельзя проводить воздействие на области с варикозным расширением вен, тромбозом, области проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов.
 - Нельзя оказывать воздействие на голову, позвоночник, кости, суставы, боковые и переднюю части шеи, область гениталий, грудь (для женщин).
 - При обострении какого-либо тяжелого хронического заболевания рекомендуется временно воздержаться от проведения вибромассажа.
 - Лицам, страдающим гипертонией, неврологическими и ортопедическими заболеваниями, следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
- Внимание! Массаж должен быть приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь у врача-физиотерапевта.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед проведением очистки выключите питание массажера.
2. Все сменные насадки следует промывать в теплой воде после каждого использования до полного очищения от остатков косметического средства. При необходимости можно добавить в воду немного мыла или нейтрального моющего средства. Просушите насадки перед хранением или повторным использованием.
3. При загрязнении поверхности массажера протрите его мягкой, не оставляющей ворса тканью, слегка смоченной в воде. При сильном загрязнении допускается добавление в воду небольшого количества нейтрального моющего средства.
4. Запрещается использовать для очистки аппарата и насадок абразивные материалы или растворители. Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь корпуса массажера.
5. Не пользуйтесь массажером, если его поверхность еще влажная!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: DC 8,4В, 50 Гц

Потребляемая мощность: не более 16 Вт

Продолжительность непрерывной работы: не более 15 мин.

Диапазон рабочих температур +18 ... 35°C при влажности 20-85%

Габаритные размеры (в упаковке): 350x120x185 мм

Масса: 1.2 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Прибор для ухода и массажа за телом, серии AMG,
модель AMG 128, бытовой электрический, т.м. Gezatone – 1 шт.

Сменные насадки – 8 шт.

Дополнительная тканевая насадка – 1 шт.

Зарядное устройство - 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

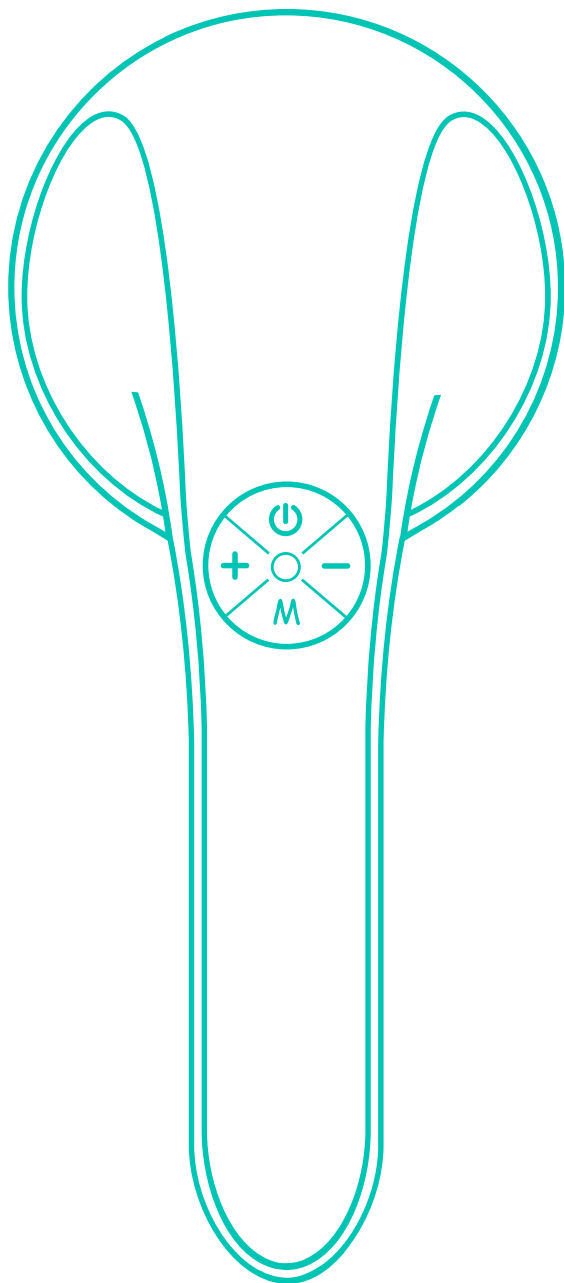

GEZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЗА ТЕЛОМ, СЕРИЯ (ТИП) AMG, МОДЕЛЬ AMG128, БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Т. М. GEZATONE

Изготовитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Филиал завода-изготовителя: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК" адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C. / 2 фл. Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чяннг Рд, Тайпей, (Китай), Тайвань. Импортёр/уполномоч. изготовителем орг.: ООО «МИТРИДАТ», РФ, Москва, Алтуфьевское ш., д. 41, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком 8, тел.: 8 (495) 225 25 83. Срок службы: 3 года. Способ применения и дату производства: см. инструкцию.

KZ. Gezatone сауда белгісінің денеге күтім жасауға және массаж жасауға арналған аспап серия (түрі) AMG, модель AMG128, тұрмыстық электрлік
Дайындаушы: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", мекенжайы: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Дайындаушы зауыттың филиалы: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК" мекенжайы: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD, Taipei, Taiwan R.O.C. / 2 фл. Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чяннг Рд, Тайпей, (Китай), Тайвань. Импорттаушы/дайындаушының уәкілетті мекемесі: "МИТРИДАТ" ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қ., Алтуфьевское тас жолы, 41 үй, 1 құрыл., 2 қабат, үй-жай I, 8 белме, тел.: 8 (495) 225 25 83.

