

DEXP

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

DEXP ETB-130W
електрлік тіс щеткасы

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Біз сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған және өндірілген бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты, сондай-ақ құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім жасау туралы ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың қауіпсіздігіне назар аударыңыз, оны құрылғыны одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электрлік тіс щеткасы — тісті тазалауға және тіс етіне массаж жасауға арналған құрылғы.


Сақтық шаралары

- Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Егер сіз ыңғайсыздық немесе ауырсыну сезінсеңіз, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және дәрігерге қаралыңыз.
- Құрылғыны күн сәулесінен және жоғары қуатты жылу көздерінен алыс ұстаңыз.
- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулық байқалса (мысалы, деформация, тіс щеткасының немесе зарядтағыштың қызып кетуі, жану иісі немесе біртүрлі шу болса) пайдалануды тоқтатыңыз және қуат көзінен ажыратыңыз.
- Зарядтағыштың жұмыс кернеуі номиналды кернеуге сәйкес келетініне және зарядтағыш розеткаға мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, өрт немесе электр тогы болуы мүмкін.
- Зарядтау кәбілін шаңнан құрғақ шүберекпен үнемі тазартып тұрыңыз, оны Құрылғы мен қуат көзінен ажыратқаннан кейін. Әйтпесе, ылғал кәбілдің оқшаулауына зақым келтіруі мүмкін, бұл өртке әкеледі.
- Зақымдалған кәбілі бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған кәбілді ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек пакетке кіретін зарядтағышпен зарядтаңыз.
- Егер сіз бұл құрылғыны ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Ауыр пародонтит, ауыз қуысының басқа да аурулары бар немесе ауыз қуысы ауруларына күдікті адамдар қолданар алдында дәрігермен кеңесу керек.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек бастапқы зарядтағышты қолданыңыз. Температура режимін сақтаңыз. Батареяларды қалыпты ауа ылғалдылығында +15°C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінде қалдыра алмайсыз. Бөлшектемеңіз, күйдірмеңіз, зақымдалған іздері бар батареяларды пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

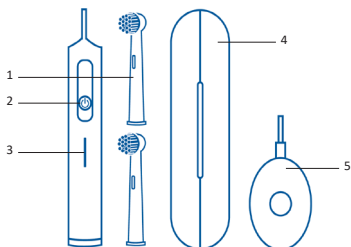

1. Тіс щеткасының саптамасы.
2. Көп функциялы батырма.
3. Жарық индикаторы.
4. Жол құты.
5. Зарядтауға арналған орын.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ETB-130W.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Алынатын саптама.
- 3 жұмыс жылдамдығы: төмен (4500 айн/мин.), орташа (6500 айн/мин.), жоғары (8800 айн/мин.).
- Автоөшіру таймері (2 минут).
- Таймер-индикатор ауыз қуысының келесі бөлігін тазалауға көшу қажеттілігі туралы сигнал беретін индикатор (30 сек.).
- Құрылғыны толық зарядтау уақыты: 12 сағат.
- Құрылғының автономды жұмыс уақыты: 15 күн.
- Аккумулятор: Li-ion, 600 мА•сағ.
- Ылғалдан қорғау класы: IPX7.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Саптамалар — 2 дана.
- Зарядтауға арналған орын.
- Жол құты.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Тісті тазалау

1. Ылғал қылшықтарға тіс пастасының қажетті мөлшерін жағыңыз.
2. Құрылғыны қосу үшін көп функциялы батырманы басып тұрыңыз.
3. Көп функциялы батырманы қысқаша басып, сәйкес режимді таңдаңыз. Бір басу үш жылдамдықтың біріне сәйкес келеді. Щетка автоматты түрде таңдалған режимде жұмысын жалғастырады. Тұтқадағы жарық индикаторы таңдалған жылдамдықты көрсетеді: көк жарық — төмен жылдамдық, жасыл — орташа, қызыл — жоғары.
4. Тістеріңізді тазалаңыз
5. Қолданғаннан кейін құрылғыны өшіріп, қылшықтарды жақсылап шайыңыз.
6. Щетканы жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз.

Құрылғыны зарядтау

1. Зарядтауға арналған орынды электр желісіне қосыңыз.
2. Щетканы зарядтау орнына қойыңыз.
3. Тұтқадағы жарық индикаторы зарядтау процесі басталған кезде жыпылықтайды және құрылғы толығымен зарядталған кезде жыпылықтайды.
4. Зарядтау аяқталғаннан кейін щетканы зарядтау орнынан алыңыз және оны электр желісінен ажыратыңыз.

Ескерту:

- Алғашқы қолданар алдында құрылғының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жыпылықтайтын жарық индикаторы батареяның төмен зарядын көрсетеді.

Саптаманы ауыстыру

- Саптаманы орнату үшін оның алдыңғы бөлігін тұтқаның алдыңғы бөлігімен туралаңыз және саптаманы тұтқадағы арнайы стерженьге салыңыз.
- Саптаманы алып тастау үшін оны ақырын тартыңыз.
- Қылшықтардың деформациясы анықталған кезде саптаманы әр 3 ай сайын немесе одан ертерек өзгерту ұсынылады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ жерлерде жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғыны кез-келген жағдайда сатуға рұқсат етіледі.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Гуандун Хань Ичэнь Интэллидженд Тэкнолоджи Ко., Лтд.

302 каб., 1 ғим., Хуанчжуан, № 45 Чашань секция, Шида тас жолы, Чашань, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club